

SUB

RE CREATIVE DESIGN EXPERIENCE
96 rue Edouard Vaillant
FR-92300 Levallois-Perret
T +33 (0)1 56 33 39 39
F +33 (0)1 40 54 68 18

SUB pour NETTO

Projet : Gamme CDG

Produit : NOTICE BROSSE DENT ELECTRIQUE X4

Date de mise à jour : 24.07.2024

RDEF

Nom du fichier : 3250393452727_NOTICE_DPH_

BROSSE DENT ELECTRIQUE + RECHARGE_ELLIPSE.ai

Type d'impression : Offset

Support : papier

Opérateur : BENE

Logiciels : Illustrator & Photoshop CC

Visuel maquette

Visuel HD

COULEURS PRIMAIRES

BLACK

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

CYAN 50

MAGENTA 50

YELLOW 50

BLACK 50

COULEURS TECHNIQUES

TRACÉ

DOCUMENT D'EXECUTION

Il est indispensable de réaliser la photogravure :
Les images sont réalisées en quadrichromie,
le passage en pantone dans les visuels,
les recouvrements, grossis/maigris,
surimpressions de couleurs, calage chrome, etc.
sont à réaliser lors de l'étape de photogravure.

Dénomination

Légale de vente : X = 1,7 mm

Ingrédients : x = 1,2 mm

À consommer : x = -

TVN : x = -

Adresse

fournisseur : x = 1,5 mm


Poids / Volume : x = 4 mm

e métrologique : x = 3 mm

Triman : H = 6 mm



Le client ITM souhaite intégrer le FR pour tous les packs même monolingues

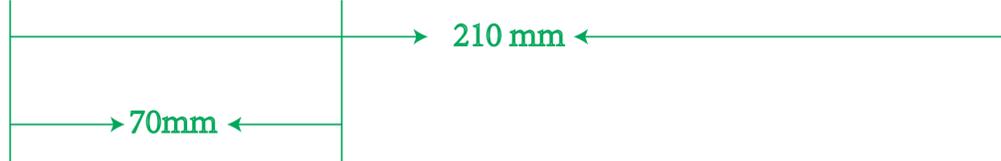

Netto

BROSSE À DENTS RECHARGEABLE



NOTICE D'UTILISATION
Brosse à dents électrique rechargeable
Modèle ET 103
Référence : CPSF-1015


INTRODUCTION

Lire attentivement la totalité de cette notice avant d'utiliser et/ou montrer à votre enfant comment utiliser cet appareil. Nous vous recommandons d'assister vos enfants lors de l'utilisation de l'appareil pour qu'ils se familiarisent avec le produit. Cette notice fait partie intégrante du produit. Elle contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant toute utilisation, lire toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utiliser le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Remettre cette notice et le packaging, si le produit est donné à un tiers.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Risque de blessure.
Les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser les brosses à dents s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Risque d'électrocution.
Aucun liquide ne doit pénétrer dans l'appareil et ne le plonger pas dans l'eau afin d'éviter tout dommage. Ne pas faire pénétrer de corps étrangers. S'adresser au service consommateur si l'appareil présente des dysfonctionnements ou des dommages visibles. Le cordon d'alimentation ne doit jamais être humide ou mouillé. Poser le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il puisse ne pas être coincé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Risque d'électrocution ! Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut. Ne jamais toucher le chargeur lorsque celui-ci est tombé dans l'eau. Retirer d'abord impérativement la fiche secteur ! Ne pas mettre le chargeur sous l'eau. Risque d'électrocution ! Ne pas chercher à réparer, ni à modifier le produit. Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure. Contacter le service consommateur. Brancher le chargeur uniquement sur du courant alternatif avec une tension conforme aux caractéristiques techniques indiquées au début de cette notice.

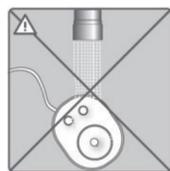

Risque d'électrocution.
Nettoyage : Avant chaque nettoyage, débrancher le chargeur (6) de la prise secteur ! Risque d'électrocution ! Pour débrancher le chargeur, toujours tirer sur la fiche de la prise et non sur le câble. Ne débrancher pas le chargeur avec les mains mouillées. Nettoyer le chargeur (6) exclusivement à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humidifié. Ne pas utiliser de nettoyant ou de solvant, ils risqueraient d'endommager la surface en plastique.
Entretien : Au bout de 3 mois environ, ou avant si la brosette (1) montre des signes d'usure, remplacer la par une nouvelle brosette (1).
Entretien de la batterie : Pour que la batterie conserve sa capacité maximale, débrancher le chargeur et décharger la batterie en utilisation normale au moins tous les 6 mois. En cas de chute de l'appareil, remplacer le même s'il n'y a aucun dommage apparent.

Risque de dommages matériels.
La brosse à dents électrique doit être chargée uniquement avec le chargeur fourni. Sinon, l'appareil risque d'être endommagé de façon irréparable. Faire fonctionner l'appareil uniquement avec les accessoires d'origine fournis. Ne pas mordre l'appareil, ni la brosette (1). Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées. Ne pas utiliser le chargeur fourni pour recharger des batteries non rechargeables. Ne pas brancher le produit sur son alimentation lorsqu'il est dans son emballage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - INSTALLATION & PREMIÈRE UTILISATION


Lire attentivement les instructions ci-dessous avant de charger les batteries.

AVANT LA TOUTE PREMIÈRE UTILISATION, CHARGER LE PRODUIT PENDANT 24h.

En cas de soins dentaires en cours, consulter votre dentiste avant d'utiliser cette brosse à dents électrique.

- 1. Avant installation :** Contrôler le matériel livré directement après avoir procédé au déballage afin de vous assurer que tout est complet et que rien n'a été endommagé. Si des dommages sont constatés, ne pas utiliser le produit.
- 2. Installation :** Poser ou ranger le chargeur (6) en un lieu sûr et stable, d'où il ne pourra pas tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- 3. Branchement :** Brancher le chargeur (6) sur une prise électrique. Placer le manche de la brosse (2) sur le chargeur. Charger pendant 24h avant la première utilisation afin d'éviter les problèmes de performance de l'appareil. A partir de la deuxième charge, le temps de charge est de 16h. Le voyant indicateur de charge (5) est allumé en vert lorsque le produit est en charge. L'indicateur de charge n'indique pas le niveau de charge de la batterie. Remarque : lorsque la batterie est très faible, il se peut que le voyant (5) ne s'allume pas immédiatement. Dans ce cas, remettre le manche sur son support jusqu'à charge totale de la batterie.
- 4. Utilisation :** Suivre les étapes ci-dessous pour utiliser l'appareil.
4.1. Installer/retirer la brosette : Si la brosette (1) n'est pas déjà installée sur le manche dans l'emballage, installer la brosette (1) sur le manche de la brosse (2) en l'emboîtant à fond. Pour retirer la brosette (1), tirer-la par le haut.
4.2. Première utilisation : Avant la première utilisation, nettoyer la nouvelle brosette (1) à l'eau claire.

AVERTISSEMENT : Au début, le frottement inhabituel peut provoquer des saignements au niveau des gencives, ce qui est tout à fait normal. Si ces saignements perdurent pendant plus de deux semaines, nous vous recommandons de consulter votre dentiste.
4.3. Brossage : Commencer par les dents du bas. Déplacer lentement la brosse dent après dent sur les surfaces extérieures, puis sur les surfaces intérieures, et enfin sur les surfaces de mastication. Ne pas frotter ou appuyer trop fort. La brosse à dents électrique procure automatiquement la bonne action de brossage. Dupliquer la méthode ci-dessus dans chacune des zones indiquées sur le schéma, 30 secondes par zone.

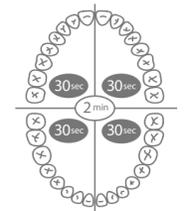

Après le brossage, éteindre l'appareil toujours en bouche en appuyant sur le bouton ON/OFF (3) jusqu'à ce que l'appareil s'arrête. Remarque : dans le cadre d'une utilisation quotidienne, le corps de la brosse à dents peut être remis sur le support de charge après chaque utilisation afin de maintenir son niveau de charge au maximum. Il n'y a aucun risque de surcharge. Cependant, afin de préserver l'environnement, nous recommandons de débrancher le chargeur jusqu'à ce qu'une remise en charge soit nécessaire.


5. Après chaque utilisation : Nettoyer la brosette en la retirant du corps. Rincer brièvement l'embout du manche. ATTENTION : lors du rinçage, tenir le manche vers le bas pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le corps.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. Brosette de rechange
2. Manche de la brosse
3. Bouton ON/OFF
4. Bouton sélection du mode de brossage
5. Indicateur de charge lumineux
6. Chargeur électrique et support

Usage conforme : Cet appareil est exclusivement destiné aux soins dentaires personnels dans le cadre domestique intérieur. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou médicale, ni pour l'administration de soins aux animaux. Ne pas l'utiliser à des fins professionnelles. Ce produit doit être exclusivement utilisé pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice.

Caractéristiques techniques :
Manche de brosse à dents :
Tension nominale : 2.4V DC.
Autonomie de la batterie à charge complète : jusqu'à 35 minutes.
Indice de protection du manche : IPX4.
Batterie : 2 x 1.2V NiMH, 400mAh.
Durée de charge : 16h (sauf première charge = 24h).
Chargeur électrique :
Alimentation en tension : 220-240V, 50/60Hz ~.
Puissance : 0,9W.
Classe de protection : II.
Indice de protection du chargeur : IPX7.

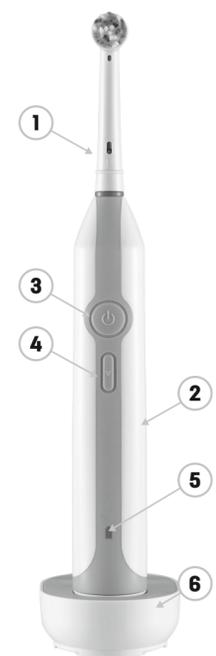

N° lot : sous le capot du manche

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Cette condition doit être respectée pour assurer la garantie. Cette garantie ne couvre pas :
- les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate,
- l'usure normale et particulièrement pour les brosettes,
- les défauts ayant un impact négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil.
Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. En cas de problème d'utilisation, essayer les actions suivantes :
1. Recharger la brosse pendant 16h et réessayer.
2. Vérifier que le chargeur (voyant allumé) soit correctement branché ou tester sur une autre prise.
3. Nettoyer la brosse comme indiqué dans cette notice.
4. Remplacer la brosette.
Si le problème persiste contacter le service consommateur.

MISE AU REBUT

En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous contribuerez à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé humaine.
Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié au recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre municipalité, votre déchèterie ou le magasin où vous avez acheté le produit. Ce traitement est applicable aux pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de système de collecte sélective.

Brosse à dents électrique rechargeable
Modèle ET 103
Référence : CPSF-1015-rev05/24



SERVICE CONSOMMATEURS NETTO
0 800 550 018
Service & appel gratuits
www.NETTO.fr

Fabriquée en Chine et importée par : ELLIPSE
92 boulevard du Général de Gaulle
59100 Roubaix - FRANCE