


Compagnon à domicile Santé connectée^{MC}

Guide de configuration



Étape 1

Branchez le câble d'alimentation dans une prise non reliée à un interrupteur mural.

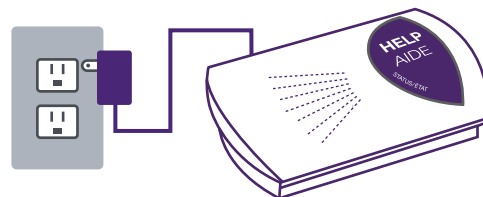

Étape 2

Mettez l'interrupteur au dos de la station de base **en position « I »**. Le voyant passera de l'orange clignotant au vert une fois la connexion établie.

Si le voyant clignote en rouge, le signal sans fil n'est pas assez fort. Déplacez la station à un meilleur endroit et appuyez sur le bouton de réinitialisation.




Étape 3

Testez la portée du pendentif :


- Appuyez sur **le bouton MODE** au dos de la station de base. Un message audio indique que l'appareil est en **mode d'essai de portée**.
- **Maintenez le bouton du pendentif enfoncé** en vous déplaçant dans la maison. Une tonalité indique que l'appareil est connecté à la station de base. Une interruption de la tonalité indique que la connectivité est faible.

- Relâchez le bouton du pendentif lorsque vous avez déterminé la portée. Appuyez sur **le bouton de réinitialisation** au dos de la station de base. Un message indiquera que **le système est prêt**.

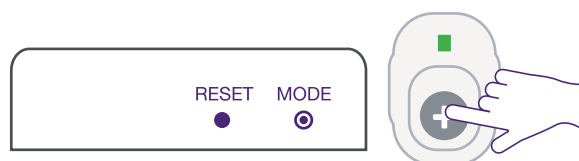

Étape 4

Faites l'essai du service **en appuyant sur le bouton du pendentif**. Lorsque le téléphoniste répond, présentez-vous et dites qu'il s'agit d'un appel d'essai.

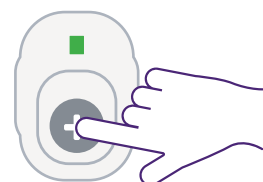

Pour obtenir de l'aide, visitez telus.com/csc ou composez le **1-888-505-8008**