



iO Gentle Care	iO Ultimate Clean	iO Specialized Clean	iO Radiant White
● ● ●	● ●	●	●

VŠETKY NAŠE ČISTIACE HLAVICE POSKYTUJÚ PRVOTRIEDNE
ODSTRANOVANIE ZUBNÉHO POVLAKU V POROVNANÍ
S MANUÁLNOU ZUBNOU KEFKOU

	iO2 	iO3 	iO5 	iO6 	iO9 	iO10
Technológia	Magnetická technológia iO™					
Režimy čistenia	3 vrátane režimu jemného čistenia		5 vrátane režimu veľmi jemného čistenia	5 vrátane režimov jemného čistenia a starostlivosti o ďasná	7 vrátane režimov veľmi jemného čistenia a starostlivosti o ďasná	
Na každodenné čistenie						
Bieliaci						
Senzitívny						
Super sensatívny						
Intenzívny						
Starostlivosť o ďasná						
Na čistenie jazyka						
Časovač čistenia	Po 30 sekundách zavibrovaním			Na displeji a v aplikácii		Na displeji, v aplikácii a na iO Sense
Nabíjanie	6–8 hodín nabíjania				3hodinové magnetické rýchle nabíjanie	
Senzor tlaku	Nadmerný tlak	Inteligentný senzor tlaku na ďasná				
Pripojenie Bluetooth						
Spätná väzba v reálnom čase			Sledovanie 6 zón		Sledovanie 16 zón	
Interaktívny displej				Čiernobiely	Farebný	

Hľadám	Šetrné čistenie	Hĺbkové čistenie a medzizubný dosah	Špeciálna starostlivosť	Čistenie a bielenie
Výhoda	Tá najjemnejšia čistiaca hlavica iO na jemné čistenie bez kompromisov s až 4000 jemnými vláknami.	Čistiaca hlavica Oral-B Ultimate Clean má štruktúru dvoch radov vlákien so 16-stupňovým sklonom, ktoré sa dostanú hlbšie medzi zuby.	Špeciálne navrhnuté profesionálmi na ústnu hygienu, vhodné na vyčistenie tých oblastí, ktoré vyžadujú špeciálnu pozornosť, ako napr. strojčeky, implantáty a krivé zuby.	Leštiace lupienky, ktoré leštením jemne odstraňujú povrchové škvrny, aby boli zuby belšie už od 1. dňa.
Sila čistenia	● ●	● ● ●	● ●	● ● ●
Šetrné čistenie	● ● ●	● ●	● ●	● ●
Bielenie	●	● ●	●	● ● ●

* V porovnaní s manuálnou zubnou kefkou.

Klinické hodnotenie elektrickej zubnej kefky Oral-B iO v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou v oblastiach redukcie gingivitídy a povlaku

Grender J, et al. *Int Dent J* 2020; 70 (Suppl 1): S7-S15.

KLÚČOVÉ ZISTENIE V OBLASTI GINGIVITÍDY


U subjektov používajúcich novú oscilačno-rotáciu elektrickú zubnú kefku Oral-B® iO sa prejavila väčšia redukcia gingivitídy v porovnaní s tými, ktorí používali manuálnu zubnú kefku, a to už od prvého týždňa a po celú dobu 8-týždňovej štúdie.

V týždni 8 sa u Oral-B® iO preukázala:

- 2x väčšia redukcia počtu krvácajúcich miest (Graf 1)
- 3x väčšia redukcia gingiválneho krvácania (GBI)
- 2x väčšia redukcia gingivitídy (MGI)


82 % subjektov (45/55) používajúcich zubnú kefku Oral-B® iO bolo zaradených do kategórie Zdravá (<10 % krvácajúcich miest) v týždni 8 v porovnaní s 24 % subjektov (13/55) používajúcich manuálnu kefku. Rozdiel bol štatisticky významný ($P < 0.001$). Pozri Graf 2.

Graf 1. Redukcia krvácajúcich miest v týždni 8 v porovnaní so základnou hodnotou.

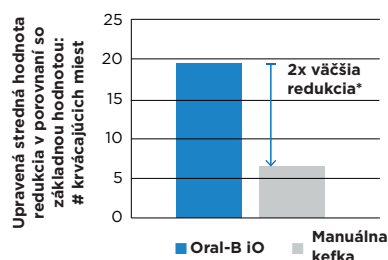

* $P < 0.001$; súhrnná základná hodnota počtu krvácajúcich miest = 32.11.

Graf 2. % subjektov klasifikovaných ako „zdravý“ (<10 % krvácajúcich miest) v týždni 8.

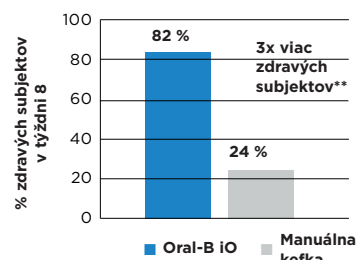

** $P < 0.001$


KLÚČOVÉ ZISTENIA V OBLASTI POVLAHU

U subjektov používajúcich novú oscilačno-rotáciu elektrickú zubnú kefku Oral-B® iO sa prejavila väčšia redukcia povlaku v porovnaní s tými, ktorí používali manuálnu zubnú kefku, a to už po prvom čistení, v týždni 1 a v celom priebehu 8-týždňovej štúdie.

V týždni 8 kefka Oral-B® iO odstránila:

- 2x viac povlaku v celých ústach
- 3x viac interproximálneho povlaku (Graf 3)
- 6x viac povlaku pozdĺž línie ďasien

Graf 3. Redukcia interproximálneho povlaku.

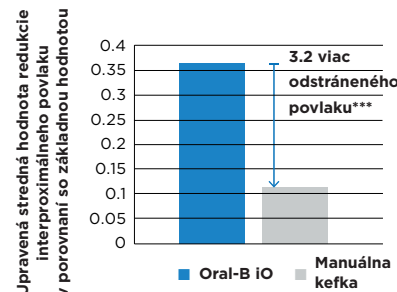

*** $P < 0.001$; súhrnné skóre základnej hodnoty povlaku v celých ústach = 0.62.

Klinické hodnotenie elektrickej zubnej kefky Oral-B iO v porovnaní so sonickou zubnou kefkou v oblastiach redukcie gingivitídy a povlaku

Adam R, et al. *Int Dent J* 2020; 70 (Suppl 1): S16-S21.


KLÚČOVÉ ZISTENIA OHĽADNE GINGIVITÍDY

Používanie novej elektrickej zubnej kefky Oral-B® iO dvakrát denne počas 8 týždňov viedlo k väčšiemu zlepšeniu zdravia ďasien oproti Sonicare DiamondClean, vrátane:

- O 59 % väčšia redukcia krvácajúcich miest (pozri Graf 1)
- O 51 % väčšia redukcia gingiválneho krvácania (GBI)
- O 62 % väčšia redukcia gingivitídy (MGI)


84 % subjektov (38/45) používajúcich zubnú kefku Oral-B® iO bolo zaradených do kategórie Zdravá (<10 % krvácajúcich miest) v Týždni 8 oproti 53 % subjektov (24/45) používajúcich sonickú kefku. Rozdiel bol štatisticky významný ($P = 0.003$). Pozri Graf 2.

Graf 1. Redukcia krvácajúcich miest do týždňa 8 v porovnaní so základnou hodnotou.

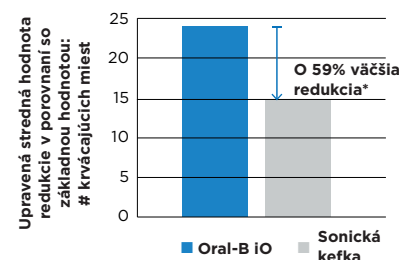

* $P < 0.001$; základná hodnota počtu krvácajúcich miest = 32.8

Graf 2. % subjektov klasifikovaných ako „zdravý“ (<10 % krvácajúcich miest) v týždni 8.

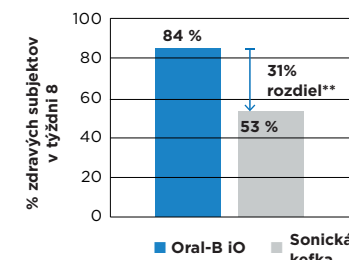


** $P = 0.003$

KLÚČOVÉ ZISTENIA OHĽADNE POVLAHU

Oral-B® iO poskytuje tiež štatisticky výrazne vyššiu redukciu povlaku oproti Sonicare Diamond Clean, v priebehu 8 týždňov odstraňuje:

- O 29 % viac povlaku v celých ústach
- O 41 % viac interproximálneho povlaku (Graf 3)
- O 49 % viac povlaku pozdĺž línie ďasien

Graf 3. Redukcia interproximálneho povlaku do týždňa 8 v porovnaní so základnou hodnotou.

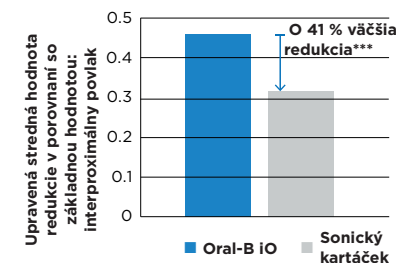

*** $P < 0.001$; skóre súhrnnej základnej hodnoty interproximálneho povlaku = 0.98