



# Seek™ & Sable™ Seek™


EN Caries Indicator	PT Detector de Cárias	PL Identyfikator Próchnicy
DE Indikatorlösung zur Kariesidentifikation	SV Kariesindikator	TR Çürük Belirleyici
FR Révélateur de carie	DA Caries Indicator	AR مظهر التسوس. سيك. ، سابل سيك
NL Caries Indicator	FI Kariesindikaattori	KO 충치식별액
IT Rivelatore di Carie	EL Δείκτης Τερηδύνας	ZH 龋齿指示剂
ES Indicador de Caries	RU Индикатор кариеса	TH Caries Indicator




Black Mini® Brush Tip



EN- Do not re-use to avoid cross contamination  
 DE- Um Kreuzkontamination zu vermeiden, nicht erneut benutzen  
 FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée  
 NL- Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen  
 IT- Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata  
 ES- No reutilice para evitar la contaminación cruzada  
 PT- Não reutilize para evitar a contaminação cruzada  
 SV- För undvikande av korskontamination, återvänd inte  
 DA- Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering  
 FI- Älä käyttää uudelleen ristikontaminaation vältämiseksi  
 EL- Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διασταυρούμενη μόλυνση  
 RU- Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения  
 TH- ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม

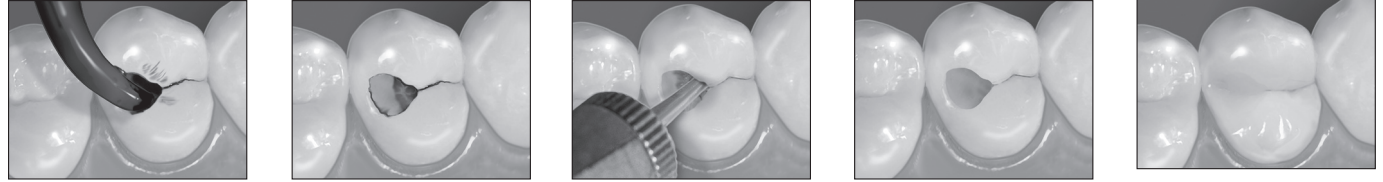

EN Apply caries detector. Avoid contact to clothing, etc.	Rinse and vacuum. Note stained decay.	Remove decay with slow speed bur or hand excavator.	Reapply detector and rinse to assure complete removal of decay.	Apply dentin/enamel bonding system (e.g. PQ1) and restore.
DE Die Indikatorlösung auftragen. Flecken auf Kleidung etc. vermeiden.	Abspülen und absaugen. Beachten Sie die angefarbte, kariöse Substanz.	Karies entfernen mit langsamlaufendem Bohrer oder Handexcavator.	Indikatorlösung erneut auftragen und abspülen, um die vollständige Kariesentfernung zu prüfen.	Dentin/Schmelzbonding legen (z. B. PQ1), anschließend Zahn restaurieren.
FR Appliquer le révélateur de carie. Eviter le contact avec les vêtements, etc...	Rincer tout en aspirant. Noter les zones cariées colorées.	Éliminer la carie à l'aide d'une fraise ou d'un excavateur.	Réappliquer le détecteur de carie pour s'assurer de l'élimination totale de la carie.	Appliquer le système adhésif amélo-dentinaire (PQ1, par exemple) et procéder à la restauration de la dent.

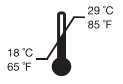

EN- Store at room temperature  
 DE- Bei Raumtemperatur lagern  
 FR- Entreposer à température ambiante  
 NL- Bij kamertemperatuur bewaren  
 IT- Conservare a temperatura ambiente  
 ES- Almacenar a temperatura ambiente  
 PT- Armazenar em temperatura ambiente  
 SV- Förvaras i rumstemperatur  
 DA- Opbevares ved stuetemperatur  
 FI- Säilytä huoneenlämmössä  
 EL- Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου  
 RU- Хранить при комнатной температуре  
 PL- Przechowywać w temperaturze pokojowej  
 TR- Oda sıcaklığında muhafaza edin  
 AR- لا يحفظ إلا بدرجة حرارة الغرفة  
 KO- 실온 보관  
 ZH- 室温儲存  
 TH- เก็บที่อุณหภูมิห้อง



EN- Use by date  
 DE- Verfallsdatum  
 FR- Date de péremption  
 NL- Uiterste gebruiksdatum  
 IT- Utilizzare entro  
 ES- Usar antes de  
 PT- Usar até a data  
 SV- Använd före datum  
 DA- Udløbsdato  
 FI- Viimeinen käyttöajankohta  
 EL- Ημερομηνία λήξης  
 RU- Исползовать до  
 PL- Data ważności  
 TR- Son kullanma tarihi  
 AR- تاريخ انتهاء الصلاحية  
 KO- 기제일까지 사용  
 ZH- 有效期至  
 TH- ใช้ภายในวันที่

EN Bring caries detector on. Vermijd contact met kleding etc.	Spoel en zuig af. Zie gekleurde caries weefsel.	Verwijder caries weefsel met een langzaam draaiende boor of handexcavator.	Apliceer opnieuw en spoel om verzekerd te zijn van complete verwijdering van het carieuze weefsel.	Breng dentine-/glazuurbonding aan (bijv. PQ1) en restaureer.
DE Die Indikatorlösung auftragen. Flecken auf Kleidung etc. vermeiden.	Abspülen und absaugen. Beachten Sie die angefarbte, kariöse Substanz.	Karies entfernen mit langsamlaufendem Bohrer oder Handexcavator.	Indikatorlösung erneut auftragen und abspülen, um die vollständige Kariesentfernung zu prüfen.	Dentin/Schmelzbonding legen (z. B. PQ1), anschließend Zahn restaurieren.
FR Appliquer le révélateur de carie. Eviter le contact avec les vêtements, etc...	Rincer tout en aspirant. Noter les zones cariées colorées.	Éliminer la carie à l'aide d'une fraise ou d'un excavateur.	Réappliquer le détecteur de carie pour s'assurer de l'élimination totale de la carie.	Appliquer le système adhésif amélo-dentinaire (PQ1, par exemple) et procéder à la restauration de la dent.



EN- For professional use only  
 DE- Nur Verwendung durch Sachkundige  
 FR- Destiné à un usage professionnel uniquement  
 NL- Alleen voor professioneel gebruik  
 IT- Esclusivamente ad uso professionale  
 ES- Sólo para uso profesional  
 PT- Apenas para uso profissional  
 SV- Enbart för yrkesmässig användning  
 DA- Kun til professionel brug  
 FI- Vain ammattikäyttöön  
 EL- Για επαγγελματική χρήση μόνο  
 RU- Только для профессионального применения  
 PL- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych  
 TR- Sadece profesyonel kullanıma yönelikdir  
 AR- للاستخدام المهني فقط  
 KO- 전문가 전용  
 ZH- 仅用于专业用途  
 TH- สำหรับผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น



EN- Lot Number  
 DE- Chargennummer  
 FR- Numéro du lot  
 NL- Batchnummer  
 IT- Numero del lotto  
 ES- Número de lote  
 PT- Número do lote  
 SV- Satsnummer  
 DA- Lotnummer  
 FI- Eränumero  
 EL- Αριθμός παρτίδας  
 RU- Номер партии  
 PL- Numer serii  
 TR- Lot Numarası  
 AR- رقم اللوت  
 KO- 로트 번호  
 ZH- 批号  
 TH- หมายเลขเซตกลาง

EN Apply o Detector de cáries. Evitar contacto com vestuário, etc.	Lavar e aspirar. Reparar na coloração da dentina cariada.	Remover a cárie com broca de baixa velocidade ou excavador manual.	Reaplicar o detector e lavar para assegurar a remoção total da cárie.	Aplicar sistema de bonding para dentina/esmalte (ex. PQ1) e restaurar.
DE Die Indikatorlösung auftragen. Flecken auf Kleidung etc. vermeiden.	Abspülen und absaugen. Beachten Sie die angefarbte, kariöse Substanz.	Karies entfernen mit langsamlaufendem Bohrer oder Handexcavator.	Indikatorlösung erneut auftragen und abspülen, um die vollständige Kariesentfernung zu prüfen.	Dentin/Schmelzbonding legen (z. B. PQ1), anschließend Zahn restaurieren.
FR Appliquer le révélateur de carie. Eviter le contact avec les vêtements, etc...	Rincer tout en aspirant. Noter les zones cariées colorées.	Éliminer la carie à l'aide d'une fraise ou d'un excavateur.	Réappliquer le détecteur de carie pour s'assurer de l'élimination totale de la carie.	Appliquer le système adhésif amélo-dentinaire (PQ1, par exemple) et procéder à la restauration de la dent.



EN- Recycle  
 DE- Recyceln  
 FR- Recycler  
 NL- Recyclen  
 IT- Riciclare  
 ES- Reciclar  
 PT- Reciclar  
 SV- Återvinna  
 DA- Genbruges  
 FI- Kiertää  
 EL- Ανακυκλώστε το  
 RU- Утилизовать  
 PL- Oddać do recyklingu  
 TR- Geri dönüştürün  
 AR- رة التدوير  
 KO- 재활용  
 ZH- 回收  
 TH- รีไซเคิล




EN- Catalog Number  
 DE- Katalognummer  
 FR- Numéro de référence  
 NL- Catalogusnummer  
 IT- Numero di catalogo  
 ES- Número de catálogo  
 PT- Número do catálogo  
 SV- Katalognummer  
 DA- Katalognummer  
 FI- Luettelunumero  
 EL- Αριθμός καταλόγου  
 RU- Номер по каталогу  
 PL- Numer katalogowy  
 TR- Katalog Numarası  
 AR- رقم الكتيف  
 KO- 카탈로그 번호  
 ZH- 目录号  
 TH- หมายเลขแคตตาล็อก



EN- See Instructions  
 DE- Siehe Anleitung  
 FR- Cf. instructions  
 NL- Zie gebruiksaanwijzing  
 IT- Vedere le istruzioni  
 ES- Vea las instrucciones  
 PT- Veja as instruções  
 SV- Se användningsanvisning  
 DA- Se brugsanvisningen  
 FI- Lue käyttöohjeet  
 EL- Δείτε τις οδηγίες  
 RU- См. инструкцию  
 PL- Patrz instrukcję  
 TR- Talimatları bakın  
 AR- انظر التعليمات  
 KO- 설명서 참고  
 ZH- 参阅说明  
 TH- ดูขั้นตอนการใช้

EN Applikoi kariesindikaattori. Vältä aineen joutumista kosketuksiin vaatteiden yms. kanssa.	Huuhtele ja imuroidu puhtaaksi. Näkyville tulee värjäätynyt karies.	Poista karies matalakierroksisella poralla tai käsi-instrumentilla.	Applikoi indikaattoria uudestaan ja huuhtele varmistaaksesi, että kaikki karioitunut dentiini on poistettu.	Applikoi dentiini/kiillesidosaine PQ1 ja tee täyte.
DE Die Indikatorlösung auftragen. Flecken auf Kleidung etc. vermeiden.	Abspülen und absaugen. Beachten Sie die angefarbte, kariöse Substanz.	Karies entfernen mit langsamlaufendem Bohrer oder Handexcavator.	Indikatorlösung erneut auftragen und abspülen, um die vollständige Kariesentfernung zu prüfen.	Dentin/Schmelzbonding legen (z. B. PQ1), anschließend Zahn restaurieren.
FR Appliquer le révélateur de carie. Eviter le contact avec les vêtements, etc...	Rincer tout en aspirant. Noter les zones cariées colorées.	Éliminer la carie à l'aide d'une fraise ou d'un excavateur.	Réappliquer le détecteur de carie pour s'assurer de l'élimination totale de la carie.	Appliquer le système adhésif amélo-dentinaire (PQ1, par exemple) et procéder à la restauration de la dent.

## Seek & Sable Seek Caries Indicator and Root Canal Locator

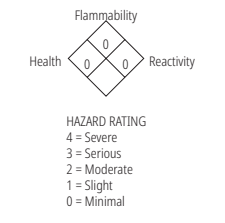

HAZARD RATING  
 4 = Severe  
 3 = Serious  
 2 = Moderate  
 1 = Slight  
 0 = Minimal



EN- Flammable  
 DE- Entzündbar  
 FR- Inflammable  
 NL- Brandbaar  
 IT- Inflammabile  
 ES- Inflamable  
 PT- Inflamável  
 SV- Brandfarlig  
 DA- Brandbar  
 FI- Syttyvä  
 EL- Εύφλεκτο  
 RU- Легковоспламеняющееся вещество  
 PL- Produkt łatwopalny  
 TR- Yanıcıdır  
 AR- قابل للاشتعال  
 KO- 인화성  
 ZH- 易燃  
 TH- ติดไฟได้

EN Należy preparat. Uwaga! Należy unikać kontaktu z odzieżą itp.	Po splukaniu i odessaniu uwidacznia się zmieniona próchnicowo tkanka.	Usunąć zmienione próchnicowo tkanki przy pomocy wiertła lub ekskavatora.	W celu upewnienia się, że próchnicowo zmienione tkanki zostały usunięte należy powtórnie nalożyć preparat i go wypluć.	Po opracowaniu ubytku nalożyć system wiążący (np. PQ1) i wypełnić.
DE Die Indikatorlösung auftragen. Flecken auf Kleidung etc. vermeiden.	Abspülen und absaugen. Beachten Sie die angefarbte, kariöse Substanz.	Karies entfernen mit langsamlaufendem Bohrer oder Handexcavator.	Indikatorlösung erneut auftragen und abspülen, um die vollständige Kariesentfernung zu prüfen.	Dentin/Schmelzbonding legen (z. B. PQ1), anschließend Zahn restaurieren.
FR Appliquer le révélateur de carie. Eviter le contact avec les vêtements, etc...	Rincer tout en aspirant. Noter les zones cariées colorées.	Éliminer la carie à l'aide d'une fraise ou d'un excavateur.	Réappliquer le détecteur de carie pour s'assurer de l'élimination totale de la carie.	Appliquer le système adhésif amélo-dentinaire (PQ1, par exemple) et procéder à la restauration de la dent.

ULTRADENT PRODUCTS  
 Am Westover Berg 30  
 51149 Cologne  
 Germany  
**E 0044**  
 For product SDS please see our website at:  
 www.ultradent.com  
 1-800-552-5512  
 Outside U.S. call (801) 572-4200  
 or visit www.ultradent.com.

EN وضع مظهر التسوس وتجنب ملامسة الملابس وغيرها.	اغسل واشطف لاحظ التسوس المصبوغ. اغسل واشطف لاحظ التسوس المصبوغ.	ضع مظهر التسوس باستخدام سنابل بطيئة أو مجرفة (كاحت سوس).	ضع مظهر التسوس وإغسل للتأكد من قم بإزالة التسوس باستخدام سنابل بطيئة أو مجرفة (كاحت سوس).	ضع المادة اللاصقة (للعاج والمينا) - (بي) أعد وضع مظهر التسوس وإغسل للتأكد من قم بإزالة التسوس باستخدام سنابل بطيئة أو مجرفة (كاحت سوس).
---	---	--	---	---

EN Caries indicator "Sable Seek"를 와동에 10초간 도포합니다. (옷 등에 접촉하지 않도록 주의)	세척 및 air dry한 후 caries를 확인합니다.	Caries가 여전히 남아있으면 slow speed bur 또는 excavator로 제거 합니다.	Caries 제거 여부를 확인하기 위해 "Sable Seek"를 재도포한 후, 세척 합니다.	Caries의 완전 제거 확인 후, bonding agent를 저치 후 수복합니다.
DE Die Indikatorlösung auftragen. Flecken auf Kleidung etc. vermeiden.	Abspülen und absaugen. Beachten Sie die angefarbte, kariöse Substanz.	Karies entfernen mit langsamlaufendem Bohrer oder Handexcavator.	Indikatorlösung erneut auftragen und abspülen, um die vollständige Kariesentfernung zu prüfen.	Dentin/Schmelzbonding legen (z. B. PQ1), anschließend Zahn restaurieren.
FR Appliquer le révélateur de carie. Eviter le contact avec les vêtements, etc...	Rincer tout en aspirant. Noter les zones cariées colorées.	Éliminer la carie à l'aide d'une fraise ou d'un excavateur.	Réappliquer le détecteur de carie pour s'assurer de l'élimination totale de la carie.	Appliquer le système adhésif amélo-dentinaire (PQ1, par exemple) et procéder à la restauration de la dent.

ULTRADENT PRODUCTS  
 Made in the USA from U.S. and globally sourced materials  
 © Copyright 2023, Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.  
 11094/AR15 10/24/22