

Vörulýsing

SeatStrap sætisólin er fylgihlutur sem er settur undir rass sjúklingsins til að hjálpa við fyrsta hluta lyftingarinnar. Hún hentar fyrir sjúklinga sem þurfa hjálp við að lyfta upp rassinum þegar þeim er lyft. Þetta kemur í veg fyrir að SupportVest vestið renni upp á við, sem gæti valdið óæskilegum þrýstingi undir handleggjunum.

Sabina SeatStrap er aðeins hannað til notkunar með Liko Sabina™ úr-setu-í-stöðu lyftara. SeatStrap sætisólin er alltaf notuð með einu af Liko-vestunum. Þar að auki verður að ljúka við lyftinguna með Sabina SeatStrap SlingBar.

Meðfylgjandi plaststyrkingin auðveldar notkun á SeatStrap sætisólinni. Plaststyrkingin er sett inn í efnisvasann neðan á SeatStrap sætisólinni til að auðveldara sé að setja sætisólina undir rass sjúklingsins.





















Í þessu skjali er manneskjan sem verið er að lyfta kölluð sjúklingurinn og manneskjan sem hjálpar henni er kölluð umönnunaraðilinn.

MIKILVÆGT!

Lyfting og flutningur á sjúklingi felur alltaf í sér ákveðna áhættu. Lestu leiðbeiningarnar fyrir bæði sjúklingalyftarann og fylgihluti fyrir lyftingu fyrir notkun. Mikilvægt er að skilja til fullnustu innihald leiðbeininganna fyrir notkun. Eingöngu þjálfað starfsfólk á að nota búnaðinn. Gakktu úr skugga um að fylgihlutir fyrir lyftingu henti fyrir lyftarann sem verið er að nota. Sýndu gætni og varúð meðan á notkun stendur. Sem umönnunaraðili berð þú ávallt ábyrgð á öryggi sjúklingsins. Þú verður að vera meðvitaður/meðvituð um getu sjúklingsins til að takast á við lyftiaðstæðurnar. Ef eitthvað er óskýrt skaltu hafa samband við framleiðandann eða birgðasalann.

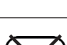Lýsing á táknum

Þessi tákn er að finna í þessu skjali og/eða á vörunni.

Tákn	Lýsing
	Viðvörðun: Þessar kringumstæður þarfnast aukinnar varkárni og aðgátar
	Lestu notkunarleiðbeiningarnar fyrir notkun
	CE-merki
	Löglegur framleiðandi
	Framleiðsludagsetning
	Auðkenni vöru
	Raðnúmer
	Lækningatæki
	Ekki þurrhreinsa
	Ekki strauja
	Þurrkun í þurrkara
	Ekki þurrka í þurrkara
	Þvottur Táknið er alltaf með ráðlögðu hitastigi í °C og °F
	Inniheldur ekki latex
	Reglubundin skoðun
	Ekki nota bleikiefni
	Látið þorna á snúru í skugga
	Snýr upp á við og tákn utan á vöru
	Tákn utan á vöru
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAMMDJ (21) 012345678910</small>	GS1 Gagnafylkisstrikamerki sem kann að innihalda eftirfarandi upplýsingar (01) GTIN-númer (e. Global Trade Item Number) (11) Framleiðsludagsetning (21) Raðnúmer

Öryggisleiðbeiningar

Áður en þú lyftir skaltu hafa eftirfarandi atriði í huga:

- Ábyrg manneskja innan þinnar stofnunar ætti að ákveða á grundvelli hvers máls fyrir sig hvort þörf er á einum eða fleiri umönnunaraðilum.
- Skipuleggðu lyftiaðgerðina þannig að hægt sé að gera hana eins örugglega og hnökralaust og mögulegt er.
- Þrátt fyrir að Liko-herðatré séu búin krækjum verður að sýna sérstaka varúð. Áður en sjúklingnum er lyft af undirliggjandi fleti, en eftir að ólarnar hafa verið framlengdar til fulls, skal ganga úr skugga um að ólarnar séu rétt tengdar við króka herðatrésins.
- Aldrei skilja sjúkling eftir án eftirlits meðan á lyftivinnu stendur.
- Gakktu úr skugga um að hjólin á hjólastólnum, rúminu, sjúkragagninum, o.s.frv., séu læst meðan á lyftingu/flutningi stendur.
- Alltaf skal vinna vinnuvistfræðilega. Notaðu getu sjúklingsins til að taka virkan þátt í aðgerðunum.

Lækningatæki í flokki I Vara

Breytingar á vöru

Liko vörunar eru í stöðugri þróun, þess vegna áskiljum við okkur rétt til að gera breytingar á vöru án fyrirvara. Hafðu samband við fulltrúa Hill-Rom til að fá ráðleggingar og upplýsingar um uppfærslu á vörum.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er gæðavottað samkvæmt ISO 9001 og jafngildi þess fyrir lækningatækjaiðnaðinn, ISO 13485. Liko er einnig vottað samkvæmt umhverfisstaðlinum ISO 14001.

Tilkynning til notenda og/eða sjúklinga innan ESB

Öll alvarleg atvik sem hafa átt sér stað í tengslum við búnaðinn, skal tilkynna framleiðandanum og lögbærum yfirvöldum í aðildarríkinu þar sem notandinn/sjúklingurinn býr.

Umhirða og viðhald

Athugaðu seglið fyrir hverja notkun. Athugaðu eftirfarandi atriði með tilliti til slits og skemmda:

- Efni
- Ólar
- Saumar
- Lykkjur

Notaðu ekki skemmdan aukabúnað fyrir lyftingar.

Ef eitthvað er óskýrt skaltu vinsamlegast hafa samband við framleiðandann eða birgðasalann.

Þvottaleiðbeiningar: Skoðaðu vörumerkimiða SeatStrap sætisólarinnar og viðhengdan viðauka „Umhirða og viðhald á Liko-seglum“ Fjarlægðu plaststyrkinguna fyrir þvott (sjá blaðsíðu 4). Nota skal sótthreinsunarefni til að þrifa plaststyrkinguna.

Reglubundin skoðun

Vöruna þarf að skoða að lágmarki á sex mánaða fresti. Hugsanlega er þörf á tíðari skoðunum ef vörur eru notaðar eða þvegnar oftar en vanalega. Hafðu samband við fulltrúa Hill-Rom til að fá verklýsingar.

Vætanlegur endingartími

Vætanlegur endingartími vörunnar er 1-5 ár. Vætanlegur endingartími miðast við að varan sé notuð 10 sinnum á dag og sé þvegin einu sinni í viku, samkvæmt þvottaleiðbeiningunum. Hill-Rom ráðleggur að varan sé eingöngu notuð yfir það tímabil sem vætanlegur endingartími nær yfir.


Leiðbeiningar um endurvinnslu

SeatStrap sætisólina ætti að flokka sem brennanlegan úrgang.

Hill-Rom metur og býður upp á tilsögn fyrir notendur sína um örugga meðhöndlun og förgun á búnaði sínum til að aðstoða við að koma í veg fyrir líkamstjón, þar með talið, en ekki takmarkað við: skurði, stungur á húðinni, skrámur, og alla hreinsun og sótthreinsun á lækningabúnaðinum sem þörf er á eftir notkun og fyrir förgun. Viðskiptavinir skulu fara eftir öllum alríkis-, ríkis-, svæðis- og/eða staðarlögum og reglugerðum varðandi örugga förgun á lækningabúnaði og aukabúnaði.

Ef notandi búnaðarins er í vafa skal hann fyrst hafa samband við tækniþjónustu Hill-Rom til að fá leiðbeiningar um örugga aðferð við förgun.

Notkun

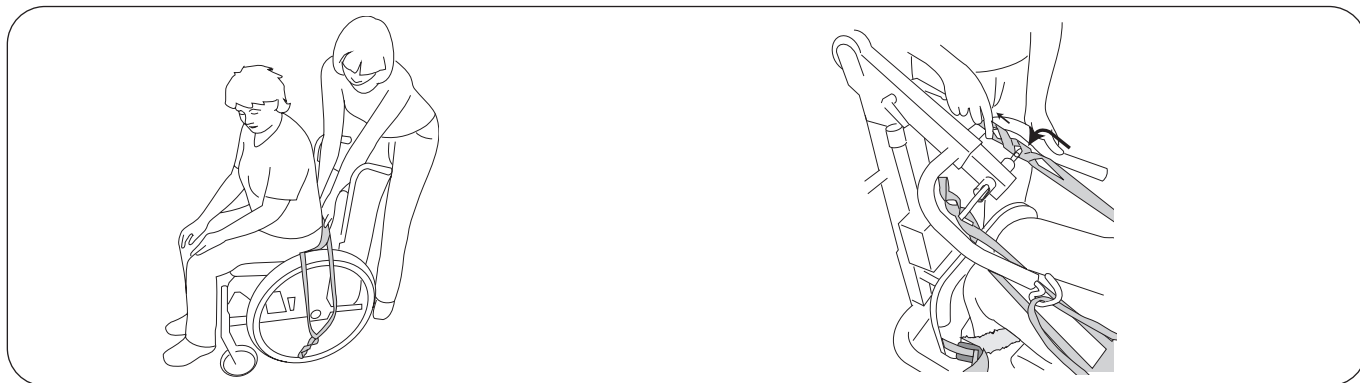


Settu SeatStrap sætisólina eins langt undir rassinn og hægt er.
Ábending: Plaststyrkingin gerir notkun auðveldari.

Settu vestið á sjúklinginn. Farðu að Sabina úr-setu-í-stöðu lyftaranum. Tengdu ólarlykkjurnar á vestinu við herðatréd. Fyrir nánari leiðbeiningar skaltu skoða notkunarleiðbeiningarnar fyrir vestið og lyftarann sem eru notuð.

Strekktu ólarnar á SeatStrap sætisólinni og tengdu viðeigandi lykkjuólar við SeatStrap SlingBar.


Lyfting

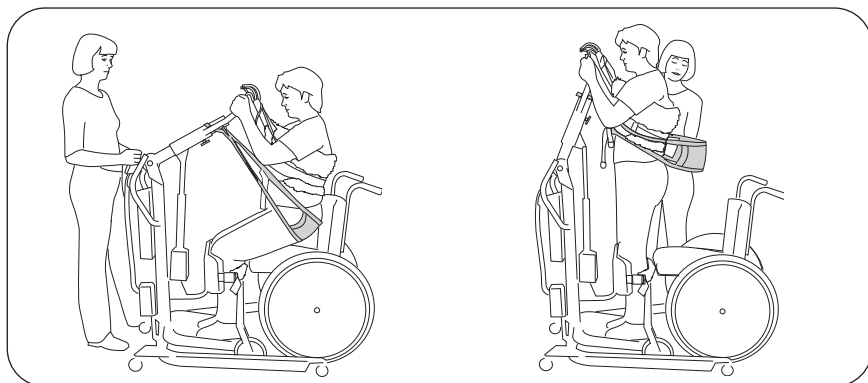

Byrjaðu að lyfta. SeatStrap sætisólin hjálpar til við fyrsta hluta lyftingarinnar.

Í uppréttri stöðu losnar þunginn af SeatStrap sætisólinni svo auðvelt er að ýta henni til hliðar til að sjúklingur geti t.d. notað salerni.

Látið síga aftur í sitjandi stöðu

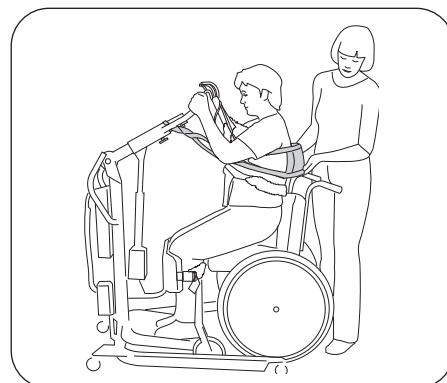


Þegar sjúklingurinn er látinn síga í sitjandi stöðu, er auðveldara að setja hann í rétta stöðu í hjólastólum ef SeatStrap sætisólin er ekki notuð.

Yfirlit yfir Liko™ Sabina™ SeatStrap

Nafn	Vörunr.	Efni	Lengd (efnishluti)	Hámarksbyrði
Sabina SeatStrap	3591115	Pólýester, plasthúðað net	50 cm	200 kg

Plaststyrking

Plaststyrking (pólýetýlen) fylgir með SeatStrap sætisólinni og er ætlað að auðvelda fyrir notkun.

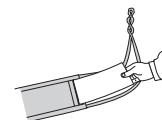

Samsetningar

Sabina SeatStrap sætisólin er aðeins ætluð til notkunar með Liko Sabina™ úr-setu-í-stöðu lyftara.

Samsetning fylgihluta/vara annarra en þeirra sem Liko ráðleggur getur leitt til öryggisáhættu fyrir sjúklinginn.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Svíþjóð
+46 (0)920 474700
Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom