

SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

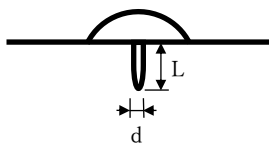

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

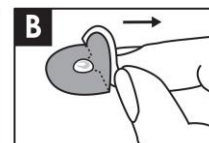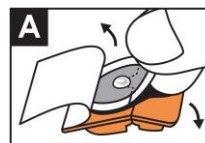

nl SEIRIN PYONEX NAALD

Huidig wetenschappelijk bewijs toont aan dat medische hulpmiddelen die zijn gemaakt van legeringen van roestvaststaal met kobalt geen groter risico op kanker of negatieve effecten op de voortplanting veroorzaken.

[Beoogd gebruik, indicaties]

Dit product is een hulpmiddel dat bedoeld is om de huid aan te prikken bij de beoefening van acupunctuur door bevoegde artsen (specialisten) om pijn te verlichten en andere therapeutische effecten te bevorderen.

[Voorzorgsmaatregelen bij gebruik (moet met zorg worden toegepast bij de volgende patiënten)]

- Zwangere vrouwen [acupunctuur kan weeën opwekken]
- Patiënten met kwaadaardige tumoren [acupunctuur kan de groei of uitzaaiing van kwaadaardige tumoren versnellen]
- Patiënten met een hemorragische aandoening [acupunctuur kan bloedingen bevorderen]
- Patiënten die allergisch zijn voor metalen zoals nikkel, chroom en andere roestvrijstalen onderdelen

[Gebruiksmethoden] Behandel de naalden voorzichtig om letsel te voorkomen, omdat ze scherp zijn.

- 1) **Controle:** Controleer de verpakking op schade, verontreiniging of vloeistoflekage. Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd, verontreinigd of nat is.
- 2) **Eenmalig gebruik:** de naalden van Seirin zijn gesteriliseerd, wegwerpbaar en alleen voor eenmalig gebruik. Hergebruik ervan verhoogt het risico op infectie.
- 3) **Desinfectie:** Gebruik alcoholdoekjes om de gebieden waar naalden worden ingebracht schoon te maken. Laat de huid drogen voordat u naalden inbrengt.
- 4) **Visuele inspectie:** Inspecteer naalden voor gebruik. Gebruik geen naalden als ze verbogen of beschadigd zijn of als er een andere anomalie wordt gedetecteerd.
- 5) **Open de verpakking en neem het product eruit** ①: verwijder de afdichting van de plastic verpakking en til het halfvemaanvormige lipje samen met de tape op. Zie de afbeelding. U kunt de plastic verpakking gemakkelijk omvouwen met uw vingers.
- 6) **Aanbrengen** ②: til het halfvemaanvormige lipje samen met de tape op om de naald (Pyonex) op de huid aan te brengen zonder de kleefstof van de tape en de naaldpunt aan te raken. Verwijder daarna het lipje en druk de tape aan.
- 7) **Na behandeling:** Gooi de naalden op een veilige manier weg en neem voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen infecties. Als de naalden niet worden gebruikt nadat de verpakking is geopend, gebruik ze dan niet en gooi ze op de juiste manier weg.
- 8) Het materiaal van de naald kan niet tegen de warmte die door moxibustie vrijkomt. Voer geen moxa-warmtebehandeling uit op de tape.
- 9) Deze naald is niet bestemd voor gebruik voor elektrotherapie. Gebruik de naald niet voor elektrostimulatie.
- 10) Vertel uw patiënten dat ze de tape op hun huid moeten verwijderen vóór het douchen, in bad gaan of zwemmen, omdat de tape gemakkelijk loskomt.
- 11) Instrueer uw patiënten om gedragingen te vermijden waarbij spanning komt te staan op de plaats waar de tape is aangebracht.

[Bijwerkingen] De patiënt kan pijn, jeuk, sufheid, malaise, misselijkheid, roodheid, zwelling en blaarvorming ervaren.

Als in het behandelingsgebied een abnormale reactie optreedt, zoals roodheid en jeuk, instrueer de patiënt na het verwijderen van de naald dan om een bevoegde medische zorgverlener op het terrein van acupunctuur te raadplegen.

[Opslag] Bewaar de naalden op een veilige plaats, beschermd tegen water, direct zonlicht, hoge vochtigheid en hoge temperaturen en chemische verontreiniging. Buiten bereik van kinderen houden.

[Vervaldatum] De vervaldatum (op basis van zelfcertificering) is aangegeven op de omdoos. Controleer voor gebruik de houdbaarheidsdatum. Gebruik geen verlopen producten.

Meld alle ernstige incidenten die verband houden met dit apparaat aan de fabrikant en gezondheidsinstanties van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt woont.