

SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

https://www.seirin.jp

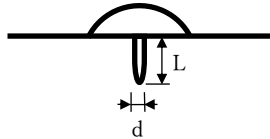

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

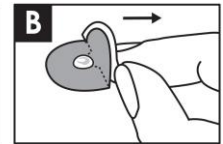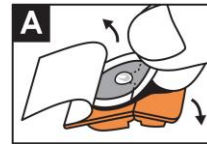

fi SEIRIN PYONEX NEULAN

Tämänhetkisen tieteellisen näytön mukaan kobolttia sisältävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut lääkinnälliset laitteet eivät lisää syövän riskiä tai lisääntymiseen liittyvien haittavaikutusten riskiä.

[Käyttötarkoitus, käyttöaiheet]

Tämä tuote on laite, joka on tarkoitettu ihon lävistämiseen valtuutettujen lääkäreiden (asiantuntijoiden) harjoittamassa akupunktiossa kivun lievittämiseksi ja muiden terapeuttisten vaikutusten edistämiseksi.

[Käyttöön liittyvät varotoimet (täytyy soveltaa varoen seuraaviin potilaisiin)]

- Raskaana olevat naiset [akupunktio voi kiihdyttää synnytystä]
- Potilaat, joilla on pahanlaatuista kasvaimia [akupunktio voi nopeuttaa pahanlaatuisten kasvainten kasvua tai etäpesäkkeiden muodostumista]
- Potilaat, joilla on verenvuototauti [akupunktio voi edistää verenvuotoa]
- Potilaat, jotka ovat allergisia metalleille, kuten nikkelille, kromille ja muille ruostumattoman teräksen komponenteille

[Käyttötavat] Käsittele neuloja varovasti, jotta välttyt loukkaantumiselta, koska ne ovat teräviä.

- 1) **Tarkista:** Tarkista, ettei pakkauksessa ole vaurioita, likaa tai nestevuotoja. Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on vaurioitunut, likaantunut tai märkä.
- 2) **Kertakäyttöinen:** Seirinin neulat ovat steriloituja, kertakäyttöisiä ja vain kertakäyttöisiä. Niiden uudelleenkäyttö lisää tartuntariskiä.
- 3) **Desinfiointi:** Käytä alkoholipyyhkeitä puhdistaksesi kohdat, joihin neulat asetetaan. Anna ihon kuivua ennen neulojen pistämistä.
- 4) **Silmämääräinen tarkastus:** Tarkasta neulat ennen käyttöä. Älä käytä neuloja, jos ne ovat vääntyneet, vaurioituneet tai jos havaitaan muita poikkeamia.
- 5) **Avaa pakkaus ja ota tuote esiin ①:** Poista päällyssinetti muovikotelosta ja nosta ylös puolikuunmuotoinen tarra yhdessä teipin kanssa, kuten kuviossa näkyy. Voit taivuttaa muovikotelon helposti sormillasi.
- 6) **Asetus ②:** Nosta ylös puolikuunmuotoinen tarra yhdessä teipin kanssa ja aseta neula (Pyonex) iholle koskettamatta teipin liimaa ja neulan kärkeä. Sen jälkeen poista tarra ja paina teippi kiinni.
- 7) **Hoidon jälkeen:** Hävitä neulat turvallisesti infektion välttämiseksi. Jos neuloja ei ole käytetty pakkauksen avaamisen jälkeen, älä käytä niitä, vaan hävitä ne asianmukaisella tavalla.
- 8) Neulan materiaali ei kestä moksibustion aikaansaamaa kuumuutta. Älä suorita moksibustio-lämpöhoitoa teipillä.
- 9) Tätä neulaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi elektroterapiassa. Älä käytä sitä sähköstimulaatioon.
- 10) Neuvo potilaita poistamaan teippi iholta ennen suihkuun, kylpyyn tai uimaan menoa, koska se irtoaa helposti.
- 11) Neuvo potilaita välttämään aiheuttamasta painetta alueelle, jolle teippi on asetettu.

[Haittavaikutukset] Potilas voi tuntea kipua, kutinaa, uneliaisuutta, pahoinvointia kuvotusta, punoitusta, turvotusta ja rakkuloita. Mikäli käsittelyalueella ilmenee epänormaali reaktio, kuten punoitusta ja kutinaa, neuvo potilasta kääntymään akupunktion harjoittamisluvan saaneen lääketieteen ammattilaisen puoleen neulan poiston jälkeen.

[Säilytys] Säilytä neulat turvallisessa paikassa suojattuna vedeltä, suoralta auringonvalolta, korkealta kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta sekä kemiallisilta saasteilta. Pidä poissa lasten ulottuvilta.

[Viimeinen käyttöpäivä] Viimeinen käyttöpäivä (perustuu omaan sertifiointiin) on ilmoitettu ulkolaatikossa. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä ennen käyttöä. Älä käytä vanhentuneita tuotteita.

Ilmoita kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista sen jäsenvaltion valmistajalle ja terveysviranomaisille, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.