




SEIRIN PYONEX NEEDLES





SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>

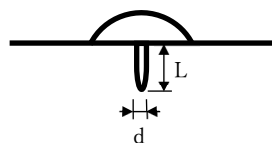

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

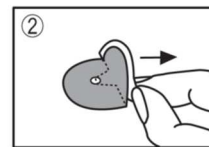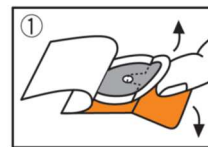

cs SEIRIN PYONEX JEHLY

<Podstata> Tento výrobek vyhovuje normě ISO 18746 Sterilní intradermální akupunkturní jehly na jednorázové použití.

[Účel použití, indikace]

Tento výrobek je určený pro použití při akupunktuře.

Tento výrobek smí používat pouze oprávněný zdravotnický personál (specialisté).

[Opatření pro použití (Dbejte opatrnosti při používání jehel u následujících pacientů.)]

- Těhotné ženy (může vyvolat porod)
- Pacienti s maligními nádory (může urychlit růst nebo metastáze maligních nádorů.)
- Pacienti s hemoragickým onemocněním (může způsobit krvácení)
- Pacienti s alergiemi na kov, jako například nikl, chrom a jiné složky nerezové oceli.

[Způsob použití] Zacházejte s jehlami s opatrností, abyste zabránili poranění. Jehly jsou ostré.

- 1) **Kontrola:** Ujistěte se, že sterilní obal není poškozený, znečištěný nebo mokrá. Je-li tomu tak, výrobek nepoužívejte.
- 2) **Jednorázové použití:** Tyto akupunkturní jehly Seirin jsou sterilizované a jsou určeny pouze na jedno použití. Opětovné použití zvyšuje riziko infekce.
- 3) **Dezinfekce:** Před vpichem jehly otřete nejprve místo akupunktury vatou navlhčenou alkoholem nebo podobným prostředkem a nechte zaschnout.
- 4) **Vizuální kontrola:** Před použitím jehlu vždy zkontrolujte. Pokud vykazuje jakékoli abnormality, jako například zkroucení či poškození, nepoužívejte ji.
- 5) **Otevřete obal a vyjměte výrobek** ①: Odstraňte z plastové krabičky krycí fólii a zdvihněte půlkruhový lem společně s páskou (viz obrázek). Plastovou krabičku můžete prsty snadno složit zpět.
- 6) **Aplikace** ②: Zvedněte půlkruhový lem spolu s páskou, abyste mohli aplikovat jehlu (Pyonex) na kůži, aniž byste se dotkli lepicí pásky a špičky jehly. Následně odstraňte lem a zatlačte na pásku.
- 7) **Po použití:** Jehly bezpečným způsobem zlikvidujte, aby nedošlo k přenosu infekce. Pokud jehly po otevření obalu nespotebujete, dále je již nepoužívejte a řádně je zlikvidujte.
- 8) Materiál jehly nedokáže odolat teple vznikajícímu při terapeutickém prohřívání moxa. Nezhřívejte při terapeutickém prohřívání moxa pásku.
- 9) Tato jehla není určena k použití při elektroléčbě. Nepoužívejte ji pro elektrickou stimulaci.
- 10) Instruuje pacienta, aby si vždy před koupelí nebo sprchováním pásku z kůže sundal, neboť by mohlo dojít k jejímu snadnému odtržení.
- 11) Poučte pacienta, aby se vyhýbal přílišnému namáhání místa, na němž je aplikována pásky.

[Nežádoucí účinky] Pacient může pociťovat bolest, svědění, ospalost, malátnost, nevolnost, zarudnutí, otok a puchýře.

V případě jakýchkoli neobvyklých reakcí v ošetřené oblasti, jako například zarudnutí či svědění, instruuje pacienta, aby se obrátil na autorizovaného zdravotníka v oblasti akupunktury a konzultoval s ním odstranění jehly.

[Způsob skladování] Jehly skladujte na bezpečném místě. Dbejte, aby nebyly vystaveny působení vlhkosti, přímého slunečního světla, vysoké teploty a chemikálií. Uchovávejte mimo dosah dětí.

[Datum expirace] Datum expirace (na základě interního testování) je uvedeno na krabičce. Před použitím zkontrolujte datum expirace a prošlé výrobky nepoužívejte.

Veškeré závažné události spojené s tímto výrobkem oznamte výrobci a zdravotním úřadům členského státu, kde má uživatel a/nebo pacient bydliště.

What is Lot? Lot=07525A1= 07 5 25 A1 = Date of manufacture ①Last 2 digits of the year ②month (X=10 Y=11 Z=12) ③day ④Manufacture control No.