

SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

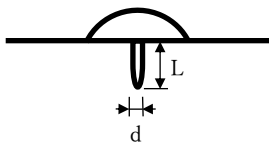

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

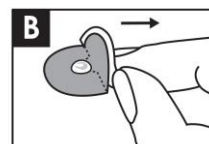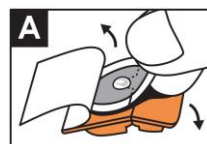

sv SEIRIN PYONEX NÅL

Aktuella vetenskapliga rön visar att medicintekniska produkter tillverkade av legeringar av rostfritt stål och som innehåller kobolt inte medför en ökad risk för cancer eller fortplantningsstörningar.

[Avsedd användning, indikationer]

Denna produkt är en anordning som är avsedd att genomborra huden vid akupunktur som utförs av auktoriserade läkare (specialister) för att lindra smärta och främja andra terapeutiska effekter.

[Försiktighetsåtgärder vid användning (måste appliceras med försiktighet på följande patienter)]

- Gravida kvinnor [akupunktur kan framkalla förlossning]
- Patienter med maligna tumörer [akupunktur kan påskynda tillväxten eller metastaseringen av maligna tumörer]
- Patienter med hemorragisk sjukdom [akupunktur kan främja blödning]
- Patienter som är allergiska mot metaller som nickel, krom och andra komponenter i rostfritt stål

[Användningsmetoder] Hantera nålarna varsamt för att förhindra skador eftersom de är vassa.

- 1) **Kontrollera:** Kontrollera förpackningen för eventuella skador, kontaminering eller vätskeläckage. Använd inte produkten om förpackningen är skadad, kontaminerad eller våt.
- 2) **Engångsanvändning:** Seirins nålar är steriliserade, för engångsbruk och endast för engångsbruk. Att återanvända dem ökar risken för infektion.
- 3) **Desinfektion:** Använd spritservetter för att rengöra de områden där nålar ska sättas in. Låt huden torka innan du sätter in nålar.
- 4) **Visuell inspektion:** Inspektera nålar före användning. Använd inte nålar om de är böjda, skadade eller om någon annan anomaly upptäcks.
- 5) **Öppna förpackningen och ta ut produkten**①: Ta bort tätningslocket från plastförpackningen och lyft upp den halvmåneformade fliken tillsammans med tejpen, så som visas i figuren. Du kan enkelt vika tillbaka plastförpackningen med fingrarna.
- 6) **Användning**②: Lyft upp den halvmåneformade fliken tillsammans med tejpen för att placera nålen (Pyonex) på huden utan att vidröra tejpen och nålspetsen. Ta sedan bort fliken och tryck ner tejpen.
- 7) **Efter behandling:** Kassera nålarna på ett säkert sätt och vidta försiktighetsåtgärder för att skydda mot infektioner. Om nålarna inte används efter att förpackningen har öppnats, använd inte och kassera dem på rätt sätt.
- 8) Nålens material tål inte värmen från moxibustion. Utför inte moxabränning på tejpen.
- 9) Denna nål är inte avsedd att användas för elektroterapi. Använd den inte för elektrisk stimulering.
- 10) Be patienten ta bort tejpen på huden innan de duschar, badar eller simmar eftersom den lätt kan lossna.
- 11) Instruera patienterna att undvika beteende som belastar platsen där tejpen appliceras.

[Biverkningar] Patienten kan uppleva smärta, klåda, dåsighet, olustkänsla illamående, rodnad, svullnad och blåsbildning. Om någon onormal reaktion uppträder i behandlingsområdet, som rodnad och klåda, instruera patienter att rådfråga en auktoriserad vårdgivare i akupunktur efter att nålen tagits bort.

[Förvaring] Förvara nålarna på en säker plats skyddad från vatten, direkt solljus, hög luftfuktighet och höga temperaturer och kemisk kontaminering. Håll borta från barn.

[Utgångsdatum] Utgångsdatumet (baserat på självcertifiering) anges på den yttre lådan. Kontrollera utgångsdatumet före användning. Använd inte utgångna produkter.

Rapportera alla allvarliga incidenter i samband med denna enhet till tillverkaren och hälsomyndigheterna i den medlemsstat där användaren och/eller patienten bor.