


SEIRIN PYONEX NEEDLES





SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>

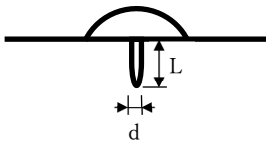

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

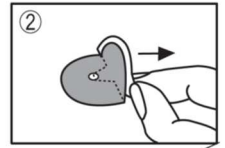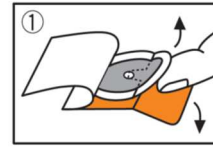

SEIRIN PYONEX NEULAN

<Periaate> Tämä tuote täyttää steriilejä ihonsisäisiä kertakäyttöisiä akupunktioneuloja koskevan ISO 18746 standardin vaatimukset.

[Käyttötarkoitus, käyttöaiheet]

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi akupunktiossa.

Tuote on tarkoitettu vain luvan saaneiden lääketieteen ammattilaisten (erikoislääkäreiden) käyttöön.

[Käyttövaroitukset (Ole varovainen käyttäessäsi neuloja seuraaville potilaille.)]

- Raskaana olevat naiset (Se voi aikaansaada synnytyksen käynnistymisen.)
- Potilaat, joilla on pahanlaatuisia kasvaimia (Se voi nopeuttaa pahanlaatuisten kasvainten etäpesäkkeiden kasvua.)
- Potilaat, joilla on verenvuototauti (Se voi aiheuttaa verenvuotoa.)
- Potilaat, joilla on metalliallergioita, kuten esimerkiksi yliherkkyys nikkelille, kromille tai muille ruostumattoman teräksen osille

[Käytetty menetelmä] • Käsittele neuloja varovasti loukkaantumisen estämiseksi, koska neulat ovat teräviä.

- 1) **Varmistus:** Varmista, ettei steriili pakkaus ole vahingoittunut, saastunut tai kostea. Älä käytä sitä, jos näin on.
- 2) **Kertakäyttöisyys:** Nämä Seirin-akupunktio-neulat ovat steriloituja, poisheitettäviä kertakäyttötuotteita. Niiden uudelleenkäyttö lisää infektioriskiä.
- 3) **Desinfiointi:** Pyyhi akupunktioalue alkoholiin kostutetulla vanulla jne. ja anna sen kuivua, ennen kuin työntät neulan ihoon.
- 4) **Silmämääräinen tarkastus:** Ennen käyttöä tarkasta neula varmasti. Älä käytä sitä, jos siinä näkyy jotain epäsäännöllisyyksiä, kuten vääntymistä tai vioittumaa.
- 5) **Avaa pakkaus ja ota esiin tuote ①:** Poista päällyssinetti muovikotelosta ja nosta ylös puolikuunmuotoinen tarra yhdessä teipin kanssa, kuten kuviossa näkyy. Voit taivuttaa muovikotelon helposti sormillasi.
- 6) **Asetus ②:** Nosta ylös puolikuunmuotoinen tarra yhdessä teipin kanssa ja aseta neula (Pyonex) iholle koskettamatta teipin liimaa ja neulan kärkeä. Sen jälkeen poista tarra ja paina teippi alas.
- 7) **Käytön jälkeen:** Hävitä neulat turvallisesti infektion välttämiseksi. Jos neuloja ei ole käytetty pakkauksen avaamisen jälkeen, älä käytä niitä, vaan hävitä ne asianmukaisella tavalla.
- 8) Neulan materiaali ei kestä moksibustion aikaansaamaa kuumuutta. Älä suorita moksibustio-lämpöhoitoa teipillä.
- 9) Tätä neulaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi elektroterapiassa. Älä käytä sitä sähköstimulaatioon.
- 10) Neuvo potilaita poistamaan teippi iholta ennen suihkuun, kylpyyn tai uimaan menoa, koska se irtoaa helposti.
- 11) Neuvo potilaita välttämään aiheuttamasta painetta alueelle, jolle teippi on asetettu.

[Haittatapahtumat] Potilas voi tuntea kipua, kutinaa, uneliaisuutta, pahoinvointia, kuvotusta, punoitusta, turvotusta ja rakkuloita.

Mikäli käsittelyalueella ilmenee epänormaali reaktio, kuten punoitusta ja kutinaa, neuvo potilaita kääntymään akupunktion harjoittamisluvan saaneen lääketieteen ammattilaisen puoleen neulan poiston jälkeen.

[Varastointimenetelmä] Varastoi neulat turvalliseen paikkaan, joka on suojassa vesivuodolta, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta kosteudelta ja korkeilta lämpötiloilta, kemikaaleilta ja lapsilta.

[Viimeinen käyttöpäivä] • Viimeinen käyttöpäivä (perustuu sisäiseen testaukseen) on ilmoitettu laatikon päällä. Ennen käyttöä tarkista viimeinen käyttöpäivä. Älä käytä tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on ohitettu.

Ilmoita kaikki laitteeseen liittyvät vakavat tapahtumat valmistajalle ja sen jäsenvaltion terveysviranomaisille, jossa käyttäjä ja/tai potilas asuu.

What is Lot? Lot=07525A1= 07 5 25 A1 = Date of manufacture ①Last 2 digits of the year ②month (X=10 Y=11 Z=12) ③day ④Manufacture control No.