

SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

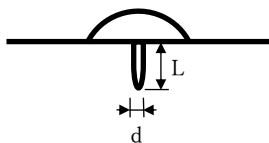

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

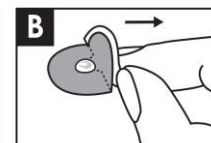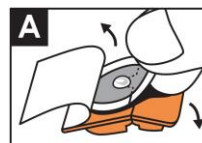

pl SEIRIN PYONEX IGLA

Zgodnie z aktualną wiedzą naukową wyroby medyczne wyprodukowane ze stopów stali nierdzewnej zawierających kobalt nie powodują zwiększonego ryzyka zachorowania na raka ani wystąpienia niepożądanego wpływu na rozrodczość.

[Przeznaczenie, wskazania]

Ten produkt jest urządzeniem przeznaczonym do nakłuwania skóry w ramach praktyki akupunktury uprawnionych lekarzy (specjalistów) w celu łagodzenia bólu i wspierania innych efektów terapeutycznych.

[Środki ostrożności dotyczące użytkowania (należy stosować ostrożnie u następujących pacjentów)]

- Kobiety w ciąży [akupunktura może wywołać poród]
- Pacjenci z nowotworami złośliwymi [akupunktura może przyspieszać wzrost lub przerzuty nowotworów złośliwych]
- Pacjenci z chorobą krwotoczną [akupunktura może sprzyjać krwawieniu]
- Pacjenci uczuleni na metale, takie jak nikiel, chrom i inne elementy ze stali nierdzewnej

[Metody użycia] Ostrożnie obchodź się z igłami, aby uniknąć obrażeń, ponieważ są ostre.

- 1) **Sprawdź:** Sprawdź opakowanie pod kątem uszkodzeń, zanieczyszczenia lub wycieku płynu. Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone, zanieczyszczone lub mokre.
- 2) **Jednorazowego użytku:** Igły Seirin są sterylizowane, jednorazowe i przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Ponowne ich użycie zwiększa ryzyko infekcji.
- 3) **Dezynfekcja:** Użyj gazików nasączonych alkoholem, aby wyczyścić miejsca wkłucia igieł. Pozwól skórze wyschnąć przed włożeniem igieł.
- 4) **Kontrola wzrokowa:** Przed użyciem sprawdź igły. Nie używaj igieł, jeśli są wygięte, uszkodzone lub jeśli wykryta zostanie jakakolwiek inna anomalia.
- 5) **Otwórz opakowanie i wyjmij produkt ①:** Zdejmij uszczelkę pokrywy z plastikowego pojemniczka i podnieś zakładkę w kształcie półksiężyca wraz z samoprzylepnym plastrem, jak pokazano na rysunku. Plastikowy pojemniczek można łatwo palcami zgąć do tyłu.
- 6) **Zastosowanie②:** podnieś półksiężycowatą zakładkę razem z samoprzylepnym plastrem, a następnie przyklej do skóry plaster z igłą (Pyonex) bez dotykania przylepnej strony plastra ani końcówki igły. Teraz, usuń zakładkę i dociśnij przyklejony plaster.
- 7) **Po leczeniu:** Wyrzucić igły w bezpieczny sposób, z zachowaniem środków ostrożności w celu ochrony przed infekcjami. Jeżeli igły nie są używane po otwarciu opakowania, nie należy ich używać i wyrzucać w odpowiedni sposób.
- 8) Materiał, z którego wykonana jest igła nie toleruje gorąca powstałego podczas moksoterapii. Nie wykonuj moksoterapii na przyklejonej taśmie.
- 9) Niniejsza igła nie jest przeznaczona do elektroterapii. Nie używaj jej do elektrycznej stymulacji.
- 10) Poinformuj pacjenta, aby usunął przyklejony do skóry plaster przed wzięciem prysznica lub kąpieli lub przed pływaniem, ponieważ plaster odkleja się bardzo łatwo.
- 11) Poinformuj pacjenta, aby nie wystawiał na stres miejsca, w którym przyklejono plaster.

[Działania niepożądane] Pacjent może odczuwać ból, swędzenie, senność, słabość, nudności, zaczerwienienie, obrzęk i pęcherze.

Jeśli po usunięciu igły w miejscu leczenia pojawi się nieprawidłowa reakcja, taka jak sztywnienie lub swędzenie, zaleć pacjentowi konsultację z lekarzem (specjalistą) od akupunktury.

[Przechowywanie] Przechowuj igły w bezpiecznym miejscu, chronionym przed wodą, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wysoką wilgotnością i wysokimi temperaturami oraz zanieczyszczeniami chemicznymi. Trzymać z dala od dzieci.

[Data ważności] Data ważności (w oparciu o samocertyfikację) jest podana na zewnętrznym pudełku. Sprawdź datę ważności przed użyciem. Nie używaj przeterminowanych produktów.

Wszystkie poważne incydenty związane z tym urządzeniem należy zgłaszać producentowi i organom służby zdrowia państwa członkowskiego, w którym zamieszkuje użytkownik i/lub pacjent.

Co to jest partia? Lot=07525A1= 07 5 25 A1 = Data produkcji (1) Dwie ostatnie cyfry roku (2) miesiąc (X=10 Y=11 Z=12) (3) dzień (4) Numer kontroli produkcji.
(1) (2) (3) (4)