




SEIRIN PYONEX NEEDLES





SEIRIN CORPORATION

1007-1 Sodeshi-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0037, Japan

<https://www.seirin.jp>

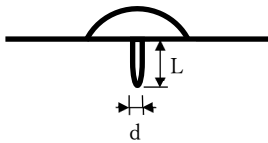

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

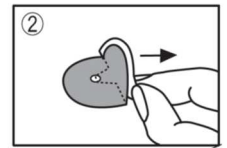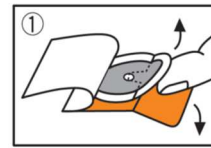

el SEIRIN PYONEX ΒΕΛΟΝΑΣ

<Αρχή> Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις αποστειρωμένες ενδοδερμικές βελόνες βελονισμού ISO 18746 για μία χρήση.

[Προβλεπόμενη χρήση, ενδείξεις]

Αυτό το προϊόν είναι μια συσκευή που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για βελονισμό.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο από εξουσιοδοτημένους ιατρούς (ειδικούς).

[Προφύλαξη κατά τη χρήση (Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τις βελόνες στους ακόλουθους ασθενείς.)]

- Έγκυες γυναίκες (Μπορεί να προκαλέσει τοκετό.)
- Ασθενείς με κακοήθεις όγκους (Μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη ή μετάσταση κακοήθων όγκων.)
- Ασθενείς με αιμορραγική νόσο (Μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία.)
- Ασθενείς με αλλεργίες σε μέταλλα όπως νικέλιο, χρώμιο και άλλα στοιχεία από ανοξείδωτο ατσάλι

[Μέθοδος χρήσης] • Χειριστείτε τις βελόνες με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό, επειδή οι βελόνες είναι αιχμηρές.

- 1) **Επιβεβαίωση:** Επιβεβαιώστε ότι το αποστειρωμένο συσκευασίας δεν έχει καταστραφεί, μολυνθεί ή υγρανθεί και σε αντίθετη περίπτωση μην την χρησιμοποιείτε.
- 2) **Μίας χρήσης:** Αυτές οι βελόνες βελονισμού Seirin είναι αποστειρωμένες, αναλώσιμες και προορίζονται μόνο για μία χρήση. Η επαναχρησιμοποίησή τους αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης.
- 3) **Απολύμανση:** Σκουπίστε το σημείο βελονισμού με βαμβάκι εμποτισμένο με οινόπνευμα κ.λπ. και αφήστε το να στεγνώσει πριν την εισαγωγή της βελόνας.
- 4) **Οπτική επιθεώρηση:** Πριν από τη χρήση, φροντίστε να ελέγξετε τη βελόνα. Μην το χρησιμοποιείτε εάν εμφανίζει παρατυπίες, όπως στρέβλωση ή ζημιά.
- 5) **Ανοίξτε το πακέτο και αφαιρέστε το προϊόν ①:** Αφαιρέστε το στεγανοποιητικό κάλυμμα από την πλαστική θήκη και ανασηκώστε τη γλωττίδα σε σχήμα ημισελήνου μαζί με την ταινία, όπως φαίνεται στην εικόνα. Μπορείτε εύκολα να αναδιπλώσετε την πλαστική θήκη με τα δάχτυλά σας.
- 6) **Εφαρμογή ②:** Ανασηκώστε τη γλωττίδα σε σχήμα ημισελήνου μαζί με την ταινία για να εφαρμόσετε τη βελόνα (Pyonex) στο δέρμα χωρίς να αγγίζετε την κόλλα της ταινίας και το άκρο της βελόνας. Μετά από αυτό, αφαιρέστε τη γλωττίδα και πιέστε την ταινία.
- 7) **Μετά τη χρήση:** Απορρίψτε τις βελόνες με ασφαλή τρόπο για να αποφύγετε τη μόλυνση. Εάν οι βελόνες δεν χρησιμοποιούνται μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, μην τις χρησιμοποιείτε και προχωρήστε στην απόρριψή τους με κατάλληλο τρόπο.
- 8) Το υλικό της βελόνας δεν έχει αντοχή στη θερμότητα που παράγεται από τον καυτηριασμό με μόζα. Μην κάνετε θερμοθεραπεία μόζα στην ταινία.
- 9) Αυτή η βελόνα δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροθεραπεία. Μην το χρησιμοποιείτε για ηλεκτρική διέγερση.
- 10) Δώστε οδηγίες στους ασθενείς να αφαιρέσουν την ταινία από το δέρμα τους προτού κάνουν ντους ή μπάνιο ή κολύμπι γιατί θα βγει εύκολα.
- 11) Δώστε οδηγίες στους ασθενείς να αποφεύγουν τη συμπεριφορά που προκαλεί ένταση στο σημείο στο οποίο εφαρμόζεται η ταινία.

[Ανεπιθύμητες ενέργειες] Ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει πόνο, κνησμό, υπνηλία, αδιαθεσία ναυτία, ερυθρότητα, οίδημα και φουσκάλες.

Εάν εμφανιστεί μη φυσιολογική αντίδραση στην περιοχή της θεραπείας, όπως ερυθρότητα και φαγούρα, ζητήστε από τους ασθενείς να συμβουλευτούν έναν εξουσιοδοτημένο ιατρό στον βελονισμό μετά την αφαίρεση της βελόνας.

[Μέθοδος αποθήκευσης] Αποθηκεύστε τις βελόνες σε ασφαλές μέρος μακριά από διαρροή νερού, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υψηλή υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες, χημικά και παιδιά.

[Ημερομηνία λήξης] Η ημερομηνία λήξης (βάσει εσωτερικών δοκιμών) εμφανίζεται στο κουτί. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την ημερομηνία λήξης και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν λήξει.

Αναφέρετε όλα τα σοβαρά συμβάντα που σχετίζονται με αυτήν τη συσκευή στον κατασκευαστή και στις υγειονομικές αρχές του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

What is Lot? Lot=07525A1= 07 5 25 A1 = Date of manufacture ① Last 2 digits of the year ② month (X=10 Y=11 Z=12) ③ day ④ Manufacture control No.