

SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

<https://www.seirin.jp>

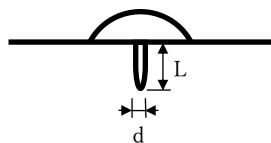

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

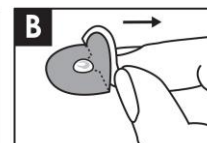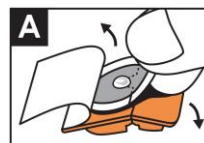

It SEIRIN PYONEX ADATOS

Remiantis dabartiniais moksliniais įrodymais, medicinos prietaisai, pagaminti iš nerūdijančiojo plieno lydinių, kurių sudėtyje yra kobalto, nepadidina rizikos susirgti vėžiu ir neturi neigiamo poveikio reprodukcijai.

[Paskirtis, indikacijos]

Šis gaminytis yra prietaisas, skirtas pradurti odą akupunktūros praktikoje, kurią atlieka įgalioti gydytojai (specialistai), siekiant sumažinti skausmą ir skatinti kitą gydymą poveikį.

[Atsargumo priemonės naudojant (turi būti atsargiai taikomos šiems pacientams)]

- Nėščios moterys [akupunktūra gali paskatinti gimdymą]
- Pacientai, sergantys piktybiniais navikais [akupunktūra gali pagreitinti piktybinių navikų augimą arba metastazę]
- Pacientai, sergantys hemoragine liga [akupunktūra gali paskatinti kraujavimą]
- Pacientai, alergiški metalams, tokiems kaip nikelis, chromas ir kiti nerūdijančio plieno komponentai

[Naudojimo metodai] Su adatomis elkitės atsargiai, kad nesusižeistumėte, nes jos yra aštrios.

- 1) **Patikrinimas:** patikrinkite, ar pakuotė nepažeista, užteršta arba ar nėra skysčio nuotėkio. Nenaudokite gaminio, jei pakuotė pažeista, užteršta ar šlapia.
- 2) **Vienkartinis naudojimas:** Seirin adatos yra sterilizuotos, vienkartinės ir tik vienkartinės. Pakartotinis jų naudojimas padidina infekcijos riziką.
- 3) **Dezinfekcija:** naudokite spiritu suvilgytus tamponus, kad išvalytumėte vietas, kur bus įdurtos adatos. Prieš įdėdami adatas, leiskite odai išdžiūti.
- 4) **Vizuali apžiūra:** prieš naudodami patikrinkite adatas. Nenaudokite adatų, jei jos sulenktos, pažeistos arba aptikta kokių nors kitų anomalijų.
- 5) **Pakuotės atidarymas ir gaminio išėmimas ①:** Nuimkite plastikinio dėklo sandarinimo užlaidą ir pakelkite pusmėnulio formos skirtuką palei juostelę, kaip pavaizduota iliustracijoje. Pirštais galite vėl lengvai užlenkti plastikinį dėklą.
- 6) **Naudojimas ②:** pakelkite pusmėnulio formos skirtuką palei juostelę, kad įvestumėte adatą („Pyonex“) į odą, neliesdami lipnios juostelės ir adatos galiuko. Po to, nuimkite skirtuką ir spustelėkite juostelę.
- 7) **Po gydymo:** adatas išmeskite saugiai, imkitės atsargumo priemonių, kad apsisaugotumėte nuo infekcijų. Jei atidarius pakuotę adatos nenaudojamos, nenaudokite ir tinkamai išmeskite.
- 8) Adatos medžiaga netoleruoja kaitinant moksą atsirandančio karščio. Nekaitinkite moksos virš juostelės.
- 9) Ši adata nėra skirta naudoti elektroterapijai. Nenaudokite jos elektrostimuliacijai.
- 10) Liepkite pacientui nuimti ant odos esančią juostelę prieš prausiantis duše, vonioje ar plaukiojant, nes ji gali lengvai nukristi.
- 11) Liepkite pacientui vengti liesti vietą, ant kurios priklijuota juostelė.

[Nepageidaujamos reakcijos] Pacientas gali jausti skausmą, niežėjimą, mieguistumą, negalavimą, pykinimą, paraudimą, patinimą ir pūsles. Jei gydymo vietoje atsiranda neįprasta reakcija, pvz., paraudimas ir niežulys, nurodykite pacientams po adatos ištraukimo pasikonsultuoti su įgaliotu akupunktūros gydytoju.

[Saugojimas] Adatas laikykite saugioje vietoje, apsaugotoje nuo vandens, tiesioginių saulės spindulių, didelės drėgmės ir aukštos temperatūros bei cheminio užteršimo. Saugoti nuo vaikų.

[Galiojimo laikas] Galiojimo laikas (pagal savęs patvirtinimą) nurodytas ant išorinės dėžutės. Prieš naudodami patikrinkite galiojimo datą. Nenaudokite produkto, kurio galiojimo laikas pasibaigęs.

Praneškite apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo prietaisu, gamintojui ir sveikatos priežiūros institucijoms valstybėje narėje, kurioje gyvena naudotojas ir (arba) pacientas.