


SEIRIN PYONEX NEEDLES





SEIRIN CORPORATION

JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan
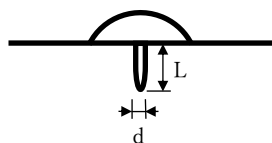
<https://www.seirin.jp>

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

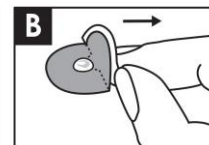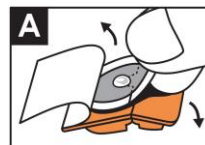

cs SEIRIN PYONEX JEHLY

Současné vědecké poznatky prokazují, že zdravotnické prostředky vyrobené ze slitin nerezové oceli obsahujících kobalt nezpůsobují zvýšené riziko rakoviny nebo nežádoucích reprodukčních účinků.

[Zamýšlené použití, indikace]

Tento výrobek je zařízení určené k propíchnutí kůže při provádění akupunktury autorizovanými lékaři (specialisty) za účelem zmírnění bolesti a podpory dalších léčebných účinků.

[Opatření pro použití (Musí být aplikováno opatrně u následujících pacientů)]

- Těhotné ženy [akupunktura může vyvolat porod]
- Pacienti se zhoubnými nádory [akupunktura může urychlit růst nebo metastázy zhoubných nádorů]
- Pacienti s hemoragickým onemocněním [akupunktura může podporovat krvácení]
- Pacienti alergičtí na kovy, jako je nikl, chrom a další součásti z nerezové oceli

[Způsoby použití] • S jehlami zacházejte opatrně, abyste se neporanili, protože jsou ostré.

- 1) **Kontrola:** Ujistěte se, že sterilní obal není poškozený, znečištěný nebo mokrá. Je-li tomu tak, výrobek nepoužívejte.
- 2) **Jedno použití:** Seirinovy jehly jsou sterilizované, jednorázové a pouze na jedno použití. Jejich opakované použití zvyšuje riziko infekce.
- 3) **Dezinfekce:** Použijte tampóny napuštěné alkoholem k čištění oblastí, kam budou vpichovány jehly. Před vložením jehel nechte kůži oschnout.
- 4) **Vizuální kontrola:** Před použitím zkontrolujte jehly. Nepoužívejte jehly, pokud jsou ohnuté, poškozené nebo pokud je zjištěna jakákoli jiná anomálie.
- 5) **Otevřete obal a vyjměte výrobek①:** Odstraňte z plastové krabičky krycí fólii a zdvihněte půlkruhový lem společně s páskou (viz obrázek). Plastovou krabičku můžete prsty snadno složit zpět.
- 6) **Aplikace②:** Zvedněte půlkruhový lem spolu s páskou, abyste mohli aplikovat jehlu (Pyonex) na kůži, aniž byste se dotkli lepicí pásky a špičky jehly. Následně odstraňte lem a zatlačte na pásku.
- 7) **Po ošetření:** Jehly zlikvidujte bezpečným způsobem a přijměte opatření na ochranu před infekcemi. Pokud jehly po otevření obalu nepoužijete, nepoužívejte je a řádně je zlikvidujte.
- 8) Materiál jehly nedokáže odolat teple vznikajícímu při terapeutickém prohřívání moxa. Nezahřívajte při terapeutickém prohřívání moxa pásku.
- 9) Tato jehla není určena k použití při elektroléčbě. Nepoužívejte ji pro elektrickou stimulaci.
- 10) Instruuje pacienta, aby si vždy před koupelí nebo sprchováním pásku z kůže sundal, neboť by mohlo dojít k jejímu snadnému odtržení.
- 11) Poučte pacienta, aby se vyhýbal přílišnému namáhání místa, na němž je aplikována pásky.

[Nežádoucí účinky] Pacient může pociťovat bolest, svědění, ospalost, malátnost, nevolnost, zarudnutí, otok a puchýře.

V případě jakýchkoli neobvyklých reakcí v ošetřené oblasti, jako například zarudnutí či svědění, instruuje pacienta, aby se obrátil na autorizovaného zdravotníka v oblasti akupunktury a konzultoval s ním odstranění jehly.

[Skladování] Skladujte jehly na bezpečném místě chráněném před vodou, přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí a vysokými teplotami a chemickou kontaminací. Drž se dál od dětí.

[Datum expirace] Datum expirace (na základě vlastní certifikace) je uvedeno na vnějším obalu. Před použitím zkontrolujte datum použitelnosti. Nepoužívejte prošlé produkty.

Oznamte všechny vážné incidenty spojené s tímto zařízením výrobcí a zdravotnickým úřadům členského státu, kde má uživatel a/nebo pacient bydliště.