

## SEIRIN PYONEX NEEDLES




SEIRIN CORPORATION



JP-MF-000012274

147 Ouchi, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, 424-0061, Japan

https://www.seirin.jp

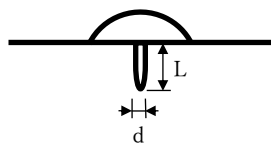

L (mm)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
d (mm)	0.11	0.15	0.17	0.20	0.20

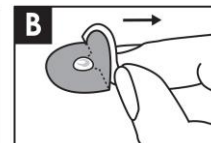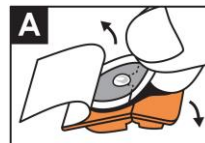

## it AGHI SEIRIN PYONEX

Gli attuali dati scientifici dimostrano che i dispositivi medici fabbricati con leghe di acciaio inossidabile contenenti cobalto non comportano un aumento del rischio di cancro o di effetti avversi in ambito riproduttivo.

**[Uso previsto, indicazioni]**

Questo prodotto è un dispositivo destinato a perforare la pelle nella pratica dell'agopuntura da parte di medici autorizzati (specialisti) al fine di alleviare il dolore e promuovere altri effetti terapeutici.

**[Precauzioni per l'uso (fare attenzione quando si usano gli aghi sui seguenti pazienti)]**

- Donne in gravidanza [l'agopuntura può indurre il travaglio]
- Pazienti con tumori maligni [l'agopuntura può accelerare la crescita o le metastasi di tumori maligni]
- Pazienti con patologia emorragica [l'agopuntura può favorire il sanguinamento]
- Pazienti con allergie ai metalli come il nichel, il cromo e altri componenti dell'acciaio inossidabile

**[Metodo d'uso]** Maneggiare gli aghi con cura per evitare infortuni in quanto sono taglienti.

- 1) **Verifica:** controllare la confezione per verificare che non vi siano danni, contaminazioni o perdite di liquidi. Non utilizzare il prodotto se la confezione è danneggiata, contaminata o bagnata.
- 2) **Monouso:** gli aghi di Seirin sono sterilizzati, monouso e non riutilizzabili. Riutilizzandoli si aumenta il rischio di infezione.
- 3) **Disinfezione:** pulire il sito di agopuntura con tamponi imbevuti di alcol. Attendere che la cute sia asciutta prima di inserire gli aghi.
- 4) **Ispezione visiva:** esaminare gli aghi prima dell'uso. Non utilizzare gli aghi se sono piegati, danneggiati o se viene rilevata qualsiasi altra anomalia.
- 5) **Aprire la confezione ed estrarre il prodotto** ①: Rimuovere il sigillo del coperchio dalla custodia in plastica e sollevare la linguetta a mezzaluna insieme al nastro, come mostrato in figura. La custodia di plastica può essere facilmente ripiegata con le dita.
- 6) **Applicazione** ②: Sollevare la linguetta a mezzaluna insieme al nastro per applicare l'ago (Pyonex) sulla cute senza toccare l'adesivo del nastro e la punta dell'ago. Quindi, rimuovere la linguetta e premere il nastro.
- 7) **Dopo il trattamento:** smaltire gli aghi in modo sicuro, per prevenire le infezioni. Se gli aghi non vengono utilizzati dopo l'apertura della confezione, evitare di usarli e smaltirli correttamente.
- 8) Il materiale dell'ago non tollera il calore prodotto da moxibustione. Non eseguire il trattamento termico con moxa sul nastro.
- 9) L'ago non è destinato ad essere utilizzato per l'elettroterapia. Non usarlo per la stimolazione elettrica.
- 10) Invitare i pazienti a rimuovere il nastro dalla cute prima di fare la doccia o il bagno o di nuotare perché si staccerebbe facilmente.
- 11) Istruire i pazienti perché evitino comportamenti che possano sollecitare eccessivamente il sito su cui viene applicato il nastro.

**[Reazioni avverse]** Il paziente può provare dolore, prurito, sonnolenza, malessere, nausea, arrossamento, gonfiore e vesciche.

Se nell'area del trattamento compare una qualsiasi reazione anomala, come arrossamento e prurito, consigliare ai pazienti di consultare un medico autorizzato all'agopuntura dopo aver rimosso l'ago.

**[Metodo di conservazione]** Conservare gli aghi in un luogo sicuro al riparo dall'acqua, dalla luce solare diretta, da elevata umidità e temperature e dalla contaminazione chimica. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

**[Data di scadenza]** La data di scadenza (basata sull'autocertificazione) è indicata sulla confezione esterna. Controllare la data di scadenza prima dell'uso. Non utilizzare prodotti scaduti.

**Segnalare tutti gli eventi gravi associati a questo dispositivo al produttore e alle autorità sanitarie dello stato membro in cui risiedono l'utente e/o il paziente.**