

Meine

personalisierten Behandlungspläne, fertig in einem Moment.



Erhalten Sie Ihre initialen
ClinCheck® Behandlungspläne

56 % schneller*

mit der neuen ClinCheck® Signature.

- Reduzieren Sie den Austausch mit CAD-Designern auf ein Minimum
- Maximieren Sie die Konsistenz und Kontrolle
- Gewinnen Sie mehr Zeit für das, was wirklich zählt

Kurzanleitung für die ClinCheck® Signature


Eine Sammlung unserer neuesten Fortschritte in der Behandlungsplanung, die Ihnen bei der prompten und sicheren Erstellung personalisierter, konsistenter Behandlungspläne hilft – wodurch Sie mehr Zeit haben für das, was wirklich zählt.

Verschiedene Innovationen zur Behandlungsplanung

- Flex Verschreibungsformular
- ClinCheck® Pro Software zur Behandlungsplanung
- Plan Editor
- 3D-Steuerung
- ClinCheck® Live Update

*-Basierend auf den Erstbestellungen der Behandlungsoption Invisalign System Comprehensive durch Anwender, die eine Vorlage für klinische Behandlungspräferenzen verwendet haben. Gesamtzahl der analysierten Bestellungen: 487.926. Verglichen werden Bestellungen, die mit einer Vorlage für Präferenzen zur Behandlungsplanung eingereicht wurden, und Bestellungen, die ohne diese Vorlage eingereicht wurden. Die Zeitmessung erfolgt ab dem Zeitpunkt des Auftragseingangs bis zu dem Zeitpunkt, an dem der ClinCheck Behandlungsplan dem Anwender zur Überprüfung bereitsteht. Der Zeitaufwand für die mit einer Präferenzvorlage zur Behandlungsplanung eingereichten Aufträge ist 56 % geringer. Es wurde der Durchschnittswert verwendet. Die Bestellungen stammten aus dem Zeitraum April 2022 bis Mai 2023. Ausgewertet wurden zertifizierte Invisalign Anwender in Nordamerika, Lateinamerika, EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum. Daten bei Align Technology, Inc. gespeichert

Hierarchie der ClinCheck® Behandlungsplanung

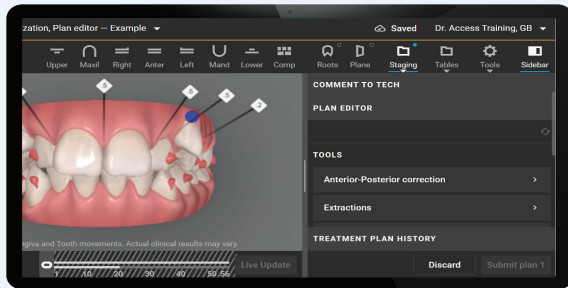

3D-Steuerung
mit ClinCheck® Live Update

Plan Editor
mit ClinCheck® Live Update

Kann mit fallspezifischen
klinischen Präferenzen
personalisiert werden

Flex Verschreibungsformular

Kann mit dem Template
Editor personalisiert
werden

Global Clinical Preference Template

Falleinreichung *mit dem* Flex Verschreibungsformular

04 Select treatment option

Patient list / Patient file /

Patient type: Adult Product type: Invisalign clear aligners Treatment options

Select treatment option

Comprehensive Package	Moderate Package	Lite Package
Unlimited stages	Up to 20 stages	Up to 14 stages
Selectable additional aligner options	2 set(s) of additional aligners included	2 set(s) of additional aligners included
Flex Rx is supported		
dual arch 5 year(s), unlimited additional aligners included 3 year(s), 3 set(s) of additional aligners included £1810 £1710	dual arch single arch	
Select		

„Flex
Verschreibungsformular
wird unterstützt“
erscheint bei unterstützten
Behandlungsoptionen
im Flex
Verschreibungsformular.

05 Complete Flex Rx

Welcome to Flex Rx

Show me around

Some cases not supported by Flex Rx. Some cases may require submission with the Traditional Rx. Switch to Traditional Rx

Preferences

Global Clinical Preferen... View Edit for all cases

Case specific clinical preferences (optional) No case specific clinical preferences added

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth

Tooth movement restrictions: none
Attachments restrictions: none
Extractions: none
Missing teeth: none

Eruption compensation

Eruption compensation: none
Molar tab: none

Uploaded Records

None

Private Notes

0/10000

Write private notes here (only visible to you).

Private notes are only visible to you and will be displayed in the Notes section of the ClinCheck® software

Flex Verschreibungsformular: Optionen für fallspezifische Präferenzen

- Individuell gemäß den Bedürfnissen des Patienten personalisieren
- Ausnahmen von Ihrer Vorlage für Präferenzen behandeln
- Fehlende Zähne behandeln
- ASR festlegen
- Engstände behandeln

invisalign

Patients Account Store Education Support Marketing Site

Welcome to Flex Rx

Show me around

Some cases not supported by Flex Rx. Some cases may require submission with the Traditional Rx. Switch to Traditional Rx

Preferences

test View

Case specific clinical preferences (optional) Collapse

IPR

Follow chosen preferences template

Click here to view your predefined clinical preferences for "IPR"

Select segments where IPR is allowed

Right Left

Limit anterior IPR per contact

If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

Limit posterior IPR per contact

If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

IPR timing (roundtripping)

Perform alignment after IPR

Perform alignment before IPR

Delay IPR

Schedule IPR

Based on access to contacts

Every (certain number) stages

At specific stages

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth

Uploaded Records

None

Private Notes

0/10000

Write private notes here (only visible to you).

Private notes are only visible to you and will be displayed in the Notes section of the ClinCheck® software



Global Clinical Preferences *Template* (Globale Vorlage)

Diese Vorlage enthält die Align Standardpräferenzen, die automatisch auf Ihre Fälle angewendet werden, wenn Sie keine klinischen Präferenzen festgelegt haben.



- Das Global Clinical Preferences Template wurde auf Grundlage von Behandlungsergebnissen erstellt, die auf der jahrelangen Erfahrung mit der erfolgreichen Erstellung von **Millionen von ClinCheck® Behandlungsplänen** für Invisalign Patienten basieren.
- Die klinischen Präferenzen aus dem Global Clinical Preferences Template basieren auf einem **vielseitigen Ansatz, der viele verschiedene Aspekte umfasst**, z. B. **Datenanalyse, bewährte Protokolle, Feedback von Kunden (einschließlich im Rahmen der Align Faculty) sowie Rückmeldungen von internen Align Teams auf der ganzen Welt.**
- Änderungen an diesen Präferenzen können mit dem Template Editor durchgeführt werden.


Seite für Klinische Präferenzen

Die Seite für klinische Präferenzen besteht aus drei Optionen:

- **Vorlage für Flex Verschreibungsformular**
- **Herkömmliches Verschreibungsformular**
- **Allgemeine Einstellungen**

Verwendung des Template Editors



- Alle Optionen im Template Editor werden gemäß den Präferenzen im Global Clinical Preferences Template vorausgefüllt
- Beim ersten Starten werden alle Optionen **mithilfe der herkömmlichen klinischen Präferenzen von der IDS eingestellt und mit den Präferenzen der Align Standardeinstellungen** im Global Clinical Preferences Template kombiniert
- Diese Präferenzen können jederzeit geändert werden und werden gleichzeitig im Global Clinical Preferences Template übernommen
- Das aktualisierte Global Clinical Preferences Template wird für alle mit dem Flex Verschreibungsformular eingereichten Fälle verwendet. Dies hat keine Auswirkung auf Fälle, die bereits mit dem Flex Verschreibungsformular eingereicht wurden

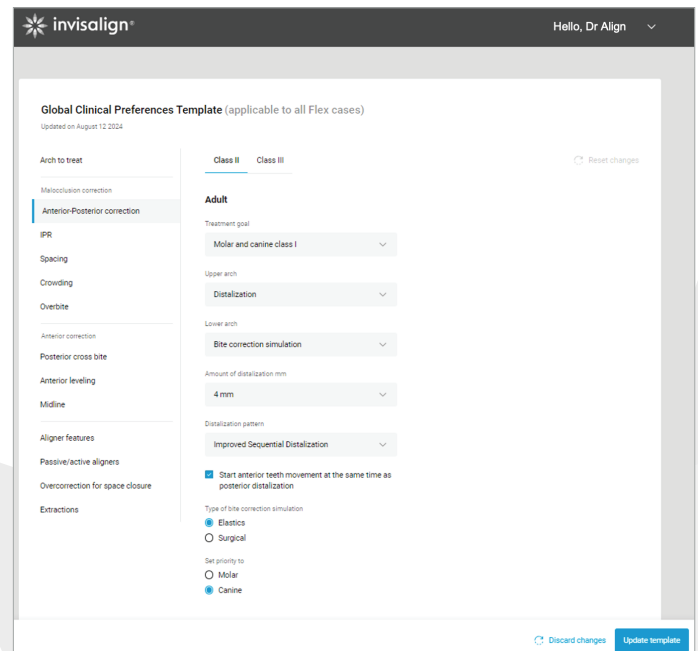

Plan Editor

Neue Methoden zur:

- Personalisierung gemäß den individuellen Bedürfnissen des Patienten
- Bearbeitung von Abweichungen vom IPP
- ASR festlegen
- Anpassung des AP-Ansatzes oder -Ziels
- Bearbeitung von Lückenständen
- Simulation von Extraktionen
- Und vieles mehr

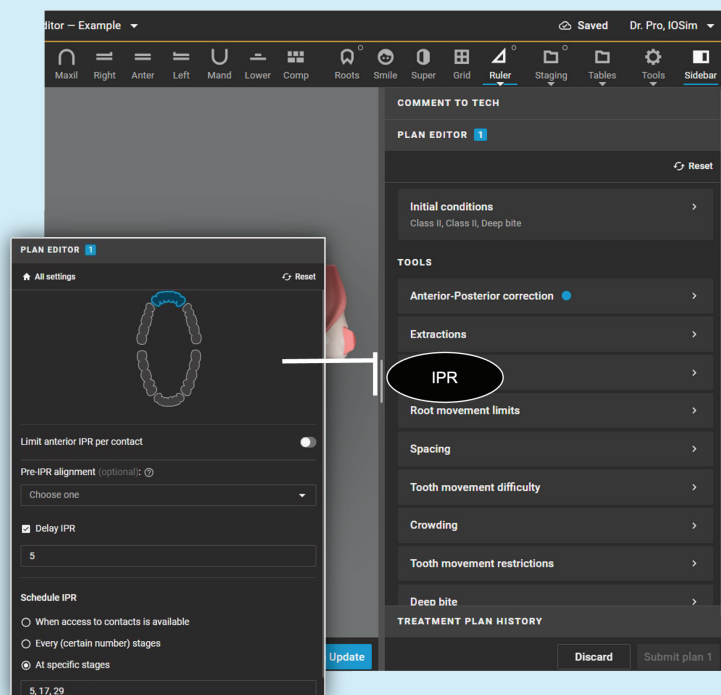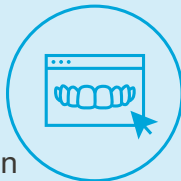

Eine Reihe von Invisalign® Behandlungsplanungstools, entwickelt auf Basis von über 25 Jahren Innovation und 20 Millionen behandelten Lächeln.

Konsistente Behandlungspläne, denen Sie vertrauen können.

- ✓ Personalisierter Invisalign® Behandlungsplan
 - Schnellstart mit der globalen Vorlage
 - Personalisieren Sie Ihren Behandlungsplan nach Ihren Vorstellungen

Behandlungspläne werden in weniger als der Hälfte der Fälle an den CAD-Designer zurückgesendet¹

Anpassung, wann Sie sie benötigen.

- ✓ Fallspezifische Präferenzen im Flex Verschreibungsformular
- ✓ ClinCheck® Pro Visualisierungssoftware
- ✓ Plan Editor
- ✓ 3D-Steuerung

Anwender bestätigen ihre Fälle 82 % schneller²

1. Basierend auf Erstbestellungen der Behandlungsoption Invisalign System Comprehensive von Kieferorthopäden, die den personalisierten Invisalign® Behandlungsplan bei mindestens 50 % ihrer Bestellungen für das System Comprehensive verwendet haben. Gesamtzahl der analysierten Bestellungen: 10.992. Änderungen werden anhand der Anzahl der Rücksendungen eines Behandlungsplans an den CAD-Designer gemessen, bevor der Behandlungsplan bestätigt wird. Verglichen wird die Summe der Bestellungen mit dem Personalisierten Invisalign® Behandlungsplan und ClinCheck Live Update mit der Summe der Bestellungen ohne den Personalisierten Invisalign® Behandlungsplan und ClinCheck Live Update. Die Änderungsrate für die Summe der Bestellungen mit dem Personalisierten Invisalign® Behandlungsplan und der ClinCheck Live Update Software ist um 57 % geringer. Die Bestellungen wurden zwischen November 2022 und April 2023 bestätigt.

2. Basierend auf der Auswertung von Erstbestellungen (n = 50.114 Fälle) der Invisalign Comprehensive Behandlungsoption durch Anwender (n = 165 Kieferorthopäden und Zahnärzte), die an einer eingeschränkten Markteinführung teilnahmen. Die Teilnehmer verwendeten für Änderungen des ClinCheck Behandlungsplans ausschließlich das ClinCheck Live Update mit 3D-Steuerung und wurden mit Anwendern verglichen, die zur Änderung ihrer ClinCheck Behandlungspläne ausschließlich mit CAD-Designern zusammenarbeiteten (Betrachtungszeitraum: 1. Juni 2021 bis 23. Dezember 2021). Gemessen wurde die Dauer vom erstmaligen Öffnen bis zur endgültigen Bestätigung des ClinCheck Behandlungsplans.

➤ Erfahren Sie mehr auf learn.aligntech.com

 Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway, San Jose, CA USA 95134

 Align Technology B.V., Herikerbergweg 312,
1101 CT, Amsterdam, Niederlande

 0344