

Moje

spersonalizowane
plany gotowe
w jednej chwili.



Uzyskaj wstępne plany ClinCheck®

o 56% szybciej*

dzięki nowemu środowisku
ClinCheck® Signature.

- Mniejsza konieczność kontaktu z projektantami CAD
- Maksymalna spójność i lepsza kontrola
- Więcej czasu na to, co najważniejsze

ClinCheck® Signature – krótki przewodnik


Zbiór naszych najnowszych innowacji w planowaniu leczenia, który pomaga lekarzowi kompetentnie tworzyć spersonalizowane, spójne plany leczenia na bieżąco i zyskać czas na to, co dla niego najważniejsze.

Najnowsze innowacje w planowaniu leczenia

- Formularz preskrypcji Flex Rx
- Oprogramowanie do planowania leczenia ClinCheck® Pro
- Plan Editor
- Kontroler 3D
- ClinCheck® Live Update

* Na podstawie zamówień głównych na leczenie Invisalign Comprehensive przesłanych przez lekarzy, którzy aktywowali szablon preferencji planowania leczenia. Łącznie przeanalizowano 487 926 zamówień. Porównywano zamówienia przesłane za pomocą szablonu preferencji planowania leczenia i bez jego pomocy. Czas mierzono od momentu otrzymania zamówienia do momentu udostępnienia planu ClinCheck lekarzowi do weryfikacji. Czas potrzebny w przypadku zamówień przesłanych z użyciem szablonu preferencji planowania leczenia jest o 56% krótszy. Zastosowano medianę. Analizie poddano zamówienia z okresu od kwietnia 2022 r. do maja 2023 r. Uwzględniono zamówienia od przeszkolonych ortodontów i stomatologów Invisalign z regionów NA, LATAM, EMEA i APAC. Dane dostępne w firmie Align Technology, Inc.

Piramida hierarchii **planowania leczenia ClinCheck®**

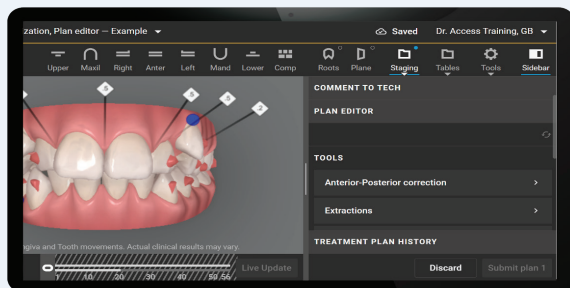

Kontroler 3D

z funkcją ClinCheck®
Live Update

Plan Editor

z funkcją ClinCheck® Live Update

**Można uzupełnić
o preferencje kliniczne
właściwe dla przypadku**

Formularz preskrypcji Flex Rx

**Można spersonalizować
w edytorze Template
Editor**

Globalny szablon preferencji klinicznych

Zgłoszenie przypadku *z użyciem* formularza Flex Rx

04 Select treatment option

Patient list / Patient file /

Patient type: Adult Product type: Invisalign clear aligners Treatment options

Select treatment option

Comprehensive Package	Moderate Package	Lite Package
Unlimited stages Selectable additional aligner options Flex Rx is supported	Up to 20 stages 2 set(s) of additional aligners included	Up to 14 stages 2 set(s) of additional aligners included
dual arch 5 year(s), unlimited additional aligners included 3 year(s), 3 set(s) of additional aligners included £1810 £1710	dual arch single arch	
Select		

Opcje leczenia kompatybilne z formularzem Flex Rx są oznaczone dopiskiem „Flex Rx is supported” (Obsługa Flex Rx)

05 Complete Flex Rx

Welcome to Flex Rx

Show me around

Some cases not supported by Flex Rx. Some cases may require submission with the Traditional Rx. [Switch to Traditional Rx](#)

Preferences Global Clinical Preferen... View Edit for all cases

Case specific clinical preferences (optional) No case specific clinical preferences added

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth
Tooth movement restrictions: none
Attachments restrictions: none
Extractions: none
Missing teeth: none

Eruption compensation
Eruption compensation: none
Molar tab: none

Uploaded Records 0/10000

Private Notes 0/10000
Write private notes here (only visible to you).
Private notes are only visible to you and will be displayed in the Notes section of the ClinCheck® software

Flex Rx – opcje preferencji właściwych dla przypadku

- Dostosuj do potrzeb pacjenta
- Zarządzaj wyjątkami od preferencji w swoim szablonie
- Zarządzaj brakami zębowymi
- Zaplanuj IPR
- Zarządzaj stłoczeniem

invisalign®

Patients Account Store Education Support Marketing Site

Welcome to Flex Rx

Show me around

Some cases not supported by Flex Rx. Some cases may require submission with the Traditional Rx. [Switch to Traditional Rx](#)

Preferences test View

Case specific clinical preferences (optional) IPR x

IPR

Follow chosen preferences template
Click here to view your predefined clinical preferences for "IPR"

Select segments where IPR is allowed

Right Left

Limit anterior IPR per contact
If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

Limit posterior IPR per contact
If unchecked, maximum limit of 0.5 mm IPR will be applied

IPR timing (roundtripping)
Perform alignment after IPR
Perform alignment before IPR
Delay IPR

Schedule IPR
Based on access to contacts
Every (certain number) stages
At specific stages

Arch to treat Both

Restrictions, extractions, and missing teeth

Uploaded Records 0/10000

Private Notes 0/10000
Write private notes here (only visible to you).
Private notes are only visible to you and will be displayed in the Notes section of the ClinCheck® software



Globalny szablon preferencji klinicznych (szablon globalny)

Szablon ten zawiera domyślne preferencje opracowane w Align do stosowania w razie niezdefiniowania własnych preferencji klinicznych.



- Globalny szablon preferencji klinicznych powstał na podstawie wyników leczenia i lat doświadczeń oraz pomyślnego przygotowania **milionów planów leczenia ClinCheck®** dla pacjentów Invisalign.
- Preferencje zawarte w globalnym szablonie preferencji klinicznych zostały ukształtowane w wyniku **wieloaspektowego podejścia obejmującego różne komponenty, w tym** analizę danych, sprawdzone protokoły, opinie klientów (także kręgów akademickich) oraz wkład wewnętrznych zespołów Align z całego świata.
- Do modyfikowania tych preferencji służy edytor Template Editor.


Strona preferencji klinicznych

Na stronie preferencji klinicznych dostępne są trzy opcje:

- Szablon Flex Rx
- Szablon tradycyjny
- Ustawienia ogólne

Praca z edytorem Template Editor


- Wszystkie opcje w tym edytorze są wstępnie wypełnione w oparciu o preferencje określone w globalnym szablonie preferencji klinicznych.
- Po pierwszym uruchomieniu wszystkie opcje zostają skonfigurowane **na podstawie aktualnych tradycyjnych preferencji klinicznych ze strony internetowej dla lekarzy Invisalign w połączeniu z domyślnymi preferencjami klinicznymi Align** w globalnym szablonie preferencji klinicznych.
- Preferencje te można w każdej chwili dostosowywać, a wszystkie zmiany są od razu uwzględniane w globalnym szablonie preferencji klinicznych.
- Zaktualizowany globalny szablon preferencji klinicznych jest stosowany we wszystkich przypadkach zgłaszanych z użyciem formularza Flex Rx. Przypadki zgłoszone wcześniej za pomocą formularza Flex Rx nie są w żaden sposób modyfikowane.

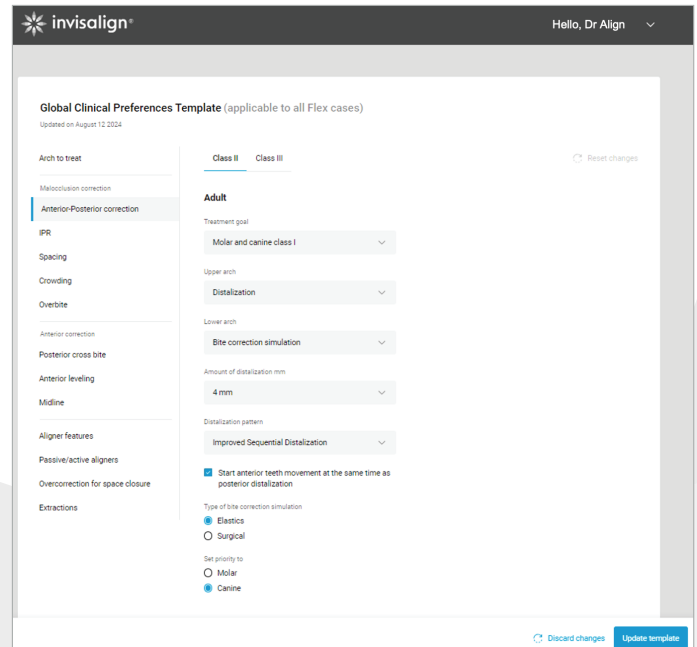

Plan Editor

Nowe metody:

- Dostosowania do potrzeb pacjenta
- Obsługi wyjątków od preferencji lekarza
- Planowania IPR
- Dostosowania sposobu lub celu korekty przednio-tylnej
- Leczenia szparowatości
- Symulacji ekstrakcji
- I nie tylko

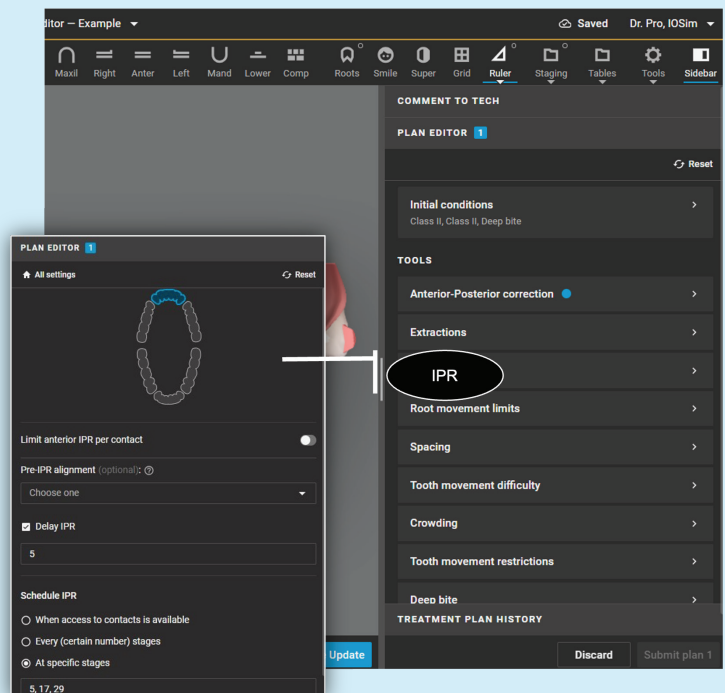

Pakiet narzędzi do planowania leczenia Invisalign® bazuje na ponad 25 latach innowacji i 20 milionach uśmiechów.

Spójne plany, którym można zaufać.

- ✓ Invisalign® Personalized Plan
 - Szybki start z globalnym szablonem.
 - Dowolność personalizacji planu.

**Plany są odsyłane projektantom CAD
ponad 2 razy rzadziej¹**

Personalizacja zależnie od potrzeb

- ✓ Preferencje kliniczne dla danego przypadku we Flex Rx
- ✓ Oprogramowanie wizualizacyjne ClinCheck® Pro
- ✓ Plan Editor
- ✓ Kontroler 3D

**Lekarze zatwierdzają przypadki
o 82% szybciej²**

1. Na podstawie zamówień głównych na leczenie Invisalign Comprehensive przesłanych przez lekarzy, którzy korzystali z usługi Invisalign® Personalized Plan w co najmniej 50% zamówień leczenia pakietem Comprehensive. Łącznie przeanalizowano 10 992 zamówienia. Modyfikacje liczono jako liczbę przypadków odesłania planu leczenia do projektanta CAD przed zatwierdzeniem planu. Porównano łączną liczbę zamówień składanych przy użyciu usługi Invisalign® Personalized Plan i funkcji ClinCheck Live Update z łączną liczbą zamówień składanych bez usługi Invisalign® Personalized Plan i funkcji ClinCheck Live Update. Wskaźnik modyfikacji jest o 57% niższy w przypadku łącznej liczby zamówień składanych przy użyciu usługi Invisalign® Personalized Plan i funkcji ClinCheck Live Update. Zamówienia zatwierdzano w okresie od listopada 2022 r. do kwietnia 2023 r.

2. Na podstawie zamówień podstawowych na leczenie Invisalign Comprehensive (n=50 114 przypadków) przesłanych przez lekarzy (n=165 ortodontów i stomatologów) uczestniczących w programie ograniczonego dopuszczenia na rynek, którzy używali wyłącznie ClinCheck Live Update dla kontrolera 3D, w porównaniu z tymi, którzy wprowadzali modyfikacje zaleceń ClinCheck w planach leczenia jedynie za pośrednictwem projektantów CAD, w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 23 grudnia 2021 r. Czas mierzono od pierwszego otwarcia planu leczenia ClinCheck przez lekarza do jego ostatecznego zatwierdzenia.

 Dowiedz się więcej na stronie learn.aligntech.com



Align Technology, Inc.
2820 Orchard Parkway, San Jose, CA USA 95134



Align Technology B.V., Herikerbergweg 312,
1101CT, Amsterdam, The Netherlands



0344