


# Program mentoringu koleżeńskiego Align

Mentoring koleżeński – Zgłaszanie przypadków  
Czerwiec 2025 r.

A024912-PL-PL-B Guide, How to, P2P, Mentee, PL

# Od czego zacząć?

# 1 – Od czego zacząć?

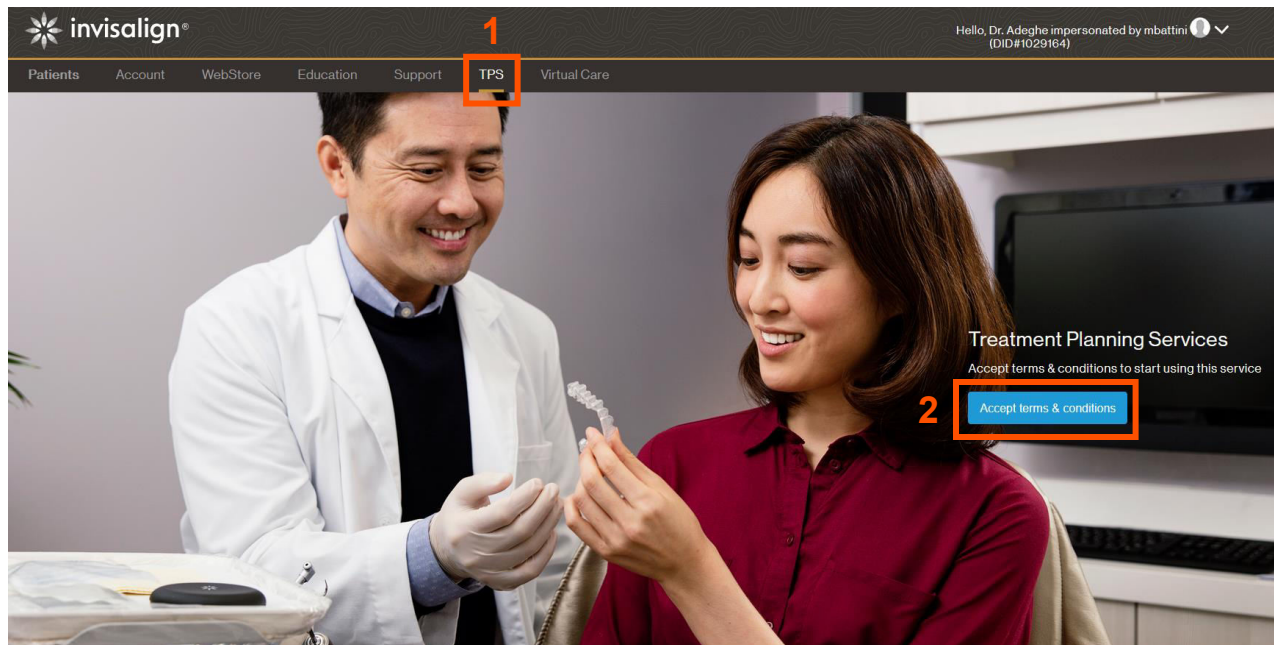

## Aby rozpocząć, należy:

- Zalogować się na swoje konto na stronie internetowej dla lekarzy Invisalign.
- Otworzyć kartę usługi planowania leczenia (TPS).
- Zaakceptować warunki.



## 2 – Jak wysłać przypadek do analizy?

**Assessment.**

- Note: Images from iTero Element 5D systems and above can be used in lieu of intraoral photos. Photos can be added as desired.


**Wide Smile Photo Requirements**

- Please note that wide smile photo is required for Smile Architect cases.
- Take a photo with Invisalign® Practice App


© Align Technology, Inc. All rights reserved. [Privacy](#), [Terms of Use](#), [Software as a Service](#)

- Wysłanie przypadku do oceny pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt do leczenia Twojego pacjenta.
- O analizę przypadku można poprosić, klikając przycisk Case Evaluation (Analiza przypadku) po prawej stronie okna dokumentacji pacjenta.
- Przed przekazaniem danych pacjenta mentorowi należy zaznaczyć pole wyboru potwierdzające uzyskanie zgody pacjenta na udostępnianie jego danych.

# 3 – Jak wysłać plan leczenia ClinCheck®?

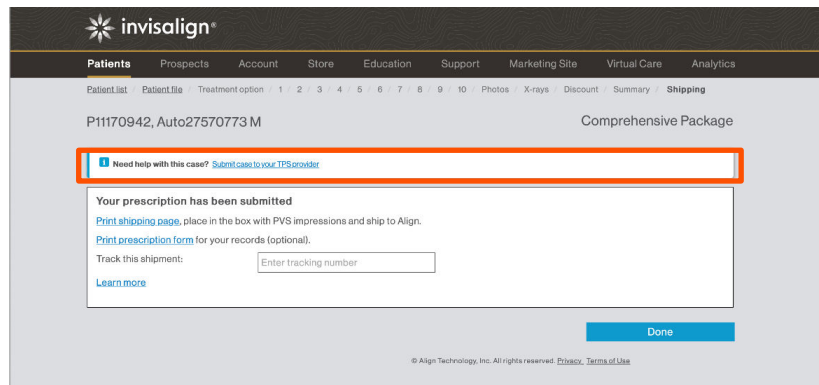


- Przypadek możesz wysłać po wypełnieniu formularza preskrypcji. Gdy plan leczenia ClinCheck będzie gotowy, zostanie on automatycznie udostępniony Twojemu Mentorowi.

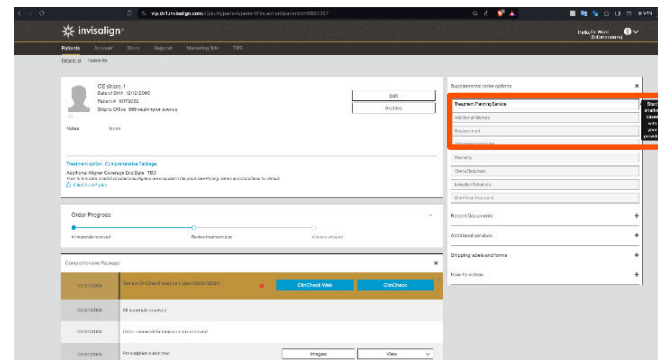


- Innym sposobem wysyłki planu leczenia ClinCheck jest kliknięcie przycisku Treatment Planning Service (Usługa planowania leczenia) po prawej stronie okna dokumentacji pacjenta. Fotografie i zdjęcia RTG pacjenta oraz plan leczenia zostaną udostępnione mentorowi.
- Przed przekazaniem danych pacjenta mentorowi należy zaznaczyć pole wyboru potwierdzające uzyskanie zgody pacjenta na udostępnianie jego danych.

# 4 – Jak wysłać przypadek?

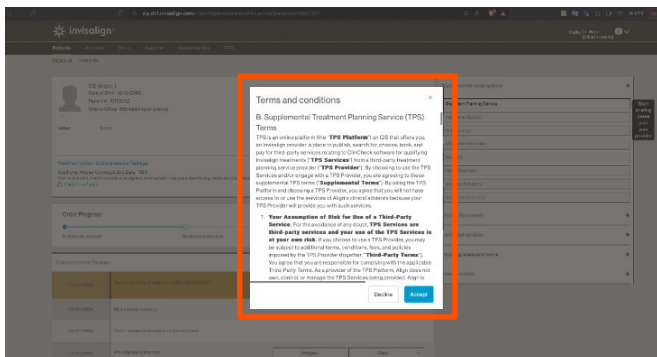

- Jeśli jeszcze nie zaakceptowano warunków, w wyskakującym okienku wyświetlany jest odpowiedni monit.
- W okienku można zaakceptować warunki.

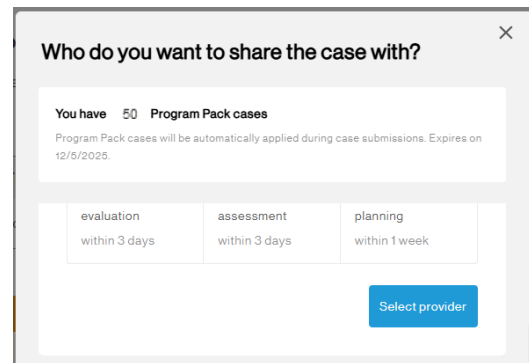

- Łącznie w programie masz do dyspozycji 50 przypadków do oceny (ewaluacja przypadku) i 50 przypadków planowania leczenia ClinCheck, które możesz wysłać swojemu Mentorowi podczas rejestracji w programie mentoringu koleżeńkiego.

# 5 – Wypełnij ankietę

Pojawi się prośba o wypełnienie kwestionariusza, który pomoże Twojemu Mentorowi zrozumieć, w jaki sposób może Cię wspierać.

Kwestionariusz składa się z 4 sekcji:

- Ogólny cel leczenia (tekst dowolny)
- Główne problemy pacjenta
- Uwarunkowania kliniczne
- Ograniczenia planu leczenia (opcje w polach wyboru)

Jeśli chcesz wprowadzić więcej szczegółów, wybierz opcję „Other” (Inne).

Share Case

Enter treatment goal

Share your treatment objectives and patient's chief concern for effective treatment planning

Overall treatment goal

Describe patient and your treatment goals including any restorative plan if it's applicable

Patient's chief concerns

☒ Crowding

☐ Spacing

☐ Open bite

☐ Deep bite

☒ Overjet

☐ Crossbite

☐ Underbite

☐ Misshapen teeth

☐ Misaligned teeth

☐ Narrow arch

☒ Other

Enter comments \*

Clinical considerations

☐ RCT

☐ Bone resorption

☐ Short roots

☐ Gingival recession

☐ Extractions

☒ Other

Enter comments \*

Treatment plan limitations

☐ Extractions

☐ IPR

☐ TADs

☐ Elastics


☐ Other

☒ I confirm that the patient whose data I am submitting, or the patient's legal guardian if applicable, has given valid consent for this data to be shared with and processed by Align and with third parties involved in the development of the patient's Invisalign treatment.


Back

Submit

# 6 – Porozmawiaj ze swoim mentorem na czacie

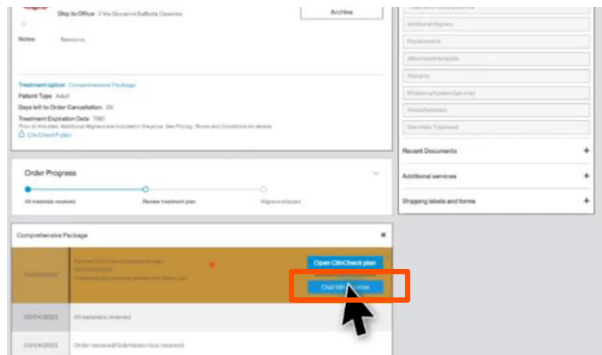


- Mentor przekazuje informacje zwrotne w okienku czatu.

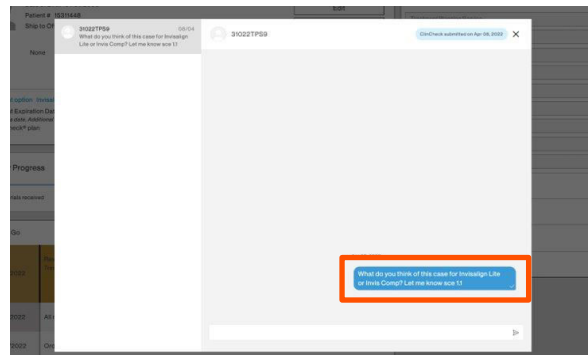


- Okienko czatu można wykorzystać do rozmów z Mentorem, zadawania pytań i odbierania informacji wartościowych zdaniem Mentora.



# 6 – Porozmawiaj ze swoim mentorem na czacie

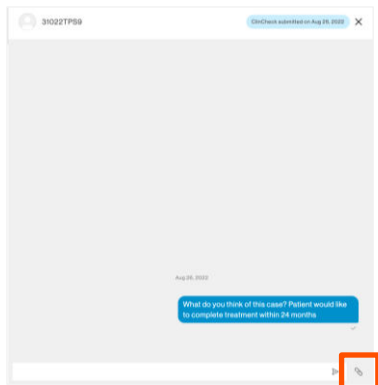


- Okienko czatu można też wykorzystać do przekazywania plików. W tym celu należy kliknąć ikonę spinacza w prawym dolnym rogu okienka.

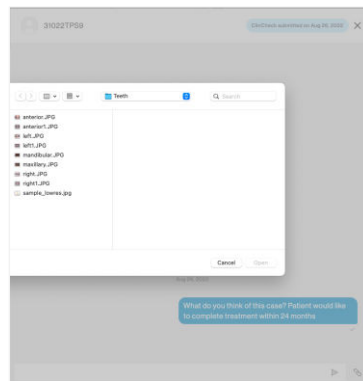


- Po kliknięciu ikony spinacza wyświetla się okno przeglądania lokalnego dysku, w którym można wybrać odpowiedni plik.
- Rozmiar pliku nie może być większy niż 320 MB.
- Obsługiwane formaty plików to jpeg, PDF, doc, HEIC, docx, png, txt, gif, MP4, MOV, WMV i PPT.

# 7 – Odpowiednio aktualizuj swój plan leczenia ClinCheck

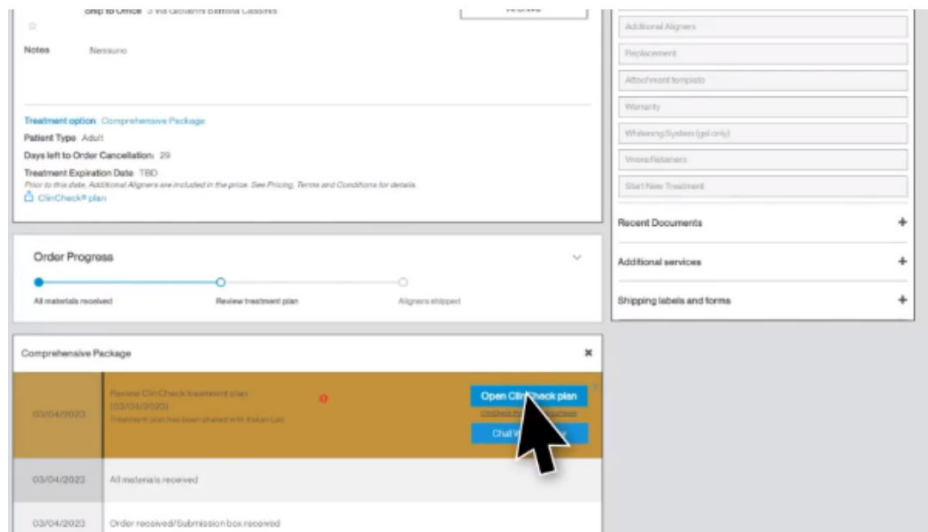

- Po otwarciu planu leczenia ClinCheck® należy wprowadzić konieczne poprawki zasugerowane przez Mentora. Z zatwierdzeniem planu leczenia ClinCheck® trzeba poczekać do chwili otrzymania ostatecznych zaleceń Mentora.

# 8 – Jak anulować przypadek?

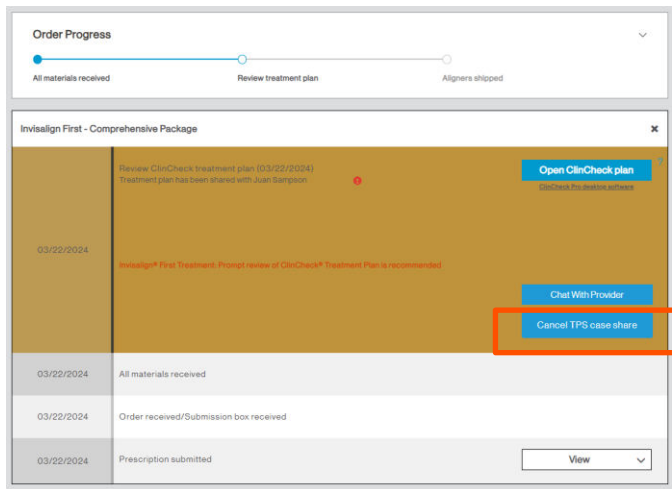

- Aby anulować przypadek, należy wybrać opcję „Cancel TPS case share” (Anuluj udostępnianie przypadku do TPS).
- W przypadku anulowania przypadku z Twojego pakietu zostaje odjęty 1 przypadek.

**Are you sure you want to cancel review of the case?** ✕

Your case is under Provider review. Canceling the review will be counted towards the usage of the service.

Please provide reason for cancellation:

- ☐ Needs finishing improvements
- ☐ Teeth are not tracking
- ☐ Patient has new restoration or dental work
- ☐ Patient was not complaint
- ☐ Treatment plan change (specify in treatment instructions)
- ☒ Other

Please give cancellation reason

Filled text

- Zostaje wyświetlone wyskakujące okienko pozwalające wskazać przyczynę anulowania przypadku.

# 9 – Śledzenie zgłoszenia przypadku

invisalign® Hello, Dr. Bom (impersonated by mbattini)

Patients Account Store Education **Subscription Program** Support TPS Virtual Care

Order history

Treatment planning services

Dec 2024 - Dec 2024 Status: ▾

| Assignment date ▾ | Provider name ▾ | Package or Service ▾ | Amount Paid ▾ | Payment status ▾ | Receipt |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|---------|
| Dec 16, 2024      | New UK TPS Test | Case Assessment      | USD 0.00      | Program Pack     |         |
| Dec 6, 2024       | New UK TPS Test | Case Assessment      | USD 0.00      | Program Pack     |         |

20 rows ▾ < 1 / 1 >

- Przypadki wysłane do swojego Mentora można śledzić w obszarze „Order history” (Historia zamówień) na karcie „Subscription Program” (Program subskrypcji).

# Dziękuję za uwagę!

align™ |  invisalign® | iTero™ | exocad™ | vivera™