

TriAway™


**Syringe Adapter/DE-Spritzen-Adapter/FR-Adaptateur pour Seringue/
NL-Adapter voor driefunctiespuit/IT-Adattatore per siringhe/ES-Adaptador
de Jeringa/PT-Adaptador de Seringa/SV-Sprutadapter/DA-Adapter til
sprøjte/FI-Ruiskuadapteri/EL-Προσαρμογέας αεροσύριγγας**



Black Micro Tip



White Mac Tip

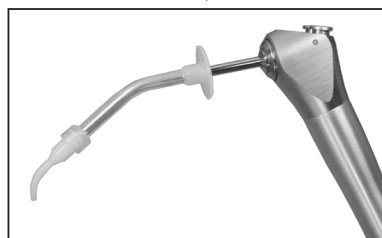

Slip TriAway snugly over three way syringe tip.

(Fits on most three way size tips.)*

*Dimensions 0.152"/3.86mm

Attach Ultradent tip of choice firmly to end. Experiment with air/water, air, or water prior to use in mouth.

Precautions: Do not autoclave. Do not reuse to avoid cross contamination

TriAway fest auf die Mehrfunktionsspritze aufstecken (passt auf die meisten Spritzen-Kanülen).*

*Maße 0,152"/3,86mm

Ausgewählten Ultradent-Spritzenansatz sicher befestigen. Zunächst mit Spray, Wasser oder Luft testen, vor dem Einsatz im Mund.

Achtung: Nicht autoklavieren. Nicht wiederholt verwenden, um Kreuzkontamination zu verhindern.

Insérer fermement l'embout TriAway sur la seringue multifonctions. (S'adapte sur la majorité des seringues multifonctions)*

*Dimensions 0.152 "/3.86mm

7 Fixer fermement un embout Ultradent de votre choix. Essayer avec l'air ou l'eau avant toute utilisation en bouche.

Précautions : Ne pas stériliser à l'autoclave. Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée.

Plaats de TriAway goed passend op de driefunctiespuittip. (Past op de meeste driefunctiespuittips.)*

*Afmetingen 0.152"/3.86 mm

Bevestig de Ultradent-tip naar keuze stevig op het uiteinde. Probeer uit met lucht/water, lucht of water alvorens in de mond te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen: Niet autoclavieren. Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te vermijden.

Far scorrere sull'estremità della siringa a tre vie (Si adatta alla maggior parte delle estremità a tre vie di misure diverse)*

*Dimensioni: 3,86mm (0,152")

Collegare con fermezza la punta Ultradent prescelta all'estremità. Provare con aria/acqua, aria o acqua prima dell'uso intraorale.

Precauzioni: non autoclavare. Per evitare la contaminazione crociata non riutilizzare.

Ajuste el adaptador TriAway sobre la punta de la jeringa triple (se adapta a la mayoría de jeringas triples).*

*Dimensiones 0.152"/3.86mm

Sujete firmemente la punta Ultradent de su elección con el extremo de la jeringa. Experimente con aire/agua antes de usarlo en la boca del paciente.

Precauciones: No desinfecte en autoclave. No lo reutilice, así evitará la contaminación cruzada.

SPANISH
PORTUGUESE
PORTUGUESE
SWEDISH
SWEDISH
DANISH
FINNISH

Colocar TriAway sobre ponta de seringa tripla (encaixa sobre a maior parte das seringas triplas).*

*Dimensões 0.152"/3.86mm

Colocar ponta Ultradent seleccionada firmemente na extremidade. Tester com jacto de ar e/ou água antes de utilizar na boca.

Precauções : Não autoclavável. Não reutilizar para evitar a contaminação cruzada.

Dra över TriAway ordentligt på trevägssprutan tip. Sätt på lämplig Ultradent kanyl på sprutadapters slut. (Den passar till de flesta sprutor.)*

*Storlek 3.86 mm

Pröva med luft/vatten, luft, eller vatten före användning i munnen.

Obsarvera: autoklavera ej. För undvikande av korskontamination får produkten inte återanvändas.

Træk TriAway over 3-funktionssprøjtes spids, så den slutter tæt. (Passer på de fleste 3 funktionssprøjter)*

*Mål: 0.152"/3,86mm

Sæt den valgte Ultradent spids fast på enden. Eksperimenter med luft/vand, luft eller vand før brug i munden.

Forholdsregler: Tåler ikke autoklavering. Må ikke genbruges for at undgå krydskontaminering.

Laita TriAway tukevasti kolmitoimiruiskun kärkeen. (Sopii käytettäväksi useimpien kolmitoimiruiskujen kanssa.)*

*Koko: 0.152"/3.86mm

Kinnitä valitsemasi Ultradent kärki tiukasti paikoilleen. Testaa puhaltamalla ilmaa/vettä, ilmaa tai vettä ennen suussa käyttöä.

Huomioitavaa: Ei voi autoklavoida. Älä käytä uudelleen ristikontaminaation välttämiseksi.

Τοποθετείστε σοικτά τον προσαρμογέα TriAway πάνω απο το ρύγος της αεροσύριγγας. (Ταιριάζει στα περισσότερα μεγέθη αεροσύριγγας.)*

*Διαστάσεις : 0,152"/3,86mm

Τοποθετείστε οποιοδήποτε ρύγος της Ultradent επιθυμείτε σοικτά στο άκρο του ρύγους. Δοκιμάστε το με αέρα/νερο, αέρα ή νερο πριν το οραιοποιησετε στο στομα.

Προουλάσεις : Μην το αποστειρώνετε σε αυτοκαυστο. Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρωτική μόλυνση.

ENGLISH

GERMAN

FRENCH

DUTCH

GREEK

U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

Keep out of reach of children.

For immediate reorder and/or complete descriptions of Ultradent's product line,
refer to Ultradent's catalog or call Toll Free 1-800-552-5512.

Outside U.S. call (801) 572-4200.



TriAway™ Syringe Adapter

Manufactured by:
Ultradent Products Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South)
South Jordan, Utah 84095 USA
Made in the USA from globally sourced materials

ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

© Copyright 2025 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. 23879AR11 051625

TriAway™ Syringe Adapter

Description:

The TriAway™ syringe is a disposable irrigator/dryer to be used with Ultradent™ delivery tips on three-way syringes. It will fit most three-way syringe tips with an outside diameter of 0.1523"/3.86mm.

Indications:

Use the TriAway syringe for controlled application of water and/or air to depths of tiny cavity preparations, whether they are minimally invasive operative-type preparations or endodontic preparations. Removal of water or excess bonding agents from even acute corners and line angles of larger preparations occurs with precision and superior predictability and quality.

Procedure:

1. Slip TriAway snugly over three-way syringe tip.
2. Attach Ultradent syringe tip of choice firmly to end.
3. Experiment with air/water, air or water flow on inert surface prior to use in mouth.

Precautions:

1. Do not force compressed air or water into endodontic canals or surgical sites.
2. Tips with a smaller diameter than 0.055" ID should only be used with air or water - not both at the same time.

Use of air/water with smaller diameter tips will not allow flow of both and may lead to backflow.

3. To prevent unwanted dislodgement, verify that all components are firmly attached.
4. Use light to moderate pressure with smaller diameter tips. Pneumatization of tissues may occur if tips are directed into sulcular tissues or surgical sites.
5. Insert TriAway to end of three-way syringe tip.
6. Apply petroleum jelly to three-way syringe tip before inserting TriAway.
7. Do not autoclave the TriAway syringe.



Fig. 1 The White Mac™ (shown here) provide a more predictable air water flow although access into micro preparations may be limited.