





Следуйте указаниям вашего стоматолога по наполнению гелем специально изготовленной капы для отбеливания. Используйте от 1/3 до 1/2 объема шприца.



Кончиками пальцев прижмите капу, чтобы она плотно прилегла к зубам. Носите капу с 10-процентным гелем Opalescence в течение 8-10 часов либо на протяжении всей ночи, капу с 15-процентным гелем Opalescence в течение 4-6 часов, 20-процентный гель Opalescence — в течение 2-4 часов, 35-процентный гель Opalescence — в течение 30-60 минут, а 45-процентный гель Opalescence Quick — в течение 15-30 минут.

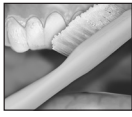

Удалите избыток геля чистым пальцем или мягкой зубной щеткой. Не проглатывайте воду, содержащую остатки геля.

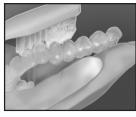


Почистите капу прохладной водой, используя мягкую зубную щетку. Храните капу в прилагаемом футляре.




Özel beyazlatma plağınızla jej koyma konusunda diş hekiminizin talimatlarını izleyin. Şişirginın 1/3'ü ile 1/2'sini kullanın.




Plakların yan taraflarının dişey uyum sağlaması için plağa hafifçe vurun. Opalescence %10 jeli 8-10 saat veya gece boyu, Opalescence %15 ve %16 jelleri 4-6 saat, Opalescence %20 jeli 2-4 saat, Opalescence %35 jeli 30-60 dakika ve Opalescence Quick %45 jeli 15-30 dakika kullanın.

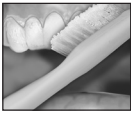


Fazla jeli yumuşak bir diş fırçası veya temizledikten sonra parmağınızla alın. Yıkamış jeli yutmayın.

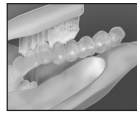

Plağı yumuşak fırça ve suyla yıkayın. Plağı verilen kaptaki muhafaza edin.

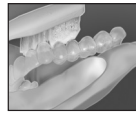

نظف الصبينة بفرشاة ناعمة وماء. حافظ الصبينة بالعلبة المرفقة معها.

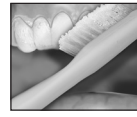

إزالة الجل الزائد بإصبع نظيف أو فرشاة أسنان ناعمة. لا يتبلع الجل أثناء المضمضة.



ابقر برفق على الصبينة لصبطها على جاني الأسنان. ضع Opalescence 10% لجلسة 8-10 ساعة أو طوال الليل و Opalescence 15% لجلسة 4-6 ساعات و Opalescence 20% لجلسة 2-4 ساعة و Opalescence 35% لجلسة 30-60 دقيقة و Opalescence Quick 45% لجلسة 15-30 دقيقة.



اتبع تعليمات طبيب الأسنان الخاص بك حول كيفية تحميل الجل في صبينة التبييض المخصصة. استخدم 1/3 إلى 1/2 من المحقنة.

RU- ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Меры предосторожности:


- Если у вас есть вопросы относительно надлежащего использования данного продукта, включая вопрос о том, сколько времени необходимо для отбеливания зубов, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим стоматологом.
- Регулярные стоматологические осмотры и чистка важны до и после отбеливания, чтобы поддерживать здоровую улыбку.
- Некоторые пациенты испытывают чувствительность при отбеливании. При возникновении чувствительности прекратите лечение и обратитесь к вашему стоматологу.
- Некоторые пациенты отмечают временный дискомфорт десен, губ, горла или языка. Если какой-либо из этих симптомов сохраняется более двух дней или постепенно ухудшается, позвоните своему стоматологу. Эти побочные эффекты обычно проходят в течение 1-3 дней после прекращения лечения.
- Беременные или кормящие женщины или пациенты с серьезными проблемами со здоровьем не должны отбеливать зубы. Консультируйтесь с лечащим врачом до начала лечения
- Не используйте, если у пациента имеется известная аллергия или химическая чувствительность к любому из ингредиентов отбеливающих средств Opalescence. У некоторых пациентов раздражение может вызывать мятный или дынный ароматизатор. Если у пациента имеется известная повышенная чувствительность к ароматизаторам, используйте вариант без ароматизаторов.
- Не отбеливайте зубы при помощи бытового отбеливателя.
- Не употребляйте табачные изделия и продукты питания, способные значительно окрасить зубы во время использования отбеливающих кап.
- Зубы естественно темнее вдоль линии десны. Этим зонам может потребоваться больше времени для отбеливания, чем остальной части поверхности зуба. Зоны вдоль линии десны остаются белее пятна; при дальнейшем отбеливании они становятся менее заметными.
- В процессе отбеливания на эмали могут просупать белые пятна; при дальнейшем отбеливании они становятся менее заметными.
- Коронки, мосты, частичные протезы, виниры и композитные пломбы не будут отбеливаться.
- Кафе, табак и другие продукты могут повторно окрашивать ваши зубы с течением времени. Если это произойдет, зубы можно отбеливать повторно.
- Некоторые пломбы из амальгамы могут окрашивать капу в темно-фиолетовый цвет; это нормально.
- Проверьте срок годности и храните в соответствии с инструкциями.
- Избегайте проглатывания большого количества геля или воды, используемой для ополаскивания остатков геля с зубов.
- Не допускайте попадания в глаза.




귀하의 맞춤형 미백 트레이에 젤을 어떻게 부을지에 대해 치과사의 지시 사항에 따르십시오. 주사기의 1/3 내지 1/2 정도를 사용합니다.



트레이를 가볍게 쳐서 트레이에 측면을 치아에 적용하십시오. Opalescence 10%젤은 8-10시간 또는 밤새, Opalescence 15% 및 16%젤은 4-6 시간, Opalescence 20%젤은 2-4 시간, Opalescence 35%는 30-60 분, Opalescence Quick 45%젤은 15-30분 간 도포합니다.

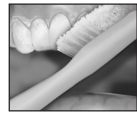

깨끗한 손가락이나 부드러운 칫솔로 과도한 젤을 제거하십시오. 린스킨을 삼키지 마십시오.

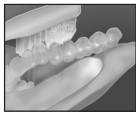


부드러운 솔과 물로 트레이를 세척하십시오. 트레이를 제공된 케이스에 보관하십시오.




遵守牙医的如何将凝胶装入定制美白牙托上的使用说明。使用 1/3 至 1/2 的注射器。



轻轻敲击牙托，以使牙托侧面适应牙齿。 Opalescence 10% 凝胶 8-10 小时或过夜。 Opalescence 15% 和 16% 凝胶 4-6 小时。 Opalescence 20% 凝胶 2-4 小时。 Opalescence 35% 凝胶 30-60 分钟，以及 Opalescence Quick 45% 凝胶 15-30 分钟。

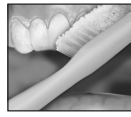

用干净的手指或软牙刷去除多余的凝胶。切勿吞咽冲洗的凝胶。

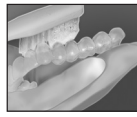


用软刷和水清洁牙托。将牙托存放在提供的盒子里。




ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ของท่านในการใส่เจลลงในถาดฟอกสีฟันสำหรับฟอกสีฟัน 1/3 ถึง 1/2 ของกระบอกฉีด



แตะถาดฟอกสีฟันเบาๆเพื่อรับด้านข้างของถาดเข้ากับฟัน ใส่เจล Opalescence 10% เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงหรือข้ามคืน, เจล Opalescence 15% และ 16% เป็นเวลา 4-6 ชั่วโมง, เจล Opalescence 20% เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง, เจล Opalescence 35% เป็นเวลา 30-60 นาที, และ เจล Opalescence Quick 45% เป็นเวลา 15-30 นาที

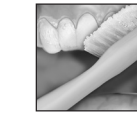

ถ้าเจลเหลือเป็นชั้นบนขอบอกด้วยนิ้วมือหรือแปรงสีฟันบนขอบที่สะอาด อย่างสม่ำเสมอ ที่ล้างออก

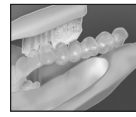

ถ้าความสะอาดถาดฟอกสีฟันด้วยแปรงขนอ่อนและน้ำเย็น ถาดฟอกสีฟันในกล่องที่ปิดให้

KO-환자 안내사항

예방적 주의사항

- 치아를 표백하는 데 걸리는 시간 등 본 제품의 적절한 이용과 관련하여 질문이 있으시면, 귀하의 치과 의사에게 문의하십시오.
- 건강한 치아를 유지하기 위해서는 표백을 하기 전과 후에 정기적으로 치아 검사를 받고 치아 세정을 하는 것이 중요합니다.
- 환자에 따라서는 표백으로 민감성을 느낍니다. 이럴 경우, 치료를 중단하고 치과 의사에게 연락하십시오.
- 환자에 따라서는 잇몸, 입술, 목구멍, 또는 혀에서 일시적으로 불편감을 느낍니다. 이러한 증상은 2일 이상 지속되거나 더욱 악화되면, 치과 의사에게 연락하십시오. 이러한 부작용은 보통 치료를 중단한 후 1일 내지 3일 내에 가라앉습니다.
- 임신 중이거나 모유 수유 중인 여성, 또는 심각한 건강상 우려가 있는 환자는 미백해서는 안 됩니다. 치료 전에 임차 진료 의사와 상의하십시오
- Opalescence 미백 성분은 알레르기 또는 화학적 민감성이 있는 환자는 사용하지 마십시오. 민트 또는 멜론 맛이 일부 환자를 자극할 수 있습니다. 환자가 맛에 대해 알려진 민감성이 있다면, 맛이 가미되지 않은 변형 제품을 선택해야 합니다.
- 치아 미백을 위해 가정용 표백제를 사용하지 마십시오.
- 표백용 트레이를 설치할 동안에는 담배를 이용하거나 음식을 섭취하지 마십시오.
- 치아는 자연적으로, 잇몸 라인 주변을 따라서는 색깔이 더 짙습니다. 그러한 부분들은 밝게 하는 데 있어서 치아 표면의 다른 부분보다 시간이 더 많이 걸릴 수 있으며, 보통은 약간 더 짙은 상태로 됩니다.
- 미백 과정에서, 하얀 점들이 법랑질에서 더 뚜렷하게 나타날 수 있으며, 미백을 계속하면 미백과 조화를 이룰 수 있습니다.
- 크라운, 브리지, 부분적 의치, 베니어, 콤포짓 충전제는 표백되지 않습니다.
- 커피, 담배, 기타 제품은 시간 경과에 따라 치아를 다시 더럽힐 수 있습니다. 그러한 일이 발생할 경우, 치아를 다시 미백할 수 있습니다.
- 일부 아말감 충전제는 표백 트레이에 포도 색깔을 남길 수 있는데, 그런 것은 정상적인 일입니다.
- 만기일을 확인하고 지시에 따라 보관하십시오.
- 치아에 남은 젤 잔류물을 씻기 위해 사용하는 젤이나 물을 다량 삼키지 않도록 하십시오.
- 눈과의 접촉을 피하십시오.

注意事項

- 如果您对本品的正确使用有任何疑问,包括漂白您的牙齿需要多长时间,请咨询您的牙医。
- 在漂白之前和之后定期进行牙齿检查和清洁都很重要,以保持健康的微笑。
- 一些患者对漂白过敏.如果发生这种情况,请停止治疗并联系您的牙医。
- 有些患者注意到牙龈、嘴唇、喉咙或舌头暂时不适.如果这些症状中的任何一种持续超过两天或逐渐恶化,请致电您的牙医.这些副作用通常会在停止治疗后 1-3 天内消退。
- 不得对孕妇或哺乳期妇女,或有严重健康问题的患者进行美白操作.治疗前请咨询他们的主保健医生
- 如果患者对 Opalescence 美白剂中的任何成分具有已知的过敏或化学过敏,请勿使用.薄荷或甜瓜的味道可能会刺激某些患者.如果患者对调味剂具有已知的过敏,则应选择非调味产品。
- 请勿使用家用漂白剂来美白牙齿。
- 在放置漂白牙托期间请勿吸烟或进食。
- 牙齿沿着牙龈线自然变暗,这些区域可能比牙齿表面的其余部分需要更多时间变亮并且通常保持稍暗些。
- 在美白过程中,白色斑点可能在牙釉质上显得更加突出,并且可能与持续的美白混合。
- 牙冠、齿桥、局部假牙、贴面和复合填充物不会漂白。
- 咖啡、烟草和其他产品会随着时间的推移重新染色牙齿.如果发生这种情况,牙齿可以重新美白。
- 有些合金填料可能会在漂白牙托中留下深紫色;这是正常的。
- 检查有效期并按使用说明储存。
- 避免吞咽大量凝胶或用于冲洗牙齿凝胶残留物的水。
- 避免接触眼睛。

ZH-患者指导

ข้อควรระวัง

- หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์, รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันของท่าน, โปรดปรึกษากับทันตแพทย์ของท่าน
- การตรวจฟันและทำความสะอาดก่อนและหลังฟอกสีฟัน ทั้งก่อนและหลังการฟอกสีฟันเพื่อช่วยยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- คนไข้บางท่านประสบกับอาการปวดต่อความรู้สึกเมื่อฟอกสีฟัน หากเกิดอาการนี้ขึ้น ท่านควรปรึกษาและปรึกษากับทันตแพทย์ของท่าน
- คนไข้บางท่านไม่ประสบกับความรู้สึกไม่สบายที่เหงือก, รุนฟันปาก, ช่องคอ, หรือลิ้น หากอาการเหล่านี้เป็นอยู่จนกว่าสองวันหรืออาการเลวลงอย่างต่อเนื่อง, โปรดหาทันตแพทย์ของท่าน โดยบอกอาการอย่างชัดเจนซึ่งสามารถบอกได้ภายใน 1-3 วันหลังหยุดการรักษา
- หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร, หรือมีปัญหสุขภาพหรือเงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเข้าพบทันตแพทย์
- หากคนไข้มีอาการแพ้หรือความไวต่อสารเคมีต้องอ่อนเพลียใดๆในภายหลังพบขาว Opalescence ที่อยู่แล้ว, ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ sals-แพนหรือแปรงสีฟันอ่อนจนกว่าได้เกิดการระคายเคืองต่อผิวขึ้นหากคนไข้มีอาการปวดต่อรูปร่าง, ควรเลือกแปรงที่ไม่ใช่แปรงแข็ง
- ห้ามใช้สารฟอกขาวที่ใช้ในครัวเรือนในการฟอกสีฟันขาว
- ห้ามใช้ยาสูบหรือทอกลสูดใดๆในขณะที่ใส่ถาดฟอกสีฟัน
- ฟันจะมีสีคล้ำกว่าบริเวณเส้นขอบเหงือก บริเวณเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เวลานานกว่าบริเวณอื่นในการขาวขึ้นและอาจจะยังคงมีสีที่คล้ำกว่าบริเวณอื่น
- อาจมีจุดสีขาวปรากฏบนเคลือบฟันในระหว่างการฟอกสีฟันและสีอาจจะกลับคืนมาเมื่อฟอกต่อ
- รสของฟัน, สดฟันฟัน, ฟันที่ลอบบางลง, วิบวับ, และรอยจุดด่างโผล่จะไม่ใช่
- กาแฟ, ยาสูบ, และผลิตภัณฑ์อื่นๆอาจทำให้ฟันกลับมีสีคล้ำอีกเมื่อเวลาผ่านไป หากเป็นเช่นนั้น, สามารถฟอกฟันซ้ำได้
- รอยจุดด่างโผล่อาจจะทำให้เกิดสีม่วงบนเือกของฟัน, เป็นเรื่องปกติ
- ตรวจสอบวันหมดอายุและเก็บรักษาตามคำแนะนำ
- หลีกเลี่ยงการกลืนเจลจำนวนมากหรือน้ำที่ใช้ล้างแปรงสีฟันแปรงขนอ่อนของเจลออกหากฟัน
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ตาเข้า

TH- ขั้นตอนการใช้สำหรับคนไข้

PT- INSTRUÇÕES PARA O PACIENTE






1. Se tiver alguma pergunta sobre o uso apropriado de este produto, incluindo quanto tempo demora a branquear os seus dentes, consulte o seu dentista.

2. Exames e impressões dentárias regulares são importantes antes e depois do branqueamento para manter um sorriso saudável.

3. Uma pequena percentagem de pacientes pode experimentar sensibilidade com o branqueamento. Se isto acontecer, limte o tempo ou a utilização correta deste produto, incluindo o tempo que demora a branquear os seus dentes.

4. Alguns pacientes podem experimentar sensibilidade com o branqueamento. Se isto acontecer, limte o tempo ou a utilização correta deste produto, incluindo o tempo que demora a branquear os seus dentes.

5. Alguns pacientes podem experimentar sensibilidade com o branqueamento. Se isto acontecer, limte o tempo ou a utilização correta deste produto, incluindo o tempo que demora a branquear os seus dentes.

6. Se o paciente tiver uma alergia conhecida a qualquer dos ingredientes contidos no branqueador Opalescence, não utilize este produto. O sabor de menta o mentol pode ser irritante para alguns pacientes. Se um paciente tiver uma sensibilidade conhecida aos sabores, deve ser selecionada a variedade sem sabores.

7. Não utilize líquido caseira para branquear os dentes.

8. Não fume nem coma quando tiver as moldetas de branqueamento aplicadas.

9. Os dentes são naturalmente mais escuros junto a linha das gengivas. Estas zonas poderão demorar mais tempo a branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais escuras.

10. Podem aparecer manchas brancas mais prematadas no esmalte durante o processo de branqueamento e que desaparecerão com o branqueamento contínuo.

11. Ao longo do tempo, o café, tabaco e outros produtos podem voltar a manchar os seus dentes. Se isto acontecer é possível voltar a branquear os dentes.

12. Algumas obturações com amálgamas podem deixar uma cor rosa escura na sua moldeta de branqueamento, isto é normal.

13. Algumas obturações com amálgamas podem deixar uma cor rosa escura na sua moldeta de branqueamento, isto é normal.

14. Consulte a ficha de validade e amarelo de instruções.

15. Evite ingerir grandes quantidades de gel ou da água usada para lavar os resíduos de gel dos dentes.

16. Evite o contacto com os olhos.

Opalescence 10% Regular:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, EDTA

Opalescence 10% Mint:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, Peppermint Oil (Aroma), EDTA

Opalescence PF 10% Regular:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Xylitol, Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

Opalescence PF 10% Mint:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Xylitol, Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, EDTA, Peppermint Oil (Aroma), Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

Opalescence PF 10% Melon:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Xylitol, Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, Watermelon Flavor (Aroma), EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

Opalescence F 15% Melon:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Xylitol, PEG-6, Carbomer, Sodium Hydroxide, Watermelon Flavor (Aroma), EDTA, Sodium Fluoride

Opalescence PF 15%, 16% and 20% Regular:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Xylitol, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

Opalescence PF 15%, 16% and 20% Mint:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Xylitol, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, EDTA, Peppermint Oil (Aroma), Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

Opalescence PF 15%, 16% and 20% Melon:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Xylitol, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, Watermelon Flavor (Aroma), EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

Opalescence 35% Regular:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Hydrogen Peroxide, Xylitol, Sodium Hydroxide, EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride, Sucralose

Opalescence 35% Mint:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Hydrogen Peroxide, Xylitol, Sodium Hydroxide, EDTA, Peppermint Oil (Aroma), Potassium Nitrate, Sodium Fluoride, Sucralose

Opalescence 35% Melon:
 Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Hydrogen Peroxide, Xylitol, Sodium Hydroxide, Watermelon Flavor (Aroma), EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride, Sucralose

Opalescence Quick 45%:
 Ingredients: Water, Glycerin, Carbamide Peroxide, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Polyethylene Glycol, Xylitol, Sodium Hydroxide, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride, EDTA, Peppermint Oil (Aroma), Sucralose.



EN- Health hazard
 ES- Peligro para la salud
 PT- Riscos à saúde
 RU- Опасно для здоровья
 TR- Sağlık için tehlike
 AR- خطر التلوث
 KO- 건강유해물
 ZH- 健康危害
 TH- อันตรายต่อสุขภาพ



EN- See Instructions
 ES- Lea las Instrucciones
 PT- Veja as instruções
 RU- См. инструкцию
 TR- Talimatlara bakın
 AR- انظر التعليمات
 KO- 설명서 참고
 ZH- 参阅说明
 TH- ดูคำแนะนำ



EN - Kosher Certified
 ES - Certificación Kosher
 PT - Certificado Kosher
 RU - Сертифицирован как кошерный
 TR - Kosher Sertifikalı
 AR - معتمد بأنه موافق للشريعة اليهودية
 TH - มั่นใจว่าถูกต้องตามหลักศาสนา



EN- Recycle
 ES- Recicla
 PT- Reciclável
 RU- Утилизовать
 TR- Geri dönüştürün
 AR- قم بإعادة التدوير
 KO- 재활용
 ZH- 回收
 TH- รีไซเคิล



EN- Keep out of reach of children
 ES- Mantenga alejado del alcance de los niños
 PT- Mantenha o produto fora do alcance de crianças
 RU- Утилизовать в недоступном для детей месте
 TR- Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin
 AR- احتفظ بعيداً عن متناول الأطفال
 KO- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 둘 것
 ZH- 置于儿童不能触及之处
 TH- เก็บห่างจากเด็ก



EN- 1oz (20ml) Opalescence Whitening Toothpaste
 ES- Pasta Dental Blanqueadora
 PT- Pasta de Dentes Branqueadora
 RU- Зубная паста Opalescence с отбеливающим эффектом
 TR- Beyazlatıcı Diş Macunu
 AR- 1 أونصة (20 مل) من معجون الأسنان
 KO- 1온스(20ml) Opalescence 이백용 치약
 ZH- 含有氟物质的清凉薄荷味 增白牙膏
 TH- 1 ออนซ์ (20 มิลลิกรัม) Opalescence 1oz (20ml)



EN- Lot Number
 ES- Número de lote
 PT- Número do lote
 RU- Номер партии
 TR- Lot Numarası
 AR- رقم اللوت
 KO- 로트 번호
 ZH- 批号
 TH- หมายเลขล็อต



EN- Keep away from heat/sunlight
 ES- Mantenga alejado del calor/luz solar
 PT- Mantenha distância do calor/luz solar
 RU- Беречь от воздействия высоких температур и солнечного света
 TR- Isıdan/güneş ışığından uzak tutun
 AR- احفظ بعيداً عن متناول الأطفال
 KO- 열/햇빛으로부터 차단
 ZH- 避免热源/日晒
 TH- เก็บห่างจากความร้อน



EN- Use by date
 ES- Utilizar antes de
 PT- Validade
 RU- Использовать до
 TR- Son kullanma tarihi
 AR- تاريخ انتهاء الصلاحية
 KO- 소비기한
 ZH- 保存期
 TH- หมดอายุ



EN- Shade Guide
 ES- Guía de Tonos
 PT- Guia de Cores
 RU- шкала оттенков
 TR- Renk Skalası
 AR- دليل الألوان
 KO- 색조 가이드
 ZH- 比色板
 TH- ขีดสีฟัน

ES- INSTRUCCIONES PARA PACIENTES






1. Si tiene alguna pregunta sobre el uso apropiado de este producto, incluyendo cuánto tardará en blanquear sus dientes, consulte con su dentista.

2. Los exámenes e impresiones dentarias regulares son importantes antes y después del blanqueamiento para mantener una sonrisa saludable.

3. Algunos pacientes pueden experimentar sensibilidad con el blanqueo. Si esto sucediera, detenga el tratamiento y póngase en contacto con su dentista.

4. Algunos pacientes pueden experimentar sensibilidad con el blanqueo. Si esto sucediera, detenga el tratamiento y póngase en contacto con su dentista.

5. Algunos pacientes pueden experimentar sensibilidad con el blanqueo. Si esto sucediera, detenga el tratamiento y póngase en contacto con su dentista.

6. Si el paciente tiene una alergia conocida a cualquier de los ingredientes que contiene el blanqueador Opalescence, no utilice este producto. El sabor de menta o mentol puede ser irritante para algunos pacientes. Si un paciente tiene una sensibilidad conocida a los sabores, debe ser usada la variedad sin sabor.

7. No usar lejía doméstica para blanquear los dientes.

8. No fume o coma mientras lleva las cubetas de blanqueamiento.

9. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para blanquearse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.

10. Los puntos blancos pueden aparecer más prematados en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

11. Los productos con amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en la cubeta de blanqueamiento; esto es normal.

12. Algunas empastes de amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en la cubeta de blanqueamiento; esto es normal.





13. Algunas empastes de amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en la cubeta de blanqueamiento; esto es normal.

14. Consulte la fecha de caducidad y gúarde el producto según las instrucciones.

15. Evite ingerir grandes cantidades de gel o del agua usada para enjuagar el residuo del gel de los dientes.

16. Evite el contacto con los ojos.

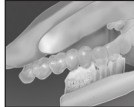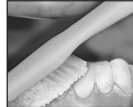EN - PATIENT INSTRUCTIONS

1. If you have any questions regarding the appropriate use of this product, including how long it will take to whiten your teeth, please consult your dentist.

2. Regular dental checkups and cleanings are important before and after whitening to maintain a healthy smile.

3. Some patients experience sensitivity with whitening; should this occur, stop treatment and contact your dentist.

4. Some patients have noticed temporary discomfort of the gums, lips, throat, or tongue. Should any of these symptoms persist more than two days or progressively worsen, call your dentist. These side effects will usually subside within 1-3 days after treatment is discontinued.

5. Pregnant or breastfeeding women, or patients with serious health concerns should not whiten. Consult their primary care provider prior to treatment.

6. If patient has a known allergy or chemical sensitivity to any of the ingredients in Opalescence whitening, do not use. Mint or melon flavor can be irritating to some patients. If a patient has a known sensitivity to flavorings, the non-flavored variant should be selected.

7. Do not use household bleach to whiten teeth.

8. Do not use tobacco or eat while whitening trays are in place.

9. Teeth are naturally darker along the gum line. These areas may require more time to lighten than the rest of the tooth surface and usually remain slightly darker.

10. White spots that appear on the enamel during the whitening process may blend with continued whitening.

11. Crowns, bridges, partial dentures, veneers, and composite fillings will not whiten.

12. Coffee, tobacco, and other products can re-stain your teeth over time. Should this occur, teeth can be re-whitened.

13. Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.

14. Check expiration date and store according to instructions.

15. Avoid swallowing large amounts of gel or water used to rinse gel residue from the teeth.

16. Avoid contact with eyes.