


Yerleştirme Rehberi

BAŞLANGIÇ



1.

Gerekli oklüzogingival yüksekliğe göre uygun bir matris bandı seçin. Presel kullanarak, matris bandı tırnağını kavrayın ve gerekiyorsa bükün, ardından restore edilecek dişe bakan konkav yüzeye interproksimal olarak yerleştirin.

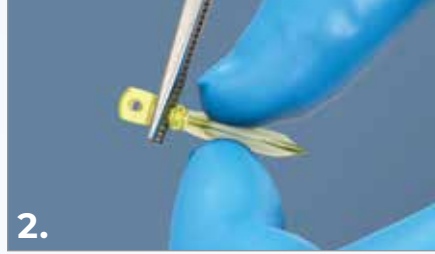

2.

Matris bandını preparasyonun gingival kısmına en iyi şekilde adapte eden kamayı seçin. Presel ile kamayı kavrayın.



3.

Kama yerleştirme sırasında matris bandına hafif parmak basıncı uygulayarak yerinden çıkmasını önleyebilirsiniz.



4.

Gerekirse, diş eti yüzey kenarına daha fazla uyum sağlamak için ek bir kama kullanılabilir.



5.

Yüzük forsepsini kullanarak Halo yüzüğünü dikkatlice yerleştirin.



6.

Yüzük, dişin her iki tarafında kama üzerinde duran çatal uçları ile mümkün olduğunca aşağıya yerleştirilmelidir.



7.

Matris bandının yüzey kenar marjlarına iyi adapte olduğundan ve matris bandının komşu diş ile sıkı kontak halinde olduğundan emin olmak için matris bandı, kama ve yüzük yerleşimini kontrol edin.

BITİŞ





4831 HALO KIT - Original Bantlar

2 x Universal yüzükler

25 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama *Small, Medium, Large*

1 x HALO Karuseli

1 x Presel

1 x Forseps



4832 HALO INTRO KIT - Original Bantlar

2 x Universal yüzükler

25 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama *Small, Medium, Large*

1 x HALO karuseli

4833 HALO INTRO KIT - Firm Non-stick Bantlar

2 x Universal yüzükler

20 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama *Small, Medium, Large*

1 x HALO karuseli

4835 HALO MINI KIT - Original Bantlar

2 x Universal yüzükler

5 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

5 x her boyutta kama *Small, Medium, Large*

1 x HALO karuseli

4834 HALO INTRO KIT - Firm Bantlar

2 x Universal yüzükler

25 x her boyutta matris bantları

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 x her boyutta kama *Small, Medium, Large*

1 x HALO karuseli

HALO Original Bantlar

Boyut	50 ad	100 ad
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457



HALO Kamalar

Boyut	100 ad
<i>Small</i>	5042
<i>Medium</i>	5043
<i>Large</i>	5044



HALO Firm Bantlar

Boyut	50 ad	100 ad
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—



HALO Yüzük

Boyut	1 ad	2 ad
Universal	5008	5009



5048 - HALO Presel 1 ad



5047 - HALO Forseps 1 ad



HALO Firm Non-Stick Bantlar

Boyut	50 ad	100 ad
3,5 mm	5049	—
<i>4,5 mm</i>	<i>5051</i>	<i>5052</i>
<i>5,5 mm</i>	<i>5053</i>	<i>5054</i>
<i>6,5 mm</i>	<i>5055</i>	<i>5056</i>
7,5 mm	5057	—

