


Guida di Posizionamento

INIZIO



1.

Selezionare una matrice appropriata in base all'altezza occlusogengivale. Usando la pinza afferrare la linguetta della matrice e piegarla quanto necessario, quindi posizionarla interprossimalmente con la superficie concava rivolta verso il dente da restaurare.

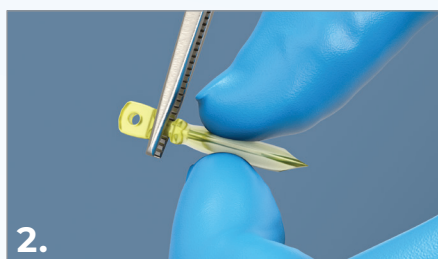

2.

Selezionare il cuneo che adatta meglio la matrice alla porzione gengivale della preparazione. Afferrare il cuneo con una pinza per pellet.



3.

Potrebbe essere necessario applicare una leggera pressione con le dita sulla matrice per evitare che si sposti durante il posizionamento del cuneo.



4.

Se necessario, è possibile utilizzare un cuneo aggiuntivo per fornire un maggiore adattamento al margine gengivale della cavità.



5.

Posizionare con attenzione l'anello HALO usando la pinza allarga-anello.



6.

L'anello deve essere posizionato il più in basso possibile con le estremità a cavallo del cuneo su ciascun lato del dente.



7.

Controllare il posizionamento della matrice, del cuneo e dell'anello per assicurarsi che la matrice sia ben adattata ai margini della cavità e sia a stretto contatto con il dente adiacente.

FINE





4831 HALO KIT - Matrici Original

2 anelli universali

25 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

1 pinzetta

1 pinza allarga-anello

4832 HALO INTRO KIT - Matrici Original

2 anelli universali

25 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

4833 HALO INTRO KIT - Matrici Firm Non-stick

2 anelli universali

20 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

4835 HALO MINI KIT - Matrici Original

2 anelli universali

5 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm

5 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

4834 HALO INTRO KIT - Matrici Firm

2 anelli universali

25 matrici di ciascuna dimensione

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm

25 cunei di ciascuna dimensione S, M, L

1 organizer HALO

HALO Matrici Original

Dimensione	50 pz	100 pz
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

HALO Cunei

Dimensione	100 pz
S	5042
M	5043
L	5044

HALO Matrici Firm

Dimensione	50 pz	100 pz
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—

HALO Anelli

Dimensione	1 pz	2 pz
Universal	5008	5009

HALO Matrici Firm Non-Stick

Dimensione	50 pz	100 pz
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—

5048 - Pinza per posizionare le matrici 1 pz



5047 - Pinza allarga-anello 1 pz

