


Instrucciones de uso

INICIO



1.

Seleccione una banda de matriz adecuada en función de la altura oclusogingival. Usando las pinzas, sujete la lengüeta de la banda matriz y dóblela según sea necesario, para luego colocarla interproximalmente con la superficie cóncava frente al diente a restaurar.

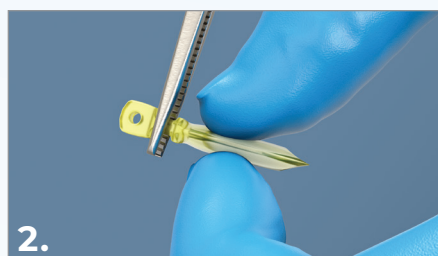


2.

Seleccione la cuña que mejor adapte la banda matriz con el área gingival de la preparación. Agarre la cuña con la pinza de algodón.



3.

Es posible que sea necesario aplicar una ligera presión con los dedos a la banda matriz para evitar que se desprenda durante la colocación de la cuña.

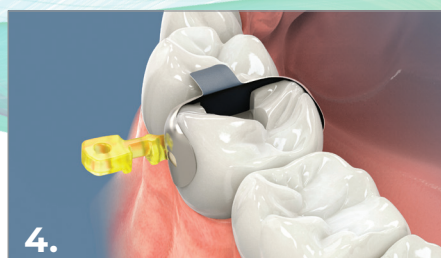

4.

Si es necesario, se puede utilizar una cuña adicional para proporcionar una mayor adaptación a la superficie gingival.



5.

Coloque el anillo Halo utilizando las pinzas Halo.



6.

El anillo debe colocarse lo más bajo posible con los extremos de los dientes del anillo sobre la cuña a cada lado del diente.



7.

Inspeccione la colocación de la banda matriz, la cuña y el anillo para asegurarse de que la banda matriz ha quedado bien adaptada a los márgenes de la superficie y que la banda esté en contacto íntimo con el diente adyacente.

FINAL





4831 HALO KIT - Bandas Original con instrumentos

2 x Anillos Universales

25 x cada tamaño Bandas matrices Originales

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm

25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande

1 x Carrusel dispensador

1 x Pinza

1 x Forceps



4832 HALO INTRO KIT - Bandas Original

2 x Anillos Universales

25 x cada tamaño Bandas matrices Originales

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm

25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande

1 x Carrusel dispensador

4833 HALO INTRO KIT - Bandas Firmes Antiadherentes

2 x Anillos Universales

20 x cada tamaño Bandas matrices Firmes Antiadherentes

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm

25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande

1 x Carrusel dispensador

4835 HALO MINI KIT - Bandas Original

2 x Anillos Universales

5 x cada tamaño Bandas matrices Originales

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm

5 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande

1 x Carrusel dispensador

4834 HALO INTRO KIT - Bandas Firmes

2 x Anillos Universales

25 x cada tamaño Bandas matrices Firmes

3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, y 7,5 mm

25 x cada tamaño Cuñas Pequeña, Mediana y Grande

1 x Carrusel dispensador

HALO Bandas Original



Tamaño	50 ud.	100 uds.
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

HALO - Cuñas



Tamaño	100 uds.
Pequeña	5042
Mediana	5043
Grande	5044

HALO Bandas Firmes



Tamaño	50 ud.	100 uds.
3,5 mm	5059	—
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	—

HALO - Anillos Nitinol



Tamaño	1 ud.	2 ud.
Universal	5008	5009

HALO - Bandas Firmes Antiadherentes



Tamaño	50 ud.	100 uds.
3,5 mm	5049	—
4,5 mm	5051	5052
5,5 mm	5053	5054
6,5 mm	5055	5056
7,5 mm	5057	—

5048 - HALO - Pinza 1 ud.



5047 - HALO - Forceps 1 ud.

