

EN

UltraEZ[™]

Disinfecting Gel

Product Description

UltraEZ[™] disinfectant gel is a unique, sustained release, 3% potassium iodine and 0.11% weight by weight fluoride ion, sticky viscous gel. UltraEZ gel is designed to be used in a custom fabricated tray, disposable tray, or prefilled disposable tray application.

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Deliver Forms(s)

- 1.2 ml delivery syringe
- Straight MAAT[®] Clear Tip with breakaway cap

Indications for Use/Intended Purpose

UltraEZ disinfectant gel provides a full-spectrum vanish for sensitive teeth, sealing dental areas vulnerable to exposure dentin and other areas where sensitivity is a concern. The product is used either by a dental professional in the office or provided to the patient for home treatment of dentin sensitivity.

Contraindications

- Not intended for use by pregnant or nursing women
- Not intended for patients who may swallow or aspirate tray
- Not intended for use on patients under the age of 6 without consultation of their primary care doctor
- For professionals or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultraeزند.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- If any problems occur, discontinue treatment and notify a dental professional.
- Keep away from heat and/or sunlight.
- Excess material at insertion and removal upon removal should be brushed off and rinsed. DO NOT swallow.

Stepwise Instructions

Use - Custom Tray / Aligner / UltraFit[™] Non-Pre-Filled Tray

- 1) Fabricate tray to meet patient's needs. If patient already has a custom whitening tray, UltraEZ gel can be loaded and used in that tray.
- 2) UltraEZ gel is dispensed in 1.2 ml unit dose syringes. A complete arch should use approximately 1/3 to 1/2 of the contents of a syringe. If using a custom tray or aligner to treat localized sensitivity, place gel in affected area(s) and a small amount in the molar region to hold tray in place.
- 3) The length of time and number of times tray is worn depends on patient's condition and the clinician's recommendation. Treatment times can range from 15 minutes to 1 hour or whatever the clinician deems appropriate.

Cleanup – Custom Tray / Aligner / UltraFit[™] Non-Pre-filled Tray

- 1) Immediately following any removal, patient should brush and rinse teeth with water to remove all remaining gel. DO NOT swallow solution during rinsing. Wash custom tray or aligner and store in a tray storage case. Dispose of UltraEZ tray. Fresh gel should be used with each application.

Storage and Disposal

Store according to outer package label.
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
www.ultraeزند.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraTraz™
Gel desensibilizzante

IT

Descrizione del prodotto

Il gel desensibilizzante UltraTraz™ è un gel unico, appiccicoso e viscoso, a lunga persistenza, al 3% di nitroglio di potassio e 0,11% in peso di ioni di fluoro. Il gel UltraTraz è progettato per essere utilizzato in una mascherina individuale in cucciaio monodose o cucciaio monodose precaricato.

Per tutti i prodotti descritti, è necessario leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Modalità di consegna

- Stringa di erogazione da 1,2 ml
- Puntali sterili e sigillati Straight Mask™ con cappuccio scartabile

Indicazioni per l'uso/Scopo previsto

Il gel UltraTraz desensibilizza forme tutti desensibili uno strato simile ad una pellicola, che sigilla i tubi dentinali della dentina esposta e altre aree in cui la sensibilità è un problema. Il prodotto viene utilizzato da un dentista in studio o fornito al paziente per il trattamento domiciliare della sensibilità dentinale.

Controindicazioni

- Non indicato per l'uso da parte di donne in gravidanza o in allattamento.
- Non indicato su pazienti che possono ingerire o aspirare.
- Non indicato per pazienti di età inferiore a 6 anni senza previa consultazione del pediatra.
- Per pazienti con allergie, fare riferimento al documento sugli allergeni presenti nel prodotto disponibile all'indirizzo www.ultratraz.com.
- Se si manifestano reazioni allergiche, lavare accuratamente con acqua la zona interessata e sottoporre il paziente all'assistenza di un medico.

Avvertenze e precauzioni

- In caso di problemi, interrompere il trattamento e informare un dentista.
- Tenere sempre al riparo da fonti di calore e/o dalla luce diretta del sole.
- Il materiale in eccesso all'inserimento e i residui presenti alla rimozione devono essere rimossi con una spatola e risciacuati. Non ingerire.

Procedura d'uso

- 1) Realizzare la mascherina secondo le esigenze del

paziente. Se il paziente ha già una mascherina per sbiancamento individuale, il gel UltraTraz può essere caricato e utilizzato in quella mascherina.

- 2) Il gel UltraTraz viene erogato in siringhe monodose da 1,2 ml. Per un'arcata completa occorre utilizzare approssimativamente da 1/3 a 1/2 del contenuto di una siringa. Se si usa una mascherina individuale o un alignatore per trattare la sensibilità locale, mettere il gel nell'area interessata e una piccola quantità nella regione molare per tenere il vassoio in posizione.
- 3) La durata e il numero di volte in cui il vassoio viene utilizzato dipende dalle condizioni del paziente e dalle raccomandazioni del medico. La durata del trattamento può variare da 15 minuti a 1 ora o comunque per il tempo che il medico ritenga opportuno.

Pulizia: mascherina individuale / alignatore / cucciaio UltraTraz non precaricato

- 1) Subito dopo la rimozione del vassoio, il paziente deve lavare e sciacquare i denti con acqua per rimuovere il gel rimanente. Non ingerire la soluzione durante il risciacquo. Lavare la mascherina individuale o l'alignatore e riporlo in una custodia per allinearli. Smaltire il cucciaio UltraTraz. Ad ogni applicazione deve essere utilizzato del gel nuovo.

Conservazione e smaltimento

- Conservare seguendo le indicazioni dell'etichetta esterna sulla confezione.
- Smaltire i rifiuti secondo le norme, linee guida e regolamentazioni locali.

Informazioni varie

- Segnalare eventuali gravi incidenti al produttore e alle autorità competenti.
- www.ultratraz.com / 1-800-552-2551 / 801-572-4200



UltraTrai

Deslursensis gel



DA



UltraTrai

Deslursensis gel

Produktbeskrivelse

UltraTrai™ deslursensisbende gel er en unik, klæbrig, viskøs gel med vedvarende frigivelse af 3 % kollumint og 0,1,17 % vægtsilikon. UltraTrai-gel er udviklet til at blive brugt i specialitetsmiljøer (skole, engangsskinner eller forlydte engangsskinner). For alle beskrevne produktet skal du sørge for omhyggeligt at læse og forstå samtlige vejledninger og altid oplyses om sikkerhedsstabilitædet før brug.

Levetidstimer

- 1-2 ml sprøjte
- Straight™ Gun™ Clar tip med hætte, der kan brækkes af

Indikationer/tilstgivet formål

UltraTrai deslursensisbende gel er en flimlignende lak til folsomme tænder, og foreslger detinturbulale og folsomme tænder omfatter andre områder, hvor folsomhed er et problem. Produktet bruges enten til dagligt personale på klinikken eller udlæres til patienten til hjemmebehandling af tandsensitivitet.

Kontraindikationer

- Ikke brugt til brug af gravide eller ammende kvinder.
- Ikke brugt til patienter, der kan synke eller aspirere skinner.
- Ikke brugt til brug på patienter under 6 år uden hjælp med deres primære praktiserende læge.
- For patienter eller brugere med allergiproblemer henvises til produktallergisk dokumentation, som findes på www.ultraTrai.com. Hvis der observeres en allergisk reaktion skyldes det eksponerede område grundigt med vand, og patienten skal konsultere sin læge.

Advarsel og forholdsregler

- Hvis der opstår problemer, skal behandlingen afbrydes og UltraTrai produktet skal kontaktes.
- Holdes altid væk fra varme og ellers sollys.
- Overskyndende materialer ved indstøbelse og rester ved færdigelse bør bortses af, og mundens skinner, MA IKKE sluges.

Trinvis vejledning

Anvendelse i specialfremstillet skinner/aligner/UltraTrai™ ikke-trykfuldt skinner

- Fremstil en skinner, der opfylder patientens behov. Hvis patienten allerede har en specialfremstillet blegekisk, kan UltraTrai-gel fylde i og anvendes i denne skinner.
- UltraTrai-gel dispenseres i doserprøjter på 1,2 ml. Til at lade læbs skal der bruges ca. 1/3 til 1/2 af indholdet i en sprøjte. Hvis du bruger en specialfremstillet skinner eller aligner til behandling af lokalt folsomhed, skal gelen appliceres på de berørte områder og en lille mængde i molarområdet for at holde skinner på plads.
- Varigheden og antallet af behandlinger skal bestemmes af lægen, for den er dit, afhænger af patientens symptomer og behandlingens anbefalinger. Behandlingsiderne kan variere fra 15 minutter til 1 time, eller hvad behandleren finder passende.

Rennging – specialfremstillet skinner/aligner/UltraTrai™ ikke-trykfuldt skinner

- Umiddelbart efter fjernelse af skinnerne bør patienten børste og skyll tænder med vand for at fjerne al resterende gel. SLUG IKKE opløsningen under skylning. Rennging af specialfremstillede skinner eller aligner, og opbevar dem i en opbevaringskæbe. Bortskaf UltraTrai-skinner. Der skal bruges frisk gel til hver applikation.

Opbevaring og bortskaffelse

Opbevares i henhold til den dyre emballages etiket. Bortskaf altid i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse oplysninger

Rapporter enhver alvorlig hændelse til producenten og den kompetente myndighed.

www.ultraTraid.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200



Десигнирајте го



Описание на продукта

UltraEz™ десигнирајќиот гел е универсален, с производствено особеноважно, 39% квалитет на гел, 0,11% тегловити флуориди, кои, постојат, високот гел, UltraEz гел е предвиден за употреба во кокетта по порочка, кокетта за едноратна употреба или предвидено за користење кокетта за едноратна употреба.

За вклучување на производот пред употреба внимателно прочитајте и разберете вашите институции и содржината на информацијата за безбедност (SDS).

Форми на дроства

- 12ml стирпидов за наношење
- Straight Max™ за користење со алапка

Показани за употреба/Предназначење

Десигнирајќиот UltraEz гел е универсален филмо-покривач за чувствителни збоји, алапки, денитивите, туби на откритијата и други објекти, кокетта чувствително е проблем.

Продуктот се използва или за збојување на кабината, или се предвиден на пациентот за дополнително лечење на чувствителноста на дентина.

Противопоказания

- Не е предначинан за употреба об обремени или болни збоји.
- Не е предначинан за пациенти, кокетта можат да погнати или аспирират кокетта.
- Не е предначинан за употреба при пациенти со збоји, кокетта наместо брзо конституција е тешки лезии кокетта.
- За пациенти или потребители с асерия вклучуваат кокетта, кокетта се предвидени на www.ultraeaz.com.
- Ако се набљудува алергична реакција, испакнете пакетококетта збоји објект, и го искористете пакетококетта да се користат с лекари се.

Предупрежување и предпазни мерки

- Ако възникнат никакви проблеми, прекратете лечењето и употребувајте збојуваач.
- Внимајте постојат ли погнати или стичања со збоји.
- Измијтејте материјал при поставење и отстранувајте сите отстрануваачи третира да се исчистат и исплакани со вода.

Поегнати институции

Употреба-Кокетта по порочка / Подрнател /

Нездравена предвастрелно кокетта UltraFit™

- 1) Изработете кокетта, кокетта да отговара на нуждите на пациентот. Ако пациентите веме има изработена по порочка кокетта за збојување, UltraEz гел може да се задржи и използва во таки кокетта.
- 2) UltraEz гел се задржува во 12ml стирпидов за едноратна збој. За целта збојта треба да се използва употребител 1/3 до 1/2 от содржината на стирпидов. Ако използвате кокетта по порочка или подрнател за лечење на локализирана чувствителност, постојат гел за вклучувањата објект(и) и малко количество в кокетта објект, за да задржите кокетта, на предвиденост.
- 3) Можете ли да користите збоји и брзи на носенето на кокетта зависат от состојбата на кокетта и препораката на лекари. Времето за лечење може да варира от 15 минути до 1 час или каков медицински специјалист смета за порочко.

Почистање - Кокетта по порочка / Подрнател / Нездравена предвастрелно кокетта UltraFit

- 1) Беднага след отстранувањето на кокетта, пакувањето треба да измие и исплакати збоји се збоји, за отстранување вклучувајте отпати от збоји. Не постојат разлика по време на измивањето. Измијте кокетта по порочка или подрнателите и скривањето е купин за скривањето на кокетта. Измивањето кокетта UltraFit. При вско приложоение треба да се използва претходен гел.

Скривање и измивање

Скривањето след информирањето на етикета на вклучувањата објект.

Измивањето отпаѓање е соодветно со местите погнати, измивање и раздирати.

Общ информација

Скривањето за вско сериозен инцидент на производителите или на компетитиони групи.

www.ultraeaz.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraZ[®]
Desensibilisierungsgel

Produkbeschreibung

Das Desensibilisierungsgel UltraZ[®] ist ein eintragendes, halbfestes, viskoses Gel mit verzögerter Freisetzung mit 3 % Kallumatrium und 0,11 Gewichtsprozent Fluoridionen. Das UltraZ Gel ist zur Verwendung in einer individuell angefertigten Schiene, einer Einmal- oder vorbefüllten Einwegschiene vorgesehen.

Für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung sorgfältig alle Anleitungen und Sicherheitsdatenblätter lesen.

Lieferformen

- Spritze (1,2 ml)
- Straight-Max[®] transparente Spitze mit Kappe zum Abbrechen

Indikationen/Verwendungszweck

Das Desensibilisierungsgel UltraZ[®] überzieht empfindliche Zähne mit einem filmähnlichen Lack, der die Dentinoberfläche abisoliert und Dentin- und andere Bereiche versiegelt, deren Empfindlichkeit Probleme bereitet. Das Produkt wird entweder vom Zahnarzt in der Praxis verwendet oder dem Patienten zur häuslichen Behandlung von Dentinempfindlichkeit zur Verfügung gestellt.

Kontraindikationen

- Nicht zur Anwendung durch schwangere oder stillende Frauen bestimmt.
- Nicht für Patienten bestimmt, welche die Schiene nicht tragen oder aspirieren könnten.
- Vor der Anwendung bei Patienten über 6 Jahren ist Rücksprache mit dem Hausarzt zu nehmen.
- Bei Patienten oder Benutzern mit Verdacht auf Allergien finden Sie Informationen im Allergienotfallkürzel unter www.ultraZ.com.
- Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exportierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Mund ausspült.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Treten Probleme auf, ist die Behandlung abzubrechen und ein Zahnarzt zu kontaktieren.
- Stets von Hitze und Sonnenlicht fernhalten.
- Überschüssiges Material beim Einsetzen und Rückziehen der Schiene zum Entfernen sollten abgebürstet und abgespült werden.
- NICHT verschlucken.

Schrittweise Anleitung

Verwendung – Individuelle Schiene/Aligner/ UltraZ[®] (nicht vorbefüllte Schiene)

- 1) Bereiten Sie die Schiene für den Patienten vor.
1. Verfügt der Patient bereits über eine individuelle Zahnlängungsschiene, kann UltraZ Gel mit dieser Schiene verwendet werden.
- 2) UltraZ Gel wird in Spritzen mit der Dosis von 1,2 ml abgemessen. Ein vollständiger Bogen sollte ungefähr 1/3 bis 1/2 einer Patientenschiene vertragen. Wird zur Behandlung einer lokalen Empfindlichkeit eine individuelle Schiene/Aligner verwendet, ist Gel in die betroffenen Bereiche einzubringen, sowie eine kleine Menge in den Molarenbereich, um die Schiene in Position zu halten.
- 3) Die Dauer und Häufigkeit des Tragens der Schiene hängt vom Zustand des Patienten und der Empfehlung des Arztes ab.
- 4) Die Behandlungsdzeit kann von 15 Minuten bis zu einer Stunde betragen bzw. nach Ermessen des Arztes.

Reinigung: Individuelle Schiene/Aligner/ UltraZ[®] (nicht vorbefüllte Schiene)

- 1) Unmittelbar nach Entfernen der Schiene sollte der Patient sich die Zähne putzen und mit Wasser spülen, um sämtliches restliches Gel zu entfernen. Beim Spülen KEINE Lösung schlucken. Die individuelle Schiene des Aligner soll zu waschen und im entsprechenden Aufbewahrungsbehälter aufzubewahren. Die UltraZ-Schiene ist zu entsorgen. Bei jeder Anwendung ist frisches Gel zu verwenden.

Lagerung und Entsorgung

Gemäß den Angaben auf der äußeren Umhüllung lagern.

Abfall ist gemäß örtlichen Vorschriften, Richtlinien und Bestimmungen zu entsorgen.

Stonite Aligner

Alle schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und zuständigen Behörden zu melden.

www.ultraZ.com / +1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraZin™
Gel desensibilizante

ES

Descripción del producto

El gel desensibilizante UltraZin™ es un gel único, Adhesivo, viscoso, de liberación sostenida, con nitrato de potasio al 3% y con ion fluoruro al 0.11% en peso por peso. El gel UltraZin™ está diseñado para cubrir la dentadura o dental dental dental dental dental dental dental desechable o aplicado en cubiertas dentales dental desechable preaplicado.

Para todos los productos descriptos, le atentamente y comprenda las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usarlos.

Presentación

- Jeringa de suministro de 1.2 ml
- Puntal transparente Straight Max™ con botón separable

Indicaciones de uso/Fin preventivo

El gel desensibilizante UltraZin™ proporciona un barriz en forma de película para cubrir los dientes, sellando los túbulos dentinarios de la dentina expuesta y otras áreas donde la sensibilidad es un problema. El producto es utilizado, bien por un profesional dental en consultorio o se lo facilita al paciente al paciente al tratamiento de la sensibilidad dentinaria en el hogar

Contraindicaciones

- No está diseñado para que lo utilicen mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- No está diseñado para pacientes que puedan tragar o aspirar el cubeta o fúral dental.
- No está diseñado para que lo usen pacientes menores de 6 años sin supervisión o a pediatra (En España: No es visto por el pediatra , no por el médico de familia).
- Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultra-zin.com.
- Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones

- Si ocurre alguna problema, interrumpa el tratamiento y notifique a un profesional dental. Manténgalo siempre alejado del calor y la luz solar.
- Se debe cepillar y enjuagar el exceso de material en la inserción y los residuos al

retirarlo. No lo trague.

Instrucciones paso a paso

Uso: cubeta dental personalizada/alineador/ cubeta UltraZin™ no precardado

- 1) Fabrique la cubeta dental para satisfacer las necesidades del paciente. Si el paciente ya tiene una cubeta de blanqueamiento personalizado, el gel UltraZin™ se puede cargar y usar en esa cubeta.
- 2) El gel UltraZin™ se dispensa en jeringas monodosis de 1.2 ml. Para una arcada completa debe usarse aproximadamente de 1/3 a 1/2 del contenido de una jeringa. Si usa una cubeta personalizada o un alineador para tratar la sensibilidad labiodental, coloque gel en las áreas afectadas y una pequeña cantidad en la región molar para mantener la cubeta en su lugar.
- 3) El tiempo y la cantidad de veces que se usa la cubeta depende del estado del paciente y de la recomendación del odontólogo. Los tiempos de tratamiento pueden oscilar entre 15 minutos y 1 hora o lo que el odontólogo considere apropiado.

Limpieza: cubeta personalizada /alineador/ cubeta UltraZin™ no precardado

- 1) Después de cada uso debe de retirar la cubeta o la fúral el paciente debe cepillarse y enjuagarse los dientes con agua para eliminar todo el gel remanente. No trague la solución durante el enjuague. Lave la cubeta personalizada o el alineador y guárdelo en el estuche de almacenamiento para el mismo. Deseché la cubeta UltraZin™. Se debe usar gel nuevo con cada aplicación.

Almacenamiento y cubetas

- Almacene de acuerdo con la etiqueta exterior del empaque
- Descarte los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.
- Informe a cualquier distribuidor o fabricante y a la autoridad competente.

www.ultra-zin.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

[illegible]

Ultraz[®]

Gel za smanjenje osjetljivosti

Opis proizvoda

Ultraz[®]™ gel za desenzibilizaciju jedinstven je, s ljepljivim, viskoznom gelom s produljenim otpuštanjem, 3% kalijevog nitrata i 0,11% masenog ulja fluoridnog ione. Ultraz[®] gel je dizajniran za uporabu u prilogodenoj prozvedenoj ladicu, ladicu za jednokratnu upotrebu ili prethodno nepokrupnjaku za jednokratnu upotrebu.

Za sve opisane procedure pažljivo pratite i proučite sve upute i sigurnosno-tehničke podatke prije uporabe.

Oblici isporuke

- potpuna Sprica od 1,2 ml
- Straight Mac™ prozirni vrh s odvojenim čeljustima

Indikacije za uporabu/namenu

Ultraz[®] gel za desenzibilizaciju nanosi lak nalik filmu za osjetljive zubne, brtve dentinske tubule izloženog dentina i druga područja gdje je su tibi zubno osjetljivi. Proizvod koristi za stomatolog u ordinaciji ili daleko pacijentu za koji je potrebna osjetljivosti na dentin.

Kontraindikacije

- Nije namijenjeno za trudnice ili dojilje.
- Ne preporučuje pacijentima koji mogu biti naglašeni ili udiscati saspaljadu.
- Pacijenti ili korisnike s alergijama pročitajte dokument s informacijama o alergijama na www.ultradent.com. U slučaju pojave alergijske reakcije, izloženo područje temeljito isperite vodom i neka se pacijent posavjetuje sa svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

- Ako dode do bilo kakvih problema, prekinite liječenje i obavijestite stomatologa.
- Uvijek držite daleko od toplote i/ili sunčeve svjetlosti.
- Viskaz materijala pri umetanju i ostatak nakon ukidanja treba očistiti i isprati.

NE gubite

Upute za postupak

Korištenje – prilogodena ladicica / ravnlav / Ultraz[®]U predujpnjena ladicica

- 1) Napravite ladicicu kako biste zadovoljili potrebe pacijenta. Ako pacijent već ima prilogodenu ladicicu za izbjeljivanje, Ultraz[®] gel se može staviti i koristiti u toj ladicu.
- 2) Ultraz[®] gel se izdaje u štrcaljima za jedinstvenu dozu od 1,2 ml. Potrebno je koristiti približno 1/3 do 2/3 sadržaja Sprice. Ako koristite prilogodenu ladicicu ili poravnavači za liječenje lokalizirane osjetljivosti, stavite gel na zahvaćeno područje i i malu količinu u maleno područje kako biste držali ladicicu na mjestu.
- 3) Trajanje i vrijeme nošenja pladnja ovisi o stanju pacijenta i preporuci liječnika. Vrijeme liječenja može biti od 15 minuta do 1 sata ili što dugo liječnik smatra prikladnim.

Čišćenje – Prilogodena ladicica / ravnlav / Ultraz[®]U predujpnjena ladicica

- 1) Odmah nakon ukidanja ladicice, pacijent bi trebao oprati i isprati zub vodom kako bi ublažio svu preostali gel. NE gubite otpotinu, tijekom ispiranja. Operite prilogodenu ladicicu ili poravnavači i spremite u spremnik za ladicu. Odlaganje Ultraz[®] ladicice, Svijeli gel treba koristiti pri svakom nanošenju.

Skladištenje i odlaganje

Čuvati u skladu s napjevicom vanjskog pakiranja. Održavati odmah prema lokalnim pravilima, smjernicama i propisima.

Statistične informacije

Prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu svaki ozbiljan incident

www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200



UltraZir
Gel desinfectibilisant



FR

Description du produit

Le gel desinfectibilisant UltraZir[®] est un gel unique, incolore et visqueux, à libération prolongée, à 3 % de nitrate de potassium et 0,11 % en poids d'ions fluorure. Le gel UltraZir est conçu pour être utilisé dans une gouttière habituelle sur mesure, une gouttière préfabriquée ou pour une application de gouttière flexible préchargée.

Pour tous les produits dentaires, lisez attentivement et assurez-vous de bien comprendre toutes les instructions et informations de la FDS avant utilisation.

Type(s) d'application

- Séringage d'application de 1,2 ml
- Emboîtement Straight Mac[®] avec capsule à bague

Indications d'utilisation/Utilisation prévue

Le gel desinfectibilisant UltraZir fournit un vernis de type film pour les dents sensibles, recouvre les tubuli dentinaires de la dentine exposée et d'autres zones où la sensibilité est un problème. Le produit est utilisé soit par un professionnel dentaire au cabinet, soit fourni au patient pour le traitement à domicile de la sensibilité dentinaire.

Contre-indications

- N'est pas destiné à une utilisation par les femmes enceintes ou allaitantes.
- N'est pas destiné à une utilisation par les patients adultes ou aspirant la cigarette.
- N'est pas destiné à une utilisation sur des patients de moins de 6 ans sans consultation de leur médecin traitant.

Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergies du produit disponible sur www.ultraZir.com. Si une réaction allergique est observée, arrêtez immédiatement l'utilisation, exposez à l'eau et demandez au patient de consulter son médecin.

rinçés. NE PAS avaler.

Instructions par étapes

Utilisation : gouttière sur mesure/gouttière standard/gouttière UltraZir[®] non préchargée

- 1) Fabriquez la gouttière pour répondre aux besoins du patient. Si le patient a déjà une gouttière de blanchiment sur mesure, le gel UltraZir peut être chargé et utilisé dans cette gouttière.
- 2) Le gel UltraZir est distribué dans des seringues à contenu d'application de 1,2 ml. Une capsule complète doit être utilisée environ un tiers à la moitié du contenu d'une seringue. Si vous utilisez une gouttière standard ou une gouttière faite sur mesure pour traiter la sensibilité localisée, appliquez du gel dans les zones affectées et une petite quantité dans la région molaire pour maintenir la gouttière en place.
- 3) La durée et le nombre de fois que la gouttière est portée dépendent de l'état du patient et de la recommandation du clinicien. La durée du traitement peut aller de 15 minutes à 1 heure ou selon ce que le clinicien juge approprié.

Nettoyage : gouttière sur mesure/gouttière standard/gouttière UltraZir[®] non préchargée

Immédiatement après le retrait de la gouttière, le patient doit se rincer et se brosser les dents avec de l'eau pour éliminer tout le gel restant. NE PAS avaler la solution pendant le rinçage. Lavez la gouttière standard ou la gouttière sur mesure et rangez-la dans un étui de rangement pour gouttière. Jetez la gouttière UltraZir. Tout le gels doit être utilisé à chaque application.

Stockage et élimination

Stockez conformément aux indications présentes sur l'étiquette de l'emballage original.

Éliminez les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses

Signalate tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.

www.ultraZir.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraEZ™
Gel Desensibilizante

Descrição produto

O gel desensibilizante UltraEZ™ é um gel adesivo viscoso único, de libertação controlada, com 3% de nitrato de potássio e 10% de fluoreto 0,11% peso por peso. O gel UltraEZ foi desenvolvido para ser usado numa moldreira personalizada descartável ou aplicação numa moldreira desmontável pré-céa.

Para todos os produtos desortados, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações antes de usar este produto.

Formas de aplicação

- Seringa de aplicação de 1,2 ml
- Ponta transporta Straight Mac™ com Tampa removível

Indicações de utilização/Finalidade prevista

O gel desensibilizante UltraEZ fornece um verniz semelhante a um filme para dentes sensíveis, reduzindo os efeitos das várias causas da sensibilidade e atua e outras áreas onde a sensibilidade é uma preocupação. O produto é utilizado por profissionais dentários no consultório ou entregue ao paciente para o tratamento domiciliário da sensibilidade dentária.

Contraindicações

- Não se destina à utilização em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar.
- Não se destina a pacientes que podem engolir ou aspirar a moldreira.
- Não se destina ao uso em pacientes com menos de 6 anos sem consultar o seu médico assistente.

Para o uso de utilizadores com problemas de alergia, consulte o documento alérgico do produto disponível em www.ultraident.com.

Se for observada uma reação alérgica, lave bem a área afetada com água e peça ao seu médico para consultar o seu médico.

Advertências e Precauções

- Se ocorrer algum problema, interrompa o tratamento e consulte um dentista.
- Manter sempre afastado do calor e/ou luz solar.
- O material em excesso na injeção e os resíduos após a remoção devem ser retirados com uma escova e lavados. Não engolir.

Instruções passo a passo

UltraEZ - Moldreira personalizada / Alinhador / Moldreira não pré-céa UltraEZ™

- 1) Crie a moldreira de acordo com as necessidades do paciente. Se o paciente já tiver uma moldreira de branqueamento personalizada, o gel UltraEZ pode ser carregado e usado numa moldreira.
- 2) O gel UltraEZ é aplicado com seringas de dose unitária de 1,2 mL. Um arco completo deve usar aproximadamente 1/3 a 1/2 do conteúdo de uma seringa. Se estiver a utilizar uma moldreira ou alinhador personalizado para tratar a sensibilidade localizada, coloque o gel na área(s) afetada(s) e uma pequena quantidade na região molar para segurar a moldreira no lugar.
- 3) A duração e o número de vezes que a moldreira é utilizada depende das condições do paciente e da recomendação do médico. Os tempos de tratamento podem variar de 15 minutos hora ou o que o médico considerar apropriado.

Limpeza - Moldreira personalizada / Alinhador / Moldreira não pré-céa UltraEZ

- 1) Imediatamente a seguir à remoção da moldreira o paciente deve escovar e lavar os dentes com água para remover todo o gel restante. NÃO utilizar uma solução durante a aplicação da moldreira ou alinhador personalizado e guarde numa caixa para guardar moldreiras. Descarte a moldreira UltraEZ. Em cada aplicação deve ser utilizado gel fresco.

Armazenamento e eliminação

Armazene conforme o rótulo externo da embalagem. Elimine os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações Diversas

© 2014 UltraDent. Qualquer incidente grave ao fabricante e à autoridade competente.

www.ultraident.com | 1-800-552-5512 | 801-572-4200

UltraZit
Desensibiliseringsgel

Produktbeskrivelse

UltraZit[®] desensibiliserende gel er en unik, slow release, flydende væske, visuelt gel med 3% kalciumlaktat og 0,1% vekti% fluorid. UltraZit-gel er designet for at bruges i en specialsæt tilpasningsskinner, engangsskinner eller håndfødslykke engangs applikatorer/kimler.

For alle patienter som er beskrevet, må du luse nye og forstå alle instruktioner og sikkerhedsdata/information før brug.

Leveringsskema(er)

- 1,2 ml applikatorspyrøtte
- Straight MAC[®] Kap spiss med afvejrbar top

Indikationer for bruk/tilrettet formål

UltraZit desensibiliserende gel gir en forenligende effekt for følgende tænder, foreslået dentinitubuli på eksponert dentin og andre områder der sensitivitet er et problem. Produktet brukes enten som en tannlege på tamlegeteaker eller leveres til pasienten for hjemmebehandling av desensitivitet.

Kontraindikasjoner

- Ikke beregnet på gravide eller ammende kvinner.
- Ikke beregnet på pasienter som kan svelge eller suge på skinnen.
- Ikke beregnet på pasienter under 6 år uten samråd med lege / rimorber helsehjelpen.
- For pasienter eller brukere med allergier/problemer, se produktallergidokumentet som du finner på www.ultraزند.com. Hvis det oppstår en allergisk reaksjon, stopp det eksponerte området grunnet med vann og pasienten bør å kontakte sin lege.

Advarsler og forholdsregler

- Hvis det oppstår problemer, avslutt behandlingen og kontakt en tannlege.
- Unngå alltid varme og/eller sollys.
- Overvåk de lokale ved irritasjon og rester ved fjerning bør tørstas av og skylles. MÅ IKKE svelges.

Tinnvisne instruksjoner

Bruk - tilpasning skinner / justeringslinje / UltraFit[™] ikke-forhåndstylt skinne

- 1) Skinneren er tilpasset pasientens behov.
- Hvis pasienten allerede har en individuell blekeskinn, kan UltraZit[®]-gel legges i og brukes i den skinnen.
- 2) UltraZit[®] gel leveres i 1,2 ml enhetsdoseringer i form av komplett tannbue eller buke omtrent 1/3 til 1/2 av innholdet i en spytt. Hvis du bruker en tilpasning skinne eller justeringslinje for å behandle lokal sensitivitet, plasser gele i det eller de berørte områdene og en liten mengde i molarområdet for å holde skinnen på plass.
- 3) Hvor lang tid og antall ganger skinnen skal brukes, avhengig av pasientens tilstand og kliniskens anbefaling. Behandlingstiden kan variere fra 15 minutter til i tide eller du behandler finner passende.

Opprydding - tilpasning skinne / reguleringskinn (aligner) / UltraFit ikke-forhåndstylt skinne

- 1) Umiddelbart etter at skinnen er fjernet, bør pasienten børste og skylle tennene med vann for å fjerne all gjenværende gel. IKKE svelg oppløsningen under skylking. Vask individuelt tilpasset skinne eller aligner og oppbevare i en oppløsningskapsel. Katt UltraZit-skinnen. Første gel skal brukes ved hver påfylling.

Lagring og kassering

Oppbevares i henhold til ytre pakningssekkett. Kast avfall i henhold til lokale regler, rettningslinjer og forskrifter.

Diverse opplysninger

Rapporter en alvorlig hendelse til produsenten og fagnyttendene på
www.ultraزند.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraTraz[®]
Gel snižující citlivost

CS

Popis produktu

Gel snižující citlivost UltraTraz[®] je unikátní, lepkavý, viskózní gel s postupným uvolňováním obsahující 0,3% disocinovaného anestetika o 0,11% hmotnostních fluorurovaného iontu. Gel UltraTraz je určen k použití v těchto aplikacích: i individuální vyroběním nosičů, v jednorázovém nosiči nebo předpřipraveném jednorázovém nosiči.

V případě posypání produktu si před použitím pečlivě přečtěte všechny pokyny a informace o bezpečnosti dle uživatele se, že jste je při porozumění.

Forma (formy) dodání

- Aplikátři stříkačká 1,2 ml
- Průhledná koncovka Straight Macs[®] s odměrným měřítkem

Indikace pro použití / určený účel

Gel snižující citlivost UltraTraz[®] vytvoří jemný lepkavý film na cílových zubech, který usníte dentinové kavitě a vložení dentinu a dalších oblastech, kde kavitě představuje problem. Výrobek se používá buď v ordinacích stomatologických nebo se poskytné pacientovi k domácímu ošetření citlivosti dentinu.

Kontraindikace

- Není určen k použití u těchtoných nebo kojících žen
- Není určen pro pacienty, kteří by mohli nosič spojitelnou nebo vchodit.
- Není určen k použití u pacientů mladších 6 let bez konzultace s lékařem poskytnutím příslušného lékaře.
- V případě pacientů nebo uživatele s alergiemi si přečtěte dokument popisující alergie v produktech, který je k dispozici na adrese www.ultratraz.com. Pokud dle alergické reakce pacienta začne mít nosiči dříve vloženo u požadujícího pacienta, aby se poradil se svým lékařem.

Varování a bezpečnostní opatření

- V případě jakýchkoli problémů lečbu ukončte a informujte profesionálního stomatologa. Vždy vyhledejte mimo jiné otřepé tablety a/nebo slunečního záření.

- Přetřepání materiálu při aplikaci a bžly materiálu po odstranění odstraně kartačkám na zub a vypláchněte. NEPOUŽÍTE.

Pokyny krok za krokem

Použití – Individuální vyroběný nosič / Rozsvět / Nepředpřipravený nosič UltraTraz[®]

- 1) Vyrobně nosič splňující individuální potřeby pacienta. Pokud pacient má již individuálně vyrobený bílý nosič, gel UltraTraz se může aplikovat pomocí tohoto nosiče.
- 2) Gel UltraTraz je dlekován v dvířkách stříkačkových aplikátorů jednotlivou dvířkou 1,2 ml. Na celou řadu zubů se může spotřebovat až 1/3 až 1/2 obsahu stříkačky. Pokud k lečbě lokalizované citlivosti použijete individuálně vyrobený nosič, nosiče rozsvět, naneste gel do postýhových oblastech a malé množství do oblastí stolků, aby se nosič neudržel na místě.
- 3) Délka času a počet aplikací nosiče závisí na stavu pacienta a doporučení lékaře. Doba lečby se může pohybovat od 15 minut do 1 hodiny nebo jinak, pokud k lečbě používáte za vhodné.

Čištění – Individuální vyroběný nosič / rozsvět / nepředpřipravený nosič UltraTraz[®]

- 1) Ihned po sejmnutí nosiče a při samotném vyčištění zubů kartačkám a vypláchnutí, aby odstraně nosiče z povrchu zubů. Při vypláchnutí NEPOUŽÍTE. Individuálně vyroběný nosič nebo roztavka umístě u zubele je do pouzdra pro uložení nosiče. Nosič UltraTraz kavitizuje. Při každé aplikaci použijte čerstvý gel.

Skladování a likvidace

Uchovávejte podle etikety na vnitřním obalu. Odpaď zlikvidujte podle místních pravidel, pokynů a předpisů.

Řízně informace

Obraťte výrobce a příslušného úřadu všechny záležitosti týkající se výrobce.
www.ultratraz.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

UltraZee®
Desensibiliserende gel

productomschrijving

UltraZee® desensibiliserende gel is een unieke, wateroplosbare viscouse gel met 3% kaliumnitraat en 0,11 gewichtsprocent fluoride-ionen met aanhoudende afgifte. UltraZee® is ontworpen om te worden gebruikt op een naar maatschappelijke, wegevoerbare of voorgevulde wegveerbuigel, als voor alle beschreven producten alle instructies van de gegevens op het SDS zorgvuldig doorlezen worden en zorg dat u ze begrijpt.

oefeningssamenstelling(en)

- 1,2 ml injectiepuist
- Straight Mac® Clear Tip met afneembare dop

indicaties voor gebruik/beoogde doel

UltraZee desensibiliserende gel biedt een filmtuchterms voor gevoelige tanden, die de dentinale blootstelling van de wortels in andere plaatsen waar gevoeligheid een probleem is, afscheidt. Het product wordt gebruikt door een tandarts in de praktijk of wordt aan de patiënt versprekt voor thuisbehandeling van dentinegevoeligheid.

Contra-Indicaties

- Niet bedoeld voor gebruik door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
- Niet bedoeld voor patiënten die de gebruiksaanwijzing niet kunnen inslikken of opzuigen.
- Niet bedoeld voor gebruik bij patiënten jonger dan 6 jaar, zonder overleg met hun ouders.

Voor patiënten of gebruikers met allergische reacties, raadpleeg het document over allergene producten op www.ultratrend.com. Als er een allergische reactie wordt waargenomen, spoel dan de blootgestelde zone grondig met water en laat de patient haar/zijn arts raadplegen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Als er problemen optreden, stop dan met de behandeling en breng een tandarts op de hoogte.
- Altijd uit de buurt van warmte en/of zonlicht houden.
- Gebruik materiaal bij het innemen en resten bij het verwijderen, moeten worden weggeborsteld en gespoeld. NIET doorslikken.

toepassingswijze instructies

Gebruik - Aangepaste beugel / Uittreijner / UltraZee® niet-voorgevulde beugel

- 1) Maak een afspraak met de vertegenwoordiger van de behoeften van de patiënt. Wanneer de patiënt aan een aangepaste bleekbeugel heeft, kan UltraZee® in die beugel geplaatst en gebruikt worden.
- 2) UltraZee® gel wordt met injectiepunten verspreid in dosissen van 1,2 ml. Een volledige boog zou ongeveer 1/3 tot 1/2 van de afstand van een spuit monster gebruiken. Wanneer u er op moet maatschappelijke buigel of uittreijner gebouwd op plaatselijke gevoeligheid te behandelen, plaats de gel dan in het (de betreffende gebieden) en een kleine hoeveelheid ter hoogte van de kiezen, om de beugel op zijn plaats te houden.
- 3) De duur en het aantal keren dat de beugel gedragen wordt, is afhankelijk van de toestand van de patiënt en de aanbeveling van de arts. De behandelingscycli kunnen variëren van 15 minuten tot 1 uur of wat de arts geeft aan.

Opruimen - Aangepaste beugel / Uittreijner / UltraZee® niet-voorgevulde beugel

- 1) Omiddelmatig na het verwijderen van de beugel, verwijder de patiënt van de beugel en spoelen met water om alles resterende geel te verwijderen. Slak de oplossing NIET droog tijdens het spoelen. Was een op maat gemaakte beugel of uittreijner en bewaar in een openbepertu voor beugels. Gooi de UltraZee® beugel weg. Bij elke toepassing moet verse gel worden gebruikt.


Opslag en verwijdering

Bewaar het product volgens de informatie op het etiket dat u vindt op de buitenverpakking. Gooi afval weg volgens de lokale regels, richtlijnen en voorschriften.

Overige informatie

Medeik het eerste indicant van de fabrikant en aan de bevestigde autoriteit.

www.ultratrend.com
1-800-552-2512 /
501-572-4200

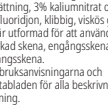

UltraEZ[®]
Densibiliserande gel



Produktbeskrivning

UltraEZ[®] densibiliserande gel är en unik, droppröd färglösning, 3% kalciumnitrat och 0,11 procent fyllnadsfyllnads, klibbig, viskös gel. UltraEZ[®] gel är utformad för att användas i en specialiserad sken, engångssken eller för flytande engångssken. Såsom igenom bruskavsnittningarna och skenstabilitetstabellen för alla beskrivna produkter för användning.

Levansförmåga

- 1,2 ml i en engångsskena
- Straight Max[®] kan spås med avbytligt lock

Indikationer för användning/avsett syfte

UltraEZ[®] densibiliserande gel ger ett filmliknande lag för kängsala tand, tätning av dentinala ubuli av exponerat dentin och andra områden där kängsala är ett problem. Produkten används i en engångsskena för tandklinik eller i ett allsidigt tandklinik. Den används i hemmet i dentalklinik.

Kontraindikationer

- Inte avsett att användas av gravida eller ammande kvinnor.
- Inte avsett för patienter som kan svälja eller inhalera skenen.
- Inte avsett för patienter under 6 år utan samråd med sin primäravdelning.

Beakta: www.ultraeatz.com för att se dokumentation om produktutgåvor för patienter eller användare med allergier. Om en allergisk reaktion observeras, skölj det exponerade området grundligt med vatten och uppmuna patienten att konsultera sin läkare.

Förvaring och försiktighetsåtgärder

- Om några problem uppstår, avbryt behandlingen med medlen och tändkålen.
- Håll alltid botten från värme och/eller solljus.
- Översikt av material vid insättning och rester vid tagning bör bortas bort och sköljas. Svälj INTE.

instruktioner för steg

Användning – Anpassad skena / Justerare / UltraEZ[®] icke-förflytt skena

- 1) Berör skenan för att mota patientens behållare. Om patienten redan har en Anpassad brenningskänna kan UltraEZ[®] gel fyllas i och användas i den skena.
- 2) UltraEZ[®] gel levereras i 1,2 ml enhetsdosform. En komplett bäge bör användas ungefär 1/3 till 1/2 av innehållet i en spruta. Om du använder en Anpassad skena till justerare för att behandla lokal kängsala, placera gelen i de drabbade områdena och en liten mängd i molarområdet för att hålla skenan på plats.
- 3) Längd på tid och antal gånger skenan bärs beror på patientens tillstånd och läkarens rekommendation. Behandlingsdosen kan variera från 15 minuter till 1 timme eller var tandläkaren anser lämpligt.

Rengöring – Anpassad skena / Justerare / UltraEZ[®] icke-förflytt skena

- 1) Omedelbart efter borttagning av skenan ska patienten borsta och skölja tandkålen med vatten för att ta bort all återstående gel. Svälj INTE lösningen under sköljningen. Tvätta Anpassad skena eller justerare och försiktighetsåtgärder. Kasserat UltraEZ[®] skena. Färska gel bör användas vid varje applikation.

Förvaring och avfallshantering

Förvaras enligt utsläppspackningens etikett. Använda enheter enligt lokala regler, riktlinjer och förfordringar.

Diverse information

Allmän en eventuell allvarig händelse till tillverkaren och den behöriga myndigheten. www.ultraeatz.com / +1 800 552 5512 / +1 801 572 4200

[illegible]

ET

UltraZTM

Tundikast vajadusel geel

Tootekirjeldus

Tundikasti vandenähge geel UltraZTM on unilinaalne 3% kaaliumitriaktsülaadiga ja 0,11 nasoprotsentriline fluoriidionisülaadiga kleepuv kosmeetne geel. UltraZTM geeli saab kasutada patsientide individuaalseliseks, ühekordselt kasutatavateks geellaukudeks või juba UltraZTM geelliga ettevalmistatud ühekordselt kasutatavatel lauskudel. Geeli kuigi kirjeldatud tootele puhtel enesepuhastamisel hoolikalt juuste ja otuotsakardal olevat veega ning venijunde, et eemaldada kõrgest aur.

Kandimise

- 1-2 ml süstlas
- Straight Mac™-i labipärist otsik
- murtava korgiga

Näidustused

Tundikasti vandenähge geel UltraZTM kasutatakse hammaskindluste tundlikule esmaloomiseks sulgedes hammaskindluste allpool. Toode saab kasutada kabinetis hambarsti poolt või vajadusel kasutab patsienti toode kodus hammaste tihendiksüsteemi avas.

Vastunäidustused

- Ei ole mõeldud kasutamiseks rasedatele või imetavatele naisele.
- Ei ole mõeldud patsientidele, kes võivad geellisela alla neelata või sisse hingata.
- Ei ole mõeldud kasutamiseks alla 6 aasta vanustel patsientidel linna ematsandist ravainvõtte nõu pidamata.
- Toote UltraZTM geeliga allergia korral tutvute tootes sisalduvat allergiigeele veebihel [www.ultra-z.com](#). Allergilise reaktsiooni täheldamisel loputage kokkupunktekohta hoolikalt veega ja pöörduge arsti poole.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

- Probleemide tekkinise korral katkestage ravi ja pöörduge hambaarsti poole.
- Kalista toode kuumuse este ja/või otse päikesevalguse eest.
- Sisesta UltraZTM emaldamine tekkimud liigne materjal ja jäädgi emaldamiseks

hambaharja ja suu loputatakse. Toode MITTE alla neelata!

Samm- sammulisel juhised

Kasutamine – Individuaalselas / Aligner / UltraFitTM / geellaukas

- 1) Enne mudel taastmist tuleb mudelle märkida tundlikult piirkonnad. UltraZTM geeli viie kasutada ka patsiendi enda individuaalselas.
- 2) UltraZTM geeli on saadaval 1,2 ml süstlas. Täiskasane peaks jagama ligikaudu 1/3 kuni 1/2 süsta süstla. Kui kasutate kohalikku tundlikust ravies kohanadud geellaukude UltraAligneri, pange geel kohaleitud piirkonda ja väike kogu molaridest piirkonda, et geellaukus pisiks paiguti.
- 3) Geellisela kasutamisel süstla patsiendi seismist ja arsti soovitusel. Ravi võib kesta 15 minutist 1 tunniini või nii kaua, kui arst peab sobivaks.

Puhastamine – Individuaalselas / Aligner / UltraFitTM geellaukas

- 1) Kohe pärast geellauka esmalomist peab patsienti harjama ja loputama hambaivid veega, et emaldada kogu alla jäänu geel. ARGE neelake loputamise ajal lahust al. Peske individuaalselas viie Aligneri ja pane kapevi viie individuaalsela jaoks mõeldud karpi. UltraFitTM geelliselas viase prügikasti. Jaga kord tuleb kasutada värsket UltraZTM geeli.

Ladustamine ja kõrvaldamine

Hoiustada vastavalt väliskäsi paketi ettekile. Jättemise kõrvaldamine kohalike eeskirjade, juhiste ja regulatsioonide kohaselt.

Mitsimeguu teave

Teavituge täpsibest juhustumtest tootjat ja pädevat asutust.

www.ultra-z.com | 1-800-552-5512 |

801-572-4200

