


Enjuague de su Tubo de Drenaje

Su doctor puede pedirle que enjuague su tubo de drenaje. En algunos casos, enjuagar el tubo puede ayudar a evitar que se obstruya o permitir que drene más líquido. Para hacerlo usará solución salina normal esterilizada (agua salada). Su doctor le indicará cuánta solución salina normal usar y con qué frecuencia debe enjuagar el tubo.

Enjuague con _____ milímetros (mL) de solución salina _____ veces al día.

Suministros

- Jeringa de 10 mL de solución salina normal esterilizada
 - Toallita con alcohol
1. Lávese las manos con agua y jabón. Séquese con una toalla limpia. Reúna todos sus suministros y colóquelos sobre una superficie limpia cerca de usted.

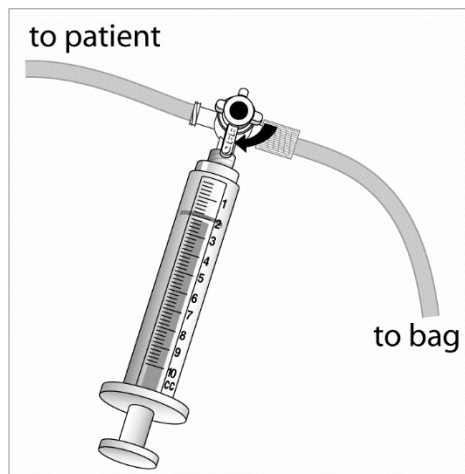

2. Frote la válvula "safe site" con una toallita con alcohol durante 15 segundos y asegúrese de que la válvula no toque nada después de frotarla.

3. Retire la tapa blanca de la jeringa de solución salina y empuje el émbolo para eliminar el aire antes de conectar la jeringa. A continuación, enrosque suavemente la jeringa en la llave de paso.
4. Hay una palanca en la llave de paso. Gire la palanca de modo que apunte hacia la bolsa de drenaje, alejándose de su cuerpo.
5. Empuje lentamente el émbolo de la jeringa para inyectar la solución salina en el tubo que va hacia su cuerpo. Es posible que tenga una sensación fría cuando lo haga. No debería sentir dolor.

No debería tener que forzar la entrada de la solución salina. **si la solución no entra con facilidad o si siente dolor al realizar el lavado, deténgase y no intente seguir haciéndolo.** Llame al departamento de Radiología Intervencionista para que le indiquen lo que debe hacer.

6. Gire la palanca de la llave de paso de modo que apunte de nuevo hacia la jeringa.
7. Desenrosque la jeringa.
8. La válvula "safe site" debería cambiarse cada 7 días o si está sucia. Esto se realiza girando y retirando la válvula para luego reemplazarla.
9. Mantenga un registro de cuánto líquido introduce por el tubo de drenaje.

Cuándo Llamar

- Fuga de líquido alrededor del tubo

- Dolor al enjuagar el tubo
- Problemas para enjuagar el tubo o si siente que hay resistencia
- Aparición de nuevo enrojecimiento, hinchazón o líquido de mal olor alrededor del lugar del tubo
- Si el tubo de drenaje se cae accidentalmente, cubra el lugar con grasa y luego llame.
- Cualquier pregunta o preocupación

teléfono con el código de área. El doctor le devolverá la llamada.

Número gratuito: **1-800-323-8942**.

A Quién Llamar

Radiología Intervencionista

Lunes a viernes, 8:00 am a 4:30 pm

(608) 263-9729, opción #3

Solicite dejar un mensaje para el enfermero o la enfermera de Radiología Intervencionista.

Después del horario de oficina, llame al **(608) 262-2122**. Con esto se comunicará con el servicio de operadores. Pida hablar con el Residente de Radiología Intervencionista de guardia. Deje su nombre y número de

Flushing Your Drain


Your doctor may ask you to flush your drainage tube. In some cases, flushing the tube can help keep it from getting clogged or help it drain more fluid. You will use sterile normal saline (salt water) to do this. Your doctor will tell you how much normal saline to use and how often to flush.

Flush with _____ milliliters (mL) of saline _____ times each day.

Supplies

- Sterile 10 mL normal saline syringe
- Alcohol swab

10. Wash your hands with soap and warm water. Dry with a clean towel. Gather all your supplies and place them on a clean surface near you.

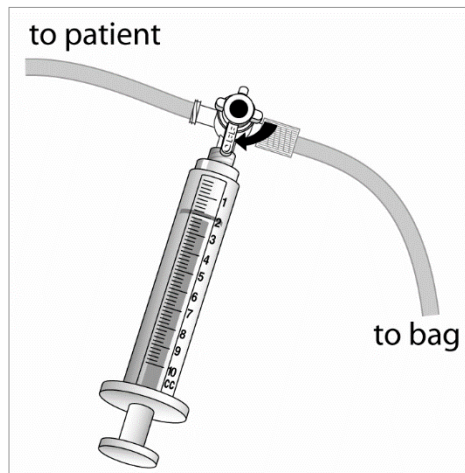

11. Scrub the safe site valve with the alcohol swab for 15 seconds and make sure valve does not touch anything after scrubbing.
12. Take the white cap off the saline syringe and push plunger on saline syringe to remove air before attaching the syringe.

Then gently screw the syringe onto the stopcock.

13. There is a lever on the stopcock. Turn the lever so that it points toward your drainage bag and away from your body.
14. Slowly push the plunger of the syringe to inject the saline into the tube going into your body. You may have a cool feeling while you are doing this. You should not have pain.

You should not have to force the saline in. **If the saline does not go in easily or if it is painful to flush, stop and do not continue to attempt to flush your drain.** Call Interventional Radiology and you will be told what to do.

15. Turn the stopcock lever so it points back towards the syringe.
16. Unscrew the syringe.
17. The safe site valve should be changed every 7 days or if soiled. This is done by twisting and removing the valve and replacing.
18. Keep track of how much fluid you flush into your drain.

When to Call

- Leaking around the tube
- Pain with flushing
- Trouble flushing the tube, or you feel resistance
- New redness, swelling or foul-smelling drainage around the tube site

- If your drain is accidentally pulled out, cover the site with gauze and then call
- Any questions or concerns

Who to Call

Interventional Radiology

Monday – Friday, 8:00 am – 4:30 pm

(608) 263-9729, option #3

Ask to leave a message for the Interventional Radiology nurse.

After hours, call **(608) 262-2122**. This will give you the paging operator. Ask for the Interventional Radiology Resident on call. Give your name and phone number with the area code. The doctor will call you back.

Toll-free number: **1-800-323-8942**.

Su equipo de atención médica puede haberle dado esta información como parte de su atención. Si es así, por favor úsela y llame si tiene alguna pregunta. Si usted no recibió esta información como parte de su atención médica, por favor hable con su doctor. Esto no es un consejo médico. Esto no debe usarse para el diagnóstico o el tratamiento de ninguna condición médica. Debido a que cada persona tiene necesidades médicas distintas, usted debería hablar con su doctor u otro miembro de su equipo de atención médica cuando utilice esta información. Si usted tiene una emergencia, por favor llame al 911. Copyright © 10/2024. Autoridad de los Hospitales y las Clínicas de la Universidad de Wisconsin Todos los derechos reservados. Producido por el Departamento de Enfermería. HF#5721s.