

ottobock.

オモニューレクサ プラス専用 手関節 硬性装具

マニューレクサ プラス (28P30) 手掌パッド (28P31)

肩関節亜脱臼用装具オモニューレクサ プラスと接続できる手関節装具です。オモニューレクサ プラスの腕前カフを取り外し懸垂ストラップに接続し使用します。

手部から回外位に導く力が強くなり、良肢位をより保持しやすくなります。また、肩関節から手部 MP 関節までの長さが決められるため、懸垂力が上がります。

- 脳卒中片麻痺向け
- オモニューレクサ プラスと連結して使用
- 上肢の懸垂力と回外力を高める
- 肩関節亜脱臼を、より積極的に懸垂
- 手関節から肩まで良肢位保持できる




マニューニューレクサ プラス(28P30)

オットーボックの脳卒中片麻痺・上肢のケア

オットーボックでは、肘関節伸展位(軽度屈曲位)で上肢懸垂し、上肢の重みを体幹で支えることで、全身バランスの向上を可能にするオモニューレクサ プラスを紹介しています。マニューニューレクサ プラスは、手関節・手指もケアしたいときにオモニューレクサ プラスと組み合わせて使用します。

- オモニューレクサ プラスと組み合わせてより高い懸垂力・回外力が得られる
- 肩から手関節、上肢の重み全てを体幹重心に近い点で支えられる
- 早期の歩行訓練での高い有用性
 - 上肢を装具に任せ、後方介助訓練に集中できる
 - 肩の痛みが緩和され、ユーザーも訓練に集中できる
 - 自然な上肢の振りができる
- しっかりと回外位にし、痙性抑制の効果が期待できる(痙性亢進の肢位と逆のため)

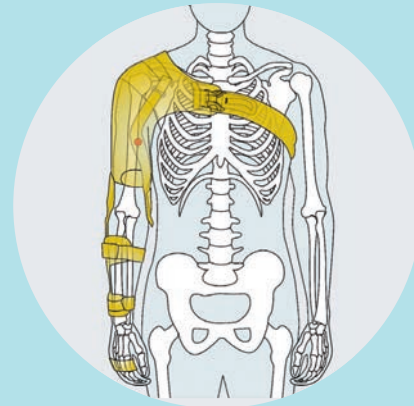

装着

身体状況によりますが、練習によって自己装着できるデザインになっています。オモニューレクサ プラスの前腕カフを外して取り付けます。



調整


左右兼用・フリーサイズでできており、各部を加工・調整して使用します。専用レンチとパッドが付属します。



オプション

手掌パッド (28P31)

別売の手掌パッドを取り付けると、手指のケアも可能になります。

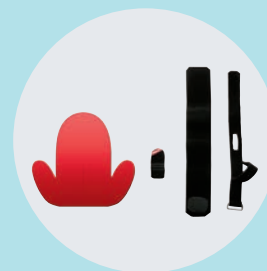

製品サイズ

マニューニューレクサ プラス

| 発注品番 | サイズ |
|-------|-----|
| 28P30 | フリー |
| -左右兼用 | |

手掌パッド

| 発注品番 | サイズ |
|-------|-----|
| 28P31 | フリー |
| -左右兼用 | |

製品WEBページ



お問い合わせ先

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログの内容は 2024 年 12 月現在のものです。