

Kompresné oblečenie MyActive

Pre aktívne zlepšenie rovnováhy a kontroly pohybov

Rodina produktov MyActive prináša individuálne kompresné oblečenie určené na zlepšenie kontroly pohybov a rovnováhy u ľudí s deficitom neuromotorickej kontroly. Hlavným účinkom tejto produktovej rady je poskytnutie dostatočnej podpornej funkcie bez obmedzenia pohybu a funkcie svalov, ktorá pozitívne ovplyvní držanie tela. Maximálny efekt a vysoký komfort nosenia sa dosahuje vďaka individuálnemu tvarovému obopnutiu.

Ortotické vybavenie optimalizuje celkovú polohu. Koncept kompresného oblečenia MyActive sa naopak zameriava na zlepšenie možností funkčného pohybu – dynamické ortózy podporujú aktívny pohyb a kontrolu držania tela.

Indikácie

Kompresné oblečenie je indikované pre deti a dospelých s neuromotorickými a muskuloskeletárnymi deficitmi, ktoré zhoršujú dynamickú stabilitu, posturálnu aktiváciu a kontrolu pohybu.

Kompresné oblečenie môže pozitívne ovplyvniť tieto symptómy:

- Mierna až ťažká (axiálna) hypotonia
- Deficity v dynamickej stabilizácii, kolísanie tonusu a nepredvídateľné ovládanie pohybu v dôsledku dyskinézy
- Stredná až ťažká hypertonia
- Deficity zmyslového vnímania celého tela



MyActive Top
654K1



MyActive Leggings
654K2

Variety produktu:


MyActive Top 654K1

- Oblasť trupu: 1vrstva/2vrstvy
- Rukáv: dlhý/krátky (možný i rukáv bez lemu)
- Zips: pod prsia, po pás, priebežný
- Spodné zakončenie: silikonové pásky, trieslovinový diel
- Abdominálne zosilnenie

MyActive Leggings 654K2

- Nohavice: 1vrstva/2vrstvy
- Nohavice: dlhé/krátké (možné i nohavice bezlemu pre kombináciu s AFO/DAFO ortézou)
- Rozkrok: štandardný, zips, pánsky klin

Prehľad výhod

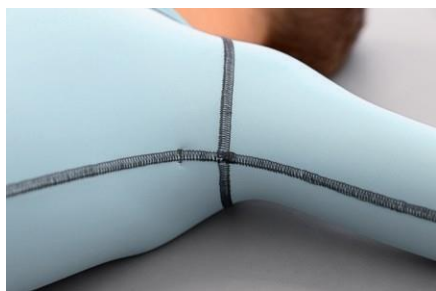

Priebeh švov zaisťuje príjemné obopnutie hornej časti i v podpazuší.



Prekrytie zipsu zabraňuje jeho kontakt s pokožkou.



Kompresia sa smerom k distálnemu koncu postupne znižuje, aby sa tkanina v oblasti kĺbu nezarezávala.



Cvoky približujú okraje zipsu k sebe, čo uľahčuje zapínanie.



Distálne švy sú veľmi pružné a uľahčujú obliekanie rukávov a nohavíc.



Silikonové pásky zaisťujú, aby nohavice neskĺzavali.

Účinok

- Kompresné oblečenie má rôzne sily kompresie v závislosti na oblasti tela aplikácie
- Prostredníctvom hlbokého tlaku a presného kontaktu zlepšuje vnímanie polohy končatín, trupu a stredu tela
- Potrebná somatická informácia, prenášaná prostredníctvom kompresie cez hlboké receptory, zdokonaluje funkčný pohyb a kontrolu tela
- Zvýšený vnútrobrušný tlak zaisťuje stabilizáciu a vzpriamenie chrbtice

Fit Kit 654K3

Pretože nie vždy je možné odhadnúť či bude mať kompresné oblečenie na užívateľa pozitívny vplyv, ponúkame testovací Fit Kit obsahujúci MyActive Top v troch veľkostiach, ktoré ešte môžete suchými zipsami individuálne prispôsobiť.

Pomocou Fit Kitu môžete otestovať či bude mať kompresia v oblasti trupu a panvy požadovaný vplyv na klinický obraz užívateľa.

Finálny produkt sa vyrába individuálne a presne pre konkrétneho užívateľa na základe 21 získaných mier v prípade MyActive Top, respektive 34 mier u MyActive Leggings.



Nefyziologické držanie tela bez MyActive



Zlepšené držanie tela s MyActive

