



Прецизност без усилие.

Лайнерът **iconiq** е персонализиран силиконов лайнер, проектиран и изработен индивидуално за всеки потребител въз основа на 3D сканиране на остатъчния крайник. Той съчетава усъвършенствани дигитални работни процеси с иновативен силиконов материал, за да направи персонализацията бърза, ефективна и достъпна за ежедневната клинична практика.

Изработени чрез уникален процес на 3D принтиране, лайнерите **iconiq** са прецизно оформени така, че да съответстват на индивидуалната анатомия на всеки потребител. Резултатът е сигурен и комфортен интерфейс, който осигурява надеждност и постоянна ефективност при ежедневна употреба.

Предимства за потребителите

- Индивидуално прилягане за по-голям комфорт
- Равномерна компресия за подобрена стабилност
- Текстилна вътрешна повърхност за надеждно задържане
- Лесно поставяне и сваляне
- Лесно почистване
- Защита при контакт с прясна, солена и хлорирана вода

Предимства за ортопедичните техници

- Подходящ за потребители с ампутация на ниво ТТ, ТF, КD и Sume
- Подходящ за всички нива на мобилност при деца и възрастни
- Равномерна или променлива дебелина на стената (3–7 mm)
- Регулируема дебелина на омекотяващия слой (5–13 mm)
- Три нива на твърдост по Шор, съобразени с индивидуалните нужди на потребителя
- Чист процес без използване на гипс
- Лесно възпроизводим за ефективно повторно протезиране



Ефективен дигитален процес.

1

Сканиране на остатъчния крайник

Сканирайте остатъчния крайник с подходящ скенер или с друг, който обичайно се използва в практиката по ортезиране и протезиране (O&P). Уверете се, че сканирането е пълно и може да бъде експортирано във формат .stl, .ply или .obj.

2

Конфигурация и поръчка

Влезте в **custom fabrication** с Вашата Ottobock идентификация. Качете сканирания файл, въведете данните на пациента и конфигурирайте лайнера.


3

Изработка и доставка


Лайнерът се изработва в рамките на 4-8 работни дни. Доставка варира в зависимост от крайната дестинация.

Индивидуални варианти на външната повърхност.

iconiq може да бъде поръчан с гладка или текстилна външна повърхност в зависимост от клиничните изисквания и предпочитанията на потребителя. Текстилният вариант улеснява поставянето и свалянето, като същевременно осигурява допълнителна стабилност и комфорт. Предлага се с изцяло текстилна или частично текстилна повърхност. Вариантът с гладко покритие е лек, лесен за почистване и бързосъхнещ, като позволява визуален контрол на остатъчния крайник.

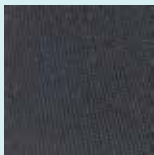

Черен текстил

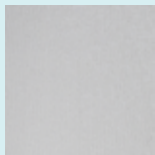

Сив текстил



Телесен цвят текстил



Силикон с покритие



Текстурирана вътрешна повърхност за надеждно захващане

Технически данни

Артикулен номер	Ниво на ампутация	Заклучващ механизъм	Външна обвивка	Цвят
6Y800=C-W-W-99	TT, Syme	омекотяване	силикон	прозрачно
6Y801=C-T-W-7	TT, Syme	омекотяване	текстил	черно
6Y801=C-T-W-0	TT, Syme	омекотяване	текстил	телесен цвят
6Y801=C-T-W-1	TT, Syme	омекотяване	текстил	сиво
6Y830=C-W-W-99	TF, KD	омекотяване	силикон	прозрачно
6Y831=C-T-W-7	TF, KD	омекотяване	текстил	черно
6Y831=C-T-W-0	TF, KD	омекотяване	текстил	телесен цвят
6Y831=C-T-W-1	TF, KD	омекотяване	текстил	сиво

Артикулен номер	Заклучващ механизъм	Външна обвивка	Допълнителни компоненти	Цвят
6Y800	TT без текстилно покритие	C омокотяващ лайнер	W без текстилно покритие	99 прозрачно
6Y801	TT с текстилно покритие		T изцяло текстилно покритие	7 черно
6Y830	TF без текстилно покритие		F частично текстилно покритие	1 сиво
6Y831	TF с текстилно покритие			0 телесен цвят

Препоръчани комбинации за протезиране

TT	TF
114S1 MyFit TT	21Y2 QuickValve
21Y2 QuickValve	21Y21 ClickValve
453A30/40 ProFlex sealing sleeve	21Y14 PushValve



Create your **custom fabrication** account now.
lifelounge.io/custom-fabrication