

Ortesi gamba-piede per osteoartrosi di ginocchio

Agilium Freestep 3.0

Art. 50K4=3-Lato-Misura

(montante Laterale, atteggiamento Varo), compromissione compartimento Mediale

Art. 50K4=3-Lato-Misura-LG

(montante Mediale, atteggiamento Valgo), compromissione compartimento Laterale



Versione 3.0

RDM 2430616



Gonoartrosi Laterale

(Gambe a "X")

50K4=3*-LG

Gonoartrosi Mediale

(Gambe a "O")

50K4=3*

Disponibile kit di prova:

• 50T3 (montante Laterale)

• 50T3=LG (montante Mediale)

Ortesi gamba-piede per il trattamento antalgico della gonartrosi mono-compartimentale (atteggiamento di valgismo o varismo di ginocchio): mediante un innovativo **principio dei "3 punti"** di spinta, **impiega le forze generate dal contatto col terreno per scaricare l'area dell'articolazione interessata** (spinta mediale o laterale) esercitando un'azione di sollievo sul ginocchio; disponibile **con montante Laterale (in caso di atteggiamento varo) o Mediale (atteggiamento valgo, versione -LG)**

Indicazioni

- Osteoartrosi mono-compartimentale di ginocchio e rotula (mediale o laterale), **da lieve a moderata**
- Per Pazienti di tutte le età


Effetti

- Contrasta l'atteggiamento valgo o varo dell'articolazione di ginocchio tramite spinta di correzione laterale o mediale **durante la fase dinamica del ciclo del passo**
- Riduzione dell'eversione della caviglia
- Promuove la mobilità alleviando il dolore
- Riduzione dell'assunzione di antidolorifici e riduzione/procrastinazione di eventuali interventi chirurgici

Caratteristiche

- La **versione -LG**, con montante Mediale (ginocchio valgo), ha la **staffa di collegamento modellata al malleolo** per un maggior comfort
- **Non limita il ginocchio** (come le classiche ortesi a ginocchiera per gonartrosi)
- **Suola flessibile e ritagliabile**, con piastra integrata di collegamento ad un'articolazione malleolare libera
- Montante con regolazione al malleolo e modellabile per aderire meglio alla conformazione della gamba
- Chiusura al polpaccio tramite cinturino regolabile, a sgancio rapido
- Design snello e struttura leggera

Codice	Lato	Taglia	Altezza centro malleolo-terra (cm)
50K4=3-L-XS		XS	5,3-6,2
50K4=3-L-S		S	6,3-7,2
50K4=3-L-M	sx	M	7,3-8,2
50K4=3-L-L		L	8,3-9,2
50K4=3-L-XL		XL	9,3-10,3
50K4=3-R-XS		XS	5,3-6,2
50K4=3-R-S		S	6,3-7,2
50K4=3-R-M	dx	M	7,3-8,2
50K4=3-R-L		L	8,3-9,2
50K4=3-R-XL		XL	9,3-10,3

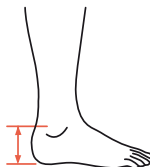

Ginocchiera per osteoartrosi di ginocchio, con regolazione della flessione-estensione Agilium Reactive

Art. 50K324=Lato



RDM 1936183

Ginocchiera per il **trattamento antalgico della gonartrosi mono-compartmentale**: con il tradizionale principio dei “3 punti di spinta”, **fornisce correzione in varo o in valgo per il trattamento dell’osteoartrosi laterale o mediale del ginocchio**; ha inoltre la possibilità di **limitare individualmente l’ampiezza del movimento** (ROM - Range Of Motion) tramite appositi supporti intercambiabili forniti in dotazione

Indicazioni


- Osteoartrosi mono-compartmentale mediale o laterale di ginocchio e rotula, **da moderata a severa**, con instabilità del ginocchio
- Situazioni che richiedono lo scarico mono-compartmentale del ginocchio (trattamento post-operatorio di ricostruzione del menisco o lesioni dei legamenti che richiedono scarico articolazione su un solo lato)
- Artrite Reumatoide
- Per livelli di mobilità medio/alta

Effetti

- Riduce atteggiamento di varismo o valgismo del ginocchio scaricando il compartimento interessato
- Allevia il dolore e permette maggiore mobilità/attività
- Riduzione dell’assunzione di antidolorifici e riduzione/procrastinazione di eventuali interventi chirurgici

Caratteristiche

- **Meccanismo di spinta laterale a livello del ginocchio**, regolabile tramite semplice brugola, che corregge l’atteggiamento di varismo o di valgismo del ginocchio fino a circa 10° (regolazione da fare da seduto, con ginocchio flesso ed in scarico)
- Struttura leggera, a **singolo montante laterale**, facile da indossare
- **Cinturino sotto-rotuleo** con chiusura “a boa” e sgancio/aggancio rapido (molto pratico da seduto)
- **Blocchi opzionali**, tramite appositi supporti forniti in dotazione, della flessione a 45°/60°/75°/90° e dell’estensione a 0°/10°/20°/30°/40°
- Imbottitura laterale al ginocchio in Technogel®
- **Misura unica** con elementi flessibili auto-adattanti, disponibile per arto destro o sinistro

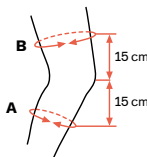

	Lato	Circonferanza (cm)	
	d/s	A	30-60
		B	39-80

Ginocchiera telescopica per osteoartrosi di ginocchio, con sistema dinamico ad Y Agilium Forte

Art. 50K305=Lato-Misura-MO (montante Mediale e cinturino ad "Y" Laterale / atteggiamento Varo)

Art. 50K305=Lato-Misura-LO (montante Laterale e cinturino ad "Y" Mediale / atteggiamento Valgo)



RDM 2430646



Gonoartrosi Laterale
(Gambe a "X")

50K305=-LO

Gonoartrosi Mediale
(Gambe a "O")

50K305=-MO

Ginocchiera con montante singolo telescopico, **regolabile in altezza**, per il **trattamento antalgico della gonoartrosi mono-compartmentale**: sulla base del principio dei "3 punti di spinta" e **tramite il sistema dinamico brevettato di cinghie ad "Y"** in posizione mediale o laterale, fornisce **correzione in valgo o in varo per il trattamento dell'osteoartrosi laterale o mediale** del ginocchio; ha inoltre la **possibilità di limitare individualmente l'ampiezza del movimento** (ROM - Range Of Motion) tramite appositi supporti intercambiabili forniti in dotazione.

Disponibile in due versioni a seconda dell'atteggiamento da trattare:

- Art. 50K305=Lato-Misura-MO (atteggiamento Varo)

- Art. 50K305=Lato-Misura-LO (atteggiamento Valgo)

Indicazioni

- Osteoartrosi mono-compartmentale mediale o laterale di ginocchio e rotula, **da moderata a severa**, con instabilità del ginocchio
- Dolore al ginocchio, mediale o laterale (speroni ossei, usura precoce della cartilagine, erosione del menisco, restringimento dello spazio articolare)
- Situazioni che richiedono lo scarico mono-compartmentale del ginocchio (trattamento post-operatorio di ricostruzione del menisco o lesioni dei legamenti che richiedono scarico articolazione su un solo lato)
- Artrite Reumatoide


Effetti

- Riduce atteggiamento di varismo o valgismo del ginocchio scaricando il compartimento interessato
- Allevia il dolore e permette maggiore mobilità/attività
- Riduzione dell'assunzione di antidolorifici e riduzione/procrastinazione di eventuali interventi chirurgici

Caratteristiche

- Sistema dinamico di cinghie a Y, brevettato, che scarica il compartimento del ginocchio interessato e ne impedisce la rotazione (cinturini appositi)
- 3 velcri anteriori di chiusura numerati e valvole leggere, rigide, per fornire stabilità
- Imbottitura di coscia e gamba pre-sagomate, ritagliabili
- Asta del cosciale e del gambale telescopiche** (2 lunghezze possibili per ogni asta)
- Articolazione di ginocchio policentrica con blocchi opzionali, tramite appositi supporti forniti in dotazione, dell'estensione a 0°/10°/20°/30°/45° e della flessione a 0°/10°/20°/30°/45°/60°/75°/90°
- Struttura leggera, a singolo montante, altamente adattabile**
- Design aperto ed avvolgente, materiali traspiranti e solo 3 misure per comparto (mediale o laterale)

Lato	Taglia	Circonf. (cm)	
		Coscia B	Polpaccio A
d/s	XS/S	36 - 46	28 - 36
	M/L	46 - 60	36 - 46
	XL/3XL	60 - 81	46 - 61

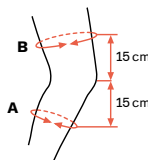

Ginocchiera per osteoartrosi di ginocchio, con sistema dinamico ad Y Agilium Vantage

Art. 50K306=Lato-Misura-MO (montante Mediale e cinturino ad "Y" Laterale / atteggiamento Varo)

Art. 50K306=Lato-Misura-LO (montante Laterale e cinturino ad "Y" Mediale / atteggiamento Valgo)



RDM 2430627



Gonoartrosi Laterale
(Gambe a "X")

50K306=*-LO

Gonoartrosi Mediale
(Gambe a "O")

50K306=*-MO

Ginocchiera con montante singolo per il trattamento antalgico di lievi forme di gonartrosi mono-compartmentale: sulla base del principio dei "3 punti di spinta" e **tramite il sistema dinamico brevettato di cinghie ad "Y"** in posizione mediale o laterale, fornisce **correzione in valgo o in varo per il trattamento dell'osteoartrosi laterale o mediale** del ginocchio; ha inoltre la **possibilità di limitare individualmente l'ampiezza del movimento** (ROM - Range Of Motion) tramite appositi supporti intercambiabili forniti in dotazione.

Disponibile in due versioni a seconda dell'atteggiamento da trattare:

- Art. 50K306=Lato-Misura-MO (atteggiamento Varo)

- Art. 50K306=Lato-Misura-LO (atteggiamento Valgo)

Indicazioni

- Osteoartrosi mono-compartmentale mediale o laterale di ginocchio e rotula, **da lieve a moderata**, con instabilità del ginocchio
- Dolore al ginocchio, mediale o laterale (speroni ossei, usura precoce della cartilagine, erosione del menisco, restringimento dello spazio articolare)
- Situazioni che richiedono lo scarico mono-compartmentale del ginocchio (trattamento post-operatorio di ricostruzione del menisco o lesioni dei legamenti che richiedono scarico articolazione su un solo lato)
- Artrite Reumatoide


Effetti

- Riduce il lieve atteggiamento di varismo o valgismo del ginocchio scaricando il compartimento interessato
- Allevia il dolore e permette maggiore mobilità/attività
- Riduzione dell'assunzione di antidolorifici e riduzione/procrastinazione di eventuali interventi chirurgici

Caratteristiche

- Sistema dinamico di cinghie a Y, brevettato, che scarica il compartimento del ginocchio interessato e ne impedisce la rotazione (cinturini appositi)
- 4 velcri anteriori di chiusura numerati
- Imbottitura di coscia e gamba pre-sagomate, ritagliabili
- Articolazione di ginocchio policentrica con blocchi opzionali, tramite appositi supporti forniti in dotazione, dell'estensione a 0°/10°/20°/30°/45° e della flessione a 0°/10°/20°/30°/45°/60°/75°/90°
- **Struttura leggera, a singolo montante, adattabile**
- Design aperto ed avvolgente, materiali traspiranti e solo 3 misure per comparto (mediale o laterale)

Lato	Taglia	Circonf. (cm)	Circonf. (cm)
		Coscia B	Polpaccio A
d/s	XS/S	36 - 46	28 - 36
	M/L	46 - 60	36 - 46
	XL/3XL	60 - 81	46 - 61

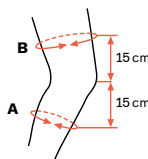

Ginocchiera per osteoartrosi retro-patellare Agilium Patella

Art. 50K6=Lato-Misura



RDM 1936171



Ginocchiera per il **trattamento della osteoartrosi retro-patellare tramite meccanismo dinamico di riallineamento rotuleo a forma di "C"** (correzione attuata solo in determinati gradi di flessione del ginocchio - fino ai 30°)

Indicazioni

- Osteoartrosi retro-patellare
- Instabilità rotulea
- Sindrome femoro-rotulea dolorosa
- Condromalacia o condropatia rotulea
- Esiti di lussazione e sublussazione patellare o da lesione del tendine rotuleo

Effetti

- **Contrasta la lateralizzazione della rotulea e ne allevia la pressione durante la flessione del ginocchio**
- Fornisce sollievo dal dolore e supporta le attività quotidiane

Caratteristiche

- **Meccanismo dinamico di riallineamento della rotula, auto-adattativo:** permette una correzione mirata della lateralizzazione della rotula tra i 10° ed i 30° di flessione di ginocchio, evitando inoltre la sovra-correzione oltre i 30° (dove la rotula è già stabile)
- **Supporto rotuleo laterale a "C"** regolabile tramite appositi velcri laterali e due ganci tenditori mediali
- Rivestimento interno a doppia tramatura, antiscivolo, con imbottitura per rotule ad elevata sensibilità
- Buona vestibilità sotto gli indumenti (disponibile anche eventuale cover sportiva di rivestimento)

Cover sportiva Art. 29K129

Copre completamente *Agilium Patella*, in questo modo può essere utilizzata anche per gli sport di contatto
Vedere figura a fianco

	Lato	Mis.	Circonf. A (cm)	Circonf. B (cm)
	d/s	XS	32 - 35	40 - 44
	d/s	S	35 - 38	44 - 48
	d/s	M	38 - 41	48 - 52
	d/s	L	41 - 44	52 - 56
	d/s	XL	44 - 48	56 - 61
	d/s	XXL	48 - 52	61 - 65