



ottobock.

Juvo B7

À chaque moment, sa position

Juvo B7

Le Juvo B7 est le nouveau fauteuil électrique de la gamme Juvo. Il est disponible en 2 bases motrices différentes : roues avant motrices ou roues centrales motrices.

Ce fauteuil multi positions dispose de la nouvelle assise APS* biomécanique et de la nouvelle assise contour à double densité offrant une ergonomie maximale et un véritable confort.

Sa forme permet une stabilité latérale du tronc et corrige les déviations pour que la surface d'assise soit toujours en position horizontale.

Le système de calibration permet d'assurer une pré-inclinaison permanente.

*Advanced Power Seat

Traction

Avec les roues avant motrices

En intérieur, grâce à son petit rayon de braquage et sa capacité à s'approcher des meubles, le Juvo traction est le partenaire privilégié.

En extérieur, sa configuration offre une bonne performance dans les montées, face aux obstacles comme les bordures.

Il permet également à l'utilisateur un positionnement optimal de ses jambes et offre une vision parfaite lors de la conduite.



6 roues

Avec les roues centrales motrices

Cette base motrice offre une conduite intuitive et peut être utilisée indépendamment en intérieur grâce à un rayon de giration ultra compact, et en extérieur grâce à une tenue de route et à des capacités de franchissement performantes.

Le Juvo 6 roues permet une répartition optimale du poids total.



Personnalisation des positions

Cette assise combinée à l'électronique ICON Control offre des possibilités de programmation illimitées et une expérience de conduite incomparable. L'ICON Control dispose également de 8 fonctions mémoires programmables afin que l'utilisateur retrouve ses positions favorites.

La combinaison des différentes fonctions électriques a été conçue pour offrir en standard les positions suivantes :



-30°

Active Touch

L'utilisateur est en position active stimulante pour réduire les tensions corporelles. Avec le lift, cette fonctionnalité offre un accès idéal aux espaces de travail.



-15°

Active Access

L'inclinaison antérieure (proclive -15°) facilite les transferts de l'utilisateur. Les poignées réglables, en option, assurent sécurité et soutien lors de l'appui sur les repose-pieds qui s'abaissent jusqu'au sol.



Active Relax

Cette position de semi-verticalisation favorise la circulation sanguine, la respiration et la digestion.



L'utilisateur a également la possibilité d'être en position couchée pour le repos.



Électronique et commandes spéciales

Boîtier de conduite ICON Control

de conception ergonomique avec clavier interactif. Chaque bouton peut être programmé individuellement, jusqu'à 8 positions mémorisables.

- Différents joysticks possibles
- Calibrage proportionnel du joystick
- Bouton principal
- Écran interactif
- Touches programmables
- Bouton Mode
- Couleur du boîtier
- Prise chargeur magnétique
- Prise jack externe
- Prise USB-C
- Connecteur XLR

- Capteur de lumière
- Interface bluetooth
- Écran couleur 3,5"
- Bouton Mode
- Prise jack externe
- Touches directionnelles

Module Multi switch ICON

Boîtier d'accès rapide à toutes les fonctions électriques du Juvo B7, y compris les fonctions mémoires.

Sécurité et services

Une nouvelle application mobile ajoute de la valeur à l'expérience utilisateur.

Ottobock Service Assist* se connecte à l'ICON et fournit une connexion sécurisée entre l'utilisateur et le prestataire de services pour résoudre directement les petits problèmes, sans qu'un technicien soit physiquement présent.

Ce nouvel accès au fauteuil permet le diagnostic à distance, la modification de certains paramètres et la planification des visites de service, par téléphone ou par chat directement avec l'utilisateur.

Disponible
1^{er} trimestre
2025



Commandes spéciales

- 1 : Mo-Vis micro joystick
- 2 : Mo-Vis multi joystick
- 3 : Mo-Vis all round joystick light



Options et accessoires

Choix appui-tête Unilink Comfort Plus

ou Combo



Manchette ergonomique



Cale cuisse



Cale coude Unilink




Appui sous rotulien

Appui-mollet, réglable en angle



- 1 : Appui-tête Comfort Plus
- 2 : Appui-tête Combo
- 3 : Ceinture rétractable, boucle métallique
- 4 : Rail additionnel pour barre de dossier multifonction dossier Contour
- 5 : Palette centrale électrique à compensation en aluminium, séparée – Petite ou grande taille
- 6 : Manchettes ergonomiques
- 7 : Barre multi fonction fixée sur l'accoudoir
- 8 : Cale cuisse

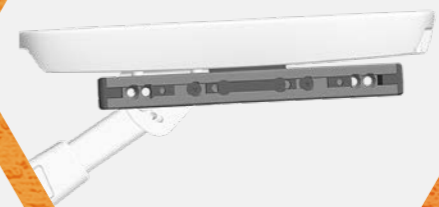

Caractéristiques techniques

Modèle	Juvo B7
Finition	Traction / 6 roues
Electronique	ICON Control (Curtis)
Vitesse	6 km/h et 10 km/h
Largeur totale	63 à 64 cm
Longueur totale avec repose-pieds	124 à 126 cm
Largeur d'assise	32 – 56 cm
Hauteur d'assise	42 – 58 cm
Profondeur d'assise	30 – 56 cm
Inclinaison du dossier	85° à 175° (réglage électrique)
Bascule d'assise	0° à 45° (ou -15° à +30°)
Lift	20 cm (traction) – 30 cm (6 roues)
Autonomie moyenne	30 km (en fonction de l'utilisation)
Tenue en pente	10° / 17%
Poids max utilisateur	160 kg
Hauteur obstacle franchissable	5 – 6,5 cm


Couleurs de châssis



Gris clair métallique



Gris titane

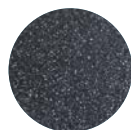

Anthracite métallique



Noir mat



Bleu métallique




Pourpre métallique



Rouge cardinal



Orange métallique

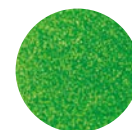

Vert pomme métallique

Ottobock France

4 rue de la Réunion CS 90011

91978 Courtaboeuf Cedex France

T +33 (0) 1 69 18 88 30 • F +33 (0) 1 69 07 18 02

information@ottobock.fr • www.ottobock.fr

Fabricant Ottobock Healthcare. Lire attentivement la notice d'utilisation.

Information destinée au grand public.