


EBS колянна става 3R60

Бъдете уверени и продължавайте напред.

3R60 осигурява контролирано сгъване на коляното при стъпване на петата и ефикасен хидравличен контрол в маховата фаза. Комфортът и сигурността са гарантирани от характеристиките на устройството за адаптивно EBS сгъване.

3R60 с нов дизайн:

- Прогресивно омекотяване при стоеж за хармонично и естествено движение при натоварване и адаптивност към различни ситуации от ежедневието
- Комфорт при ходене и висока степен на сигурност – дори по неравни терени и наклони до 10°
- Лесно инициране на маховата фаза и прогресивно махово съпротивление за различна бързина на ходене без дискомфорт в завършващата фаза.
- Ниско тегло и голям ъгъл на сгъване от 150° за повече свобода на движенията, напр. при коленичене
- Колянната става 3R60 се предлага с 4 вида конектори, подходящи за долни крайници с различни нива на ампутация

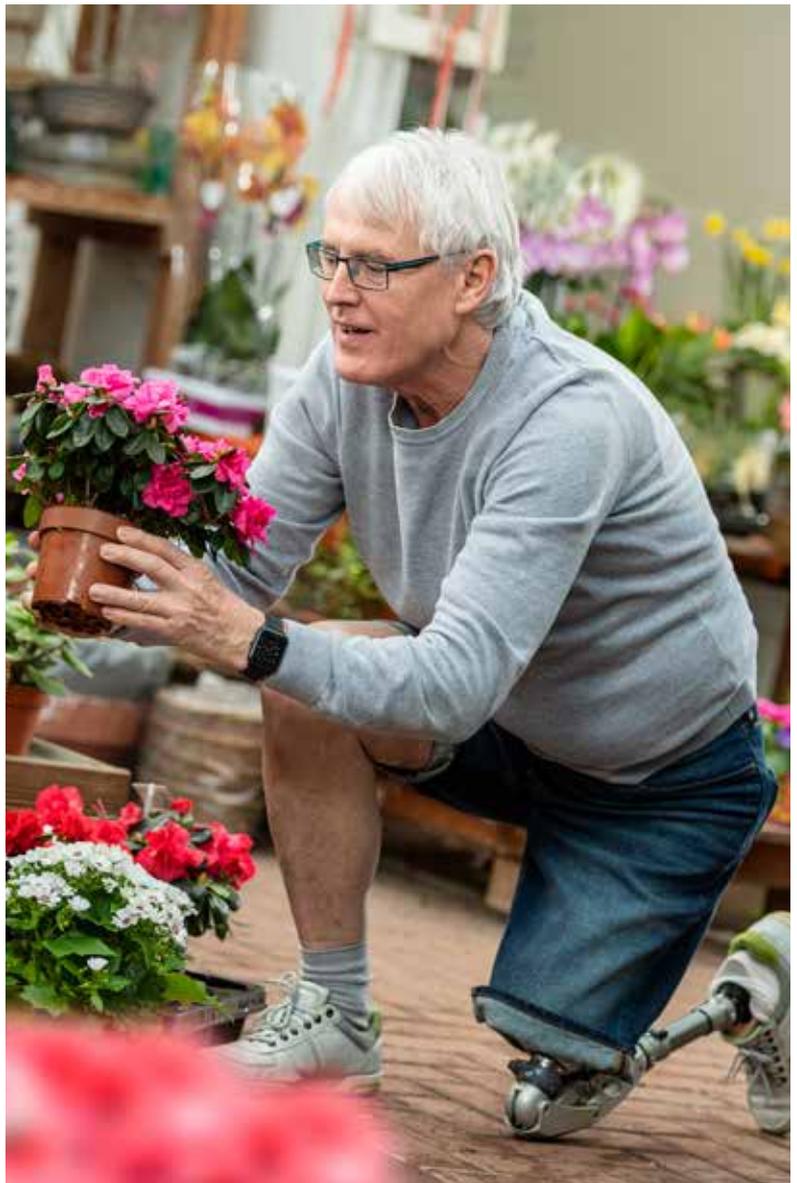

Техническа информация

Артикулни номера	3R60	3R60=HD	3R60=KD	3R60=ST
Степен на мобилност	2 + 3	2 + 3	2 + 3	2 + 3
Дистален конектор	Пирамида	Пирамида	Пирамида	Пирамида
Проксимален конектор	Пирамида	Пирамида под ъгъл 10 °	Адаптор за вграждане в ламинация	Конектор с резба
Ъгъл на сгъване на коляното	150 °	150 °	150 °	150 °
Системна височина	171 mm	174 mm	193 mm	189 mm
Проксимална системна височина до референтна точка на центровка	-2 mm	1 mm	20 mm	16 mm
Дистална системна височина до референтна точка на центровка	173 mm	173 mm	173 mm	173 mm
Тегло	845 g	880 g	940 g	845 g
Максимално тегло на потребителя	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg



Подходящи компоненти за изработка на протеза

Модулната колянна става с функция EBS (ергономично балансирана крачка) се адаптира индивидуално съобразно теглото и мобилността на потребителя, гарантирайки удобно ходене с високо ниво на сигурност – дори при неравни терени и наклони. Характеризира се с голям ъгъл на сгъване и почти естествен модел на походка. Лайнерът Skeo Sealing гарантира сигурно и надеждно свързване към протезата и се използва особено лесно поради копринено-гладката си външна повърхност без текстилно покритие. Комбинирането на 3R60 и протезно стъпало Trias осигурява необходимата подкрепа на потребителя. Благодарение на плавното прехождане и отличното пружиниране, съхраняващо кинетичната енергия, Trias подпомага контролираното движение и осигурява постоянна стабилност – по време на ходене и при продължителен стоещ.

Индивидуална протезна гилза

с лайнер 6Y110 Skeo sealing и 21Y21 ClickValve

Спокойно сядане и коленичене

и по-естествена походка дори при различна бързина на ходене - EBS колянна става 3R60

Контролирани движения

и високо ответно връщане на енергията – 1C30 Trias