

ottobock.

# アバンギャルド ティーン 2 アバンギャルド ティーン 2 VR

小児用モジュラー車いす



# お子様の成長をサポートする、ドイツ 「ぴったり」「しっかり」のフレームで、

## アバンギャルド ティーン 2

幅広いサイズ展開から選べる、小児用車いすの基本形。漕ぎやすさ・座りやすさに合わせた機能やオプションも豊富にご用意。お子様にぴったりの1台をご用意します。

## アバンギャルド ティーン 2 VR

アバンギャルド ティーン 2 に、スイングアウト・取外し可能なフットサポートを採用したモデルです。

## 特長

- 幅広いサイズ展開
- ワイドタイプのフロントフレーム
- お子様に合わせて選べる豊富なオプション
- 高い剛性を備えた、シンプルで飽きのこないデザイン
- 耐荷重 **90kg**
- 座奥行やキャンバー角が変更可能 \* オプション




## 標準機能

### 幅広いサイズ展開

最小サイズ：座幅 22cm x 座奥行 24cm


最大サイズ：座幅 36cm x 座奥行 40cm

はじめての車いすから、育ち盛りのお子様まで、様々なニーズに対応可能です。

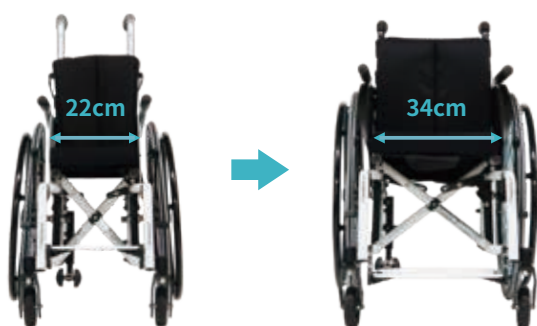


### リヤホイール キャンバー角

使いやすさや目的に合わせてキャンバー角を設定できます。0° / 2° / 4° / 8° の4段階から選択でき、パーツ交換で購入後の変更も可能です。(別売)

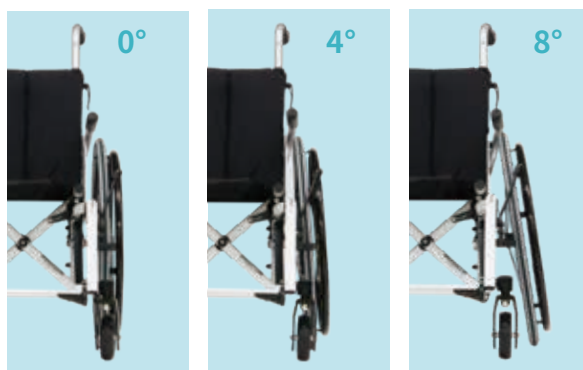

### フロントフレーム ワイド

座面より6cm 広がったフロントフレームで乗り降り簡単。装具もぶつかりません。ストレートフレームも選べます。(座幅 26cm 以上)

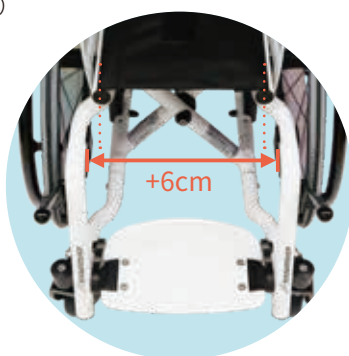

### プッシュハンドルショート

短くても握りやすい形状です。ロングタイプも選べます。



### 1 枚式フットパネル

「動きやすさ」「座りやすさ」は足元から。1 枚式フットパネルなら、足がしっかりと安定します。2 枚式も選べます。



# の小児用モジュラー車いす。 漕ぎやすく、座りやすい!

## 主なオプション

### 座奥行が調整可能

フレームの長さはS/M/Lの3サイズ。  
それぞれ3段階で奥行き調整が可能で、成長期のお子様にも長くご使用いただけます。(調整パーツは別売となります。)



### 転倒防止装置

後ろから踏むだけで簡単に出し入れできます。  
必要に応じて。右側・左側・両側に取付が可能です。




### プラスチック製クロージングプロテクター

お子様の服をタイヤの汚れから守ります。



### 高さ調整式後オフセットプッシュハンドル

プッシュハンドルを高くしても、お子様の漕ぎやすさは変わりません。

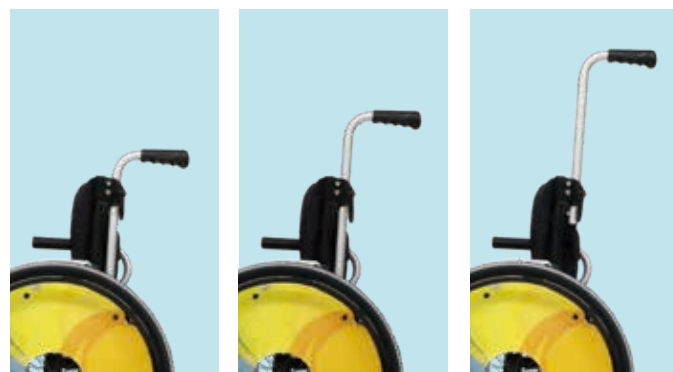

### スポークプロテクター



スペクトル



ロボット



ミラクル



グラフィック



ネットワーク

## テクニカルインフォメーション

座幅	22 ~ 36cm (2cm 刻み)
座奥行	S : 24 / 26 / 28cm, M : 30 / 32 / 34cm, L : 36 / 38 / 40cm ・各サイズ内で調整可能 ・座幅 22/24cm は S のみ
背高	17.5 ~ 40cm (2.5cm 刻み)
ホイール	20 / 22 / 24"
キャンバー角	0 / 2 / 4 / 6 / 8° * 別売パーツで調整可能
重量	11.5kg~

## シートカラー



ブラック




ブルー



レッド

## フレームカラー


### 標準

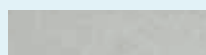

ブリリアントシルバー



チャコールブラック

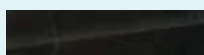

ブラック 光沢



アイスブルー



スパークルオレンジ




レッドパープル



マリンブルー



スカイブルー

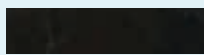


マットブラック




キャンディレッド



グラニースミス

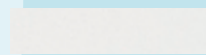

ホワイト



ピンク

### オプション



ピュアメタル ブルー



ピュアメタル グリーン



ピュアメタル ブロンズ



ピュアメタル レッド

### お問い合わせ先

オットーボック・ジャパン株式会社 [www.ottobock.com/ja-jp](http://www.ottobock.com/ja-jp)  
〒105-0012 東京都港区芝大門 1-9-9 野村不動産芝大門ビル 4F

- ・本カタログの内容は2024年4月現在のものです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- ・本カタログの内容を転載する場合には弊社までご連絡ください。
- ・お取り扱いに関しては、お近くの補装具製作所/取扱販売店などにお問合わせください。
- ・取扱販売店が不明な場合や製品の詳細についてはオットーボック・ジャパンにお問合わせください。