

ottobock.

カーボン製 短下肢装具 ウォークオン シリーズ

トリマブル (28U23)

リアクション (28U24)

リアクション ジュニア (28U25)



Quality for life



WalkOn®

シンプルなデザインで軽量の "カーボン製短下肢装具" がなめらかな歩行を小児から成人まで補助します。

たわみ・反発力

カーボン素材でできた足底部のたわみ・反発力は自然な踏み返しを補助します。つま先離れの時には、反発力は推進力となり、滑らかに次の一步を踏み出すことができます。



軽量性

カーボンは耐久性に優れ、とても軽量の素材です。そのため足に掛かる重さを気にすることなく、なめらかに足を振り出すことができます。


- ・トリマブル (28U23) 重さ: 約170g*
 - ・リアクション (28U24) 重さ: 約210g*
 - ・リアクション ジュニア (28U25) 重さ: 約90g*
- * カフバンド含むSサイズの重量

Trim + able (簡単トリミング)

足底部にひと回り大きいゴム底をつけることで、ハサミなどでトリミングを行っていただけます。作業には、グラインダーなどの工作機を使わないため、カーボン切削する手間を軽減でき、作業時間を短縮することができます。



ウォークオン トリマブル (28U23)

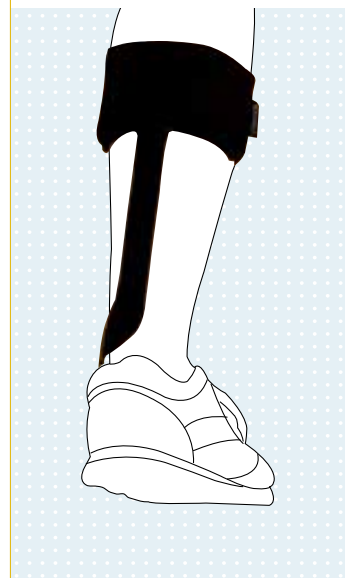

目立ちにくいデザイン

内側から立ち上がった支柱は、ふくらはぎの後方を走行し、正面からは目立ちにくいデザインとなっています。

足底部が薄く、多くの靴に対応しやすくなっています。また、インソールを併用していただくことにより、快適なフィット感で歩行していただけます。



ウォークオン リアクション (28U24)




高い支持性

下腿を支える前面支持部が膝伸展筋の機能をサポートします。ウォークオン トリマブル (28U23) に比べ、より大きな反発力を生み出し、歩を進めやすい構造になっています。

アライメント調整

標準で付属している補正用ウェッジ(次ページ③)を加工、使用することで、下肢のアライメント調整をおこなえます。

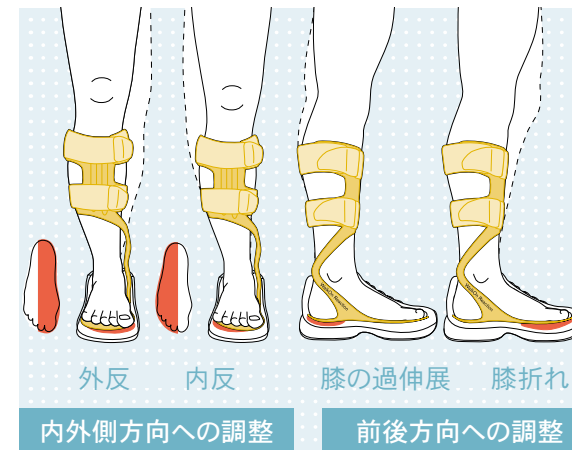

ウォークオンリアクション ジュニア(28U25)



ウォークオン リアクションに KIDS サイズ登場

カーボンのたわみと反発力

カーボン素材でできた足底部のたわみ・反発力は自然な踏み返しを補助します。

立脚後期では背屈制動をするとともに、つま先離れの際の反発力を生み出します。

反発力は推進力となり、滑らかに次の一步を踏み出すことができます。



製品規格 下記のサイズ表からお選び下さい。

ウォークオン トリマブル (28U23)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U23=R36-39-SHORT	右	S-SHORT	22.5 ~ 24.0	32
28U23=R36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U23=R39-42		M	24.0 ~ 26.5	36
28U23=R42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U23=R45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39
28U23=L36-39-SHORT	左	S-SHORT	22.5 ~ 24.0	32
28U23=L36-39		S	22.5 ~ 24.0	35
28U23=L39-42		M	24.0 ~ 26.5	36
28U23=L42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U23=L45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39

ウォークオン リアクション (28U24)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U24=R36-39	右	S	22.5 ~ 24.0	35
28U24=R39-42		M	24.0 ~ 26.5	36
28U24=R42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U24=R45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39
28U24=L36-39	左	S	22.5 ~ 24.0	35
28U24=L39-42		M	24.0 ~ 26.5	36
28U24=L42-45		L	26.5 ~ 29.5	37.5
28U24=L45-48		XL	29.5 ~ 31.0	39

ウォークオンリアクション ジュニア (28U25)

発注品番	左右	サイズ	適用範囲	
			靴サイズ(cm)	装具高さ(cm)
28U25=R24-27	右	S	16.0-18.0	20.5
28U25=R27-30		M	18.0-20.0	24.5
28U25=R30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=R33-36		XL	22.0-24.0	29.4
28U25=L24-27	左	S	16.0-18.0	20.5
28U25=L27-30		M	18.0-20.0	24.5
28U25=L30-33		L	20.0-22.0	27
28U25=L33-36		XL	22.0-24.0	29.4

共通 ・サイズの選択は、普段の靴サイズを目安にしてください。
 ・2つのサイズにまたがる場合は、装具高さを考慮してお選びください。


お問い合わせ先

製品構成



側方回内牽引パーツについて

(発注品番 28Z10/28Z10=1 左右兼用)
 このパーツを用いることにより、装具との一体感を高めることができます。
 薄手の素材は靴を履いたときの不快感を最小限に抑えます。

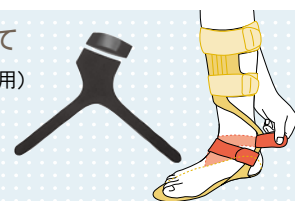

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2020 年 2 月現在のものです。