

ottobock.

Zenit onn.

Dein Tag. Dein Tempo.
Dein onn.





Jeden Tag den Alltag meistern.

Vom Vater mit dem Architektur-Gen gesegnet, erwarb Frank zusätzlich Kenntnisse in den Fachbereichen Bauingenieurwesen und Rechtswissenschaften. Nach seinem Verkehrsunfall stand für ihn fest, dass barrierefreies Bauen sein Arbeitsschwerpunkt sein würde.

Als Architekt aus Leidenschaft führt er die Familientradition fort. Sowohl beruflich als auch privat hat er ein Faible für ästhetisches Design. Daher ist ihm bei Gegenständen des täglichen Lebens eine ansprechende Optik besonders wichtig – so wie bei seinem **Zenit onn**, der ihn durch seinen eng getakteten Alltag begleitet.



Wenn dein Alltag Höchstleistung verlangt.

Wer Franks Alltag näher betrachtet, fragt sich schnell, wie er all diesen Anforderungen gerecht wird. Die Antwort: Er kann. Der „ganz normale Wahnsinn“ zwischen Architekturbüro, Sachverständigentätigkeit und Seminarbetrieb treibt ihn täglich zu Höchstleistungen an.

Dass Frank seit einem Verkehrsunfall im Rollstuhl sitzt, spielt dabei kaum eine Rolle – ausser dann, wenn er barrierefreie Bauprojekte plant und seine eigenen Erfahrungen einfließen lassen kann. „Auch wenn wir hinter Ländern wie Spanien und Frankreich noch zurückstehen“, sagt Frank, „gewinnt das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Sektor zunehmend an Bedeutung – und das ist gut so.“

Der Architekt weiss, wovon er spricht: Bei einer Reise nach Frankreich hat er sich selbst ein aktuelles

Bild von barrieregerechter Bauweise gemacht. Mit dabei natürlich sein **Zenit onn** Aktivrollstuhl, der laut Frank „am besten funktioniert, wenn man ihn am wenigsten bemerkt“.

Zurück im Rheinland wartet der Alltag: neue Projekte, zahlreiche Anfragen – von Einfamilienhäusern bis hin zu barrierefreien öffentlichen Bauten. Dazu Gutachten und Seminare. Der ganz normale Wahnsinn eben.



”
*Bei meinen Auftraggebern
und Kooperationspartnern
geniesse ich eine hohe
Glaubwürdigkeit, wenn
es um barrierefreies
Bauen geht.“*



Kein Tag ist wie der andere

Ob im barrierefreien Büro, im Seminarraum vor wissbegierigen Teilnehmern oder auf der Baustelle – Frank legt grossen Wert darauf, seinen Alltag selbstbestimmt zu gestalten.

Der Unterschied: faltbar oder starr.

faltbar →

Der **Zenit onn F / CLT** ist ein adaptiver Faltrahmenrollstuhl für aktive und sehr aktive Anwender, der durch sein offenes Rahmen-design maximale Flexibilität und einfache Anpassung bietet.



← starr

Der **Zenit onn R / CLT** ist ein Starrrahmenrollstuhl für aktive und sehr aktive Anwender, der durch sein Open-Frame-Design maximale Stabilität und eine effiziente Kraftübertragung ermöglicht.



Extras →

Terra Sitzkissen
Verbesserter Sitzkomfort mit hoher Stabilität und optimaler Druckverteilung.



Terra



Terra Aquos



Terra Flair

Ruckzuck **Zenit onn**. Das Faltwunder mit Starrrahmen-Feeling.

Von einem modernen Faltrahmenrollstuhl im Look eines Starrrahmens darfst du erwarten, dass er sich optimal an deinen aktiven Alltag anpasst. Wenn es schnell gehen muss, reicht beim **Zenit onn** eine Hand – und schon ist er fahrbereit

Mehr Bewegungsfreiheit

Der freigemachte Fussraum sorgt für einfache Transfers und ermöglicht ein komfortables, problemloses Trippeln im Alltag.



Klar im Design. Stark in deinem Alltag.

Dir sind Design und einfache Handhabung wichtig? Dann ist der **Zenit onn** genau richtig für dich. Diese sieben Features machen den Unterschied.

Der Körperschwerpunkt: das A und O

Der **Zenit onn** ist so konzipiert, dass du durch Drehung des Antriebsradadapters die Feineinstellung des Schwerpunkts um 1–2 cm aktiver bzw. passiver gestalten kannst. Dieses kommt sowohl erfahrenen Anwendern zugute, die bereits mit der Einstellung ihres Körperschwerpunkts vertraut sind, als auch Erstanwendern. Eine zusätzliche Feinjustierung ist durch die stufenlose Einstellung über den Rahmen möglich. In der CLT-Version ist der Antriebsradadapter fest verschweisst. Die leichteste Variante des **Zenit onn** wiegt damit nur 8,9 Kilogramm.



Exakte Einstellung der Vorderräder

Dank des neuen Vorderradadapters wird eine stufenweise Einstellung der Vorderräder für einen exakten Geradeauslauf möglich.



Abklappbar und winkeleinstellbar

Ein Einstellbereich von 20° (einstellbar in 5 Stufen) erlaubt eine individuelle Anpassung des Rückenteils an deine speziellen Bedürfnisse. Dein Techniker und du entscheiden, welcher Winkel für dich der richtige ist. Klappst du beim Falten deines **Zenit onn** übrigens auch das Rückenteil ab, wird das geringe Packmass zusätzlich optimiert.

Flexibel einstellbarer Rücken

Das mechanische Rückengelenk ermöglicht einen vorklapp- und winkelverstellbaren Rücken, erleichtert den Transport, reduziert das Packmass und sorgt für eine optimale Sitzhaltung mit Einstellwinkeln von -10° bis +10°.



Klar im Design. Stark in deinem Alltag.

Bereit, wenn du es bist

Deine Zeit ist kostbar – entsprechend strukturiert ist dein Tag. Am Ziel anzukommen bedeutet für dich vor allem, schnell mobil und einsatzbereit zu sein. Genau deshalb lässt sich der **Zenit onn** mit minimalem Aufwand entfalten.

Und wenn der nächste Termin wartet, profitierst du von seinem kompakten Packmass – ideal für den Transport im Auto.



Patentierete Fixierung

Als eine weitere Option kannst du unsere patentierte Fussstützenfixierung bestellen, um so zusätzliche Stabilität zu erlangen.


Ein Tag mit Frank.

In meiner Freizeit genieße ich es, mich von herausragenden architektonischen Leistungen und Museen für Baukunst inspirieren zu lassen. Allein das Rheinland bietet mir dafür reichlich Gelegenheit.



Individuell bis ins Detail.

Farben für deine persönliche Gestaltung.

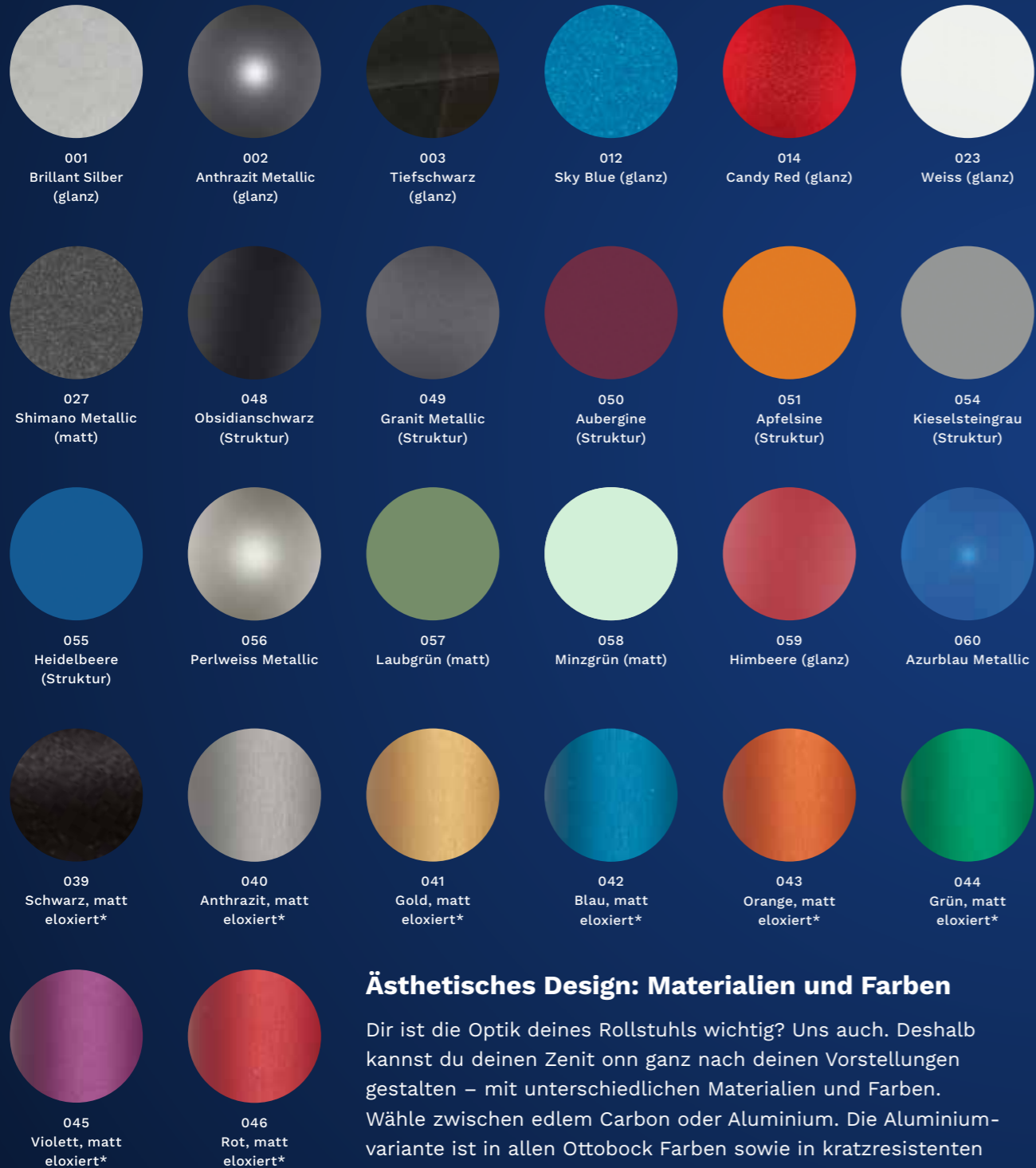

Ästhetisches Design: Materialien und Farben

Dir ist die Optik deines Rollstuhls wichtig? Uns auch. Deshalb kannst du deinen Zenit onn ganz nach deinen Vorstellungen gestalten – mit unterschiedlichen Materialien und Farben. Wähle zwischen edlem Carbon oder Aluminium. Die Aluminiumvariante ist in allen Ottobock Farben sowie in kratzresistenten Eloxalfarben erhältlich.

* nicht für CLT-Versionen



Zenit onn F
Art.-Nr. 480F168=1_AA02_C



Zenit onn R CLT
Art.-Nr. 480F168=1_AA05_C



Zenit onn R
Art.-Nr. 480F168=1_AA04_C

Du bist an weiteren Infos
und einer Fachberatung interessiert?
Ein Techniker deines Vertrauens
unterstützt dich gern bei der
Konfiguration deines **Zenit onn**.