

# Recomendaciones de agujas para ▼ Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida)

Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) es una **pluma precargada multidosis** desechable.<sup>1</sup>

La pluma contiene **4 dosis fijas**, cada dosis se administra semanalmente.<sup>1</sup>

Inyectar **una sola inyección semanal**, debajo de la piel (por vía subcutánea).<sup>1</sup>

Las **agujas** necesarias para su administración **no están incluidas** con Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida).<sup>1</sup>



Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida) debe usarse con agujas compatibles como:<sup>2</sup>

Código nacional	Descripción
166550.8	BDTM aguja para pluma TW 0,25mm (32G) x 4mm
165125.9	BDTM aguja para pluma TW 0,25mm (31G) x 5mm
165127.3	BDTM aguja para pluma TW 0,25mm (31G) x 8 mm
165128.0	BD Aguja para pluma TW 0,33 mm (29G) x 12,7mm
162596.0	Agujas BD Autosield™ Duo 0,30mm (30G) x 5mm
162595.3	Agujas BD Autosield™ Duo 0,30mm (30G) x 8mm
370700	Novofine 30G agujas 100 U 6MM
390245	Novofine 29G 12MM

Las agujas recomendadas para Mounjaro® tienen que cumplir la normativa ISO 11608-2. El listado no es exhaustivo, solo contiene algunos ejemplos\*

El equipo médico determinará qué tamaño de aguja es apropiado para cada situación




▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.<sup>1</sup>

La longitud de la aguja no afecta al volumen inyectado de tirzepatida.<sup>2</sup>

El calibre de la aguja puede afectar a la fuerza requerida al presionar el botón de dosificación de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida).<sup>2-5</sup>

Los calibres más altos requieren más fuerza para administrar el medicamento.<sup>2</sup>

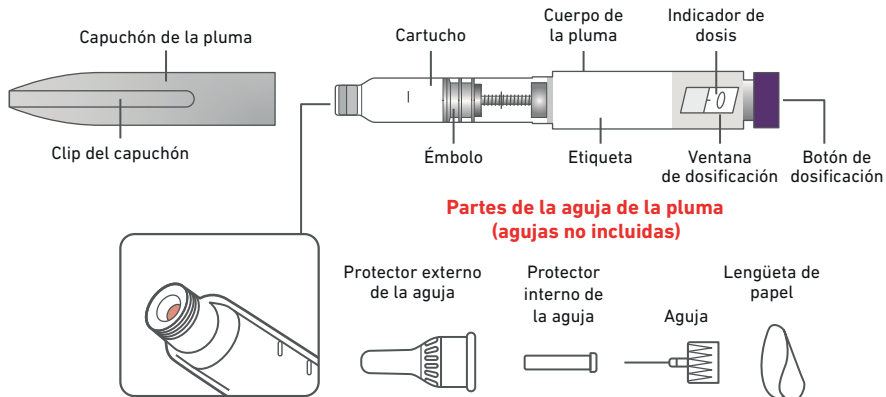

Escanea este código QR para acceder a un vídeo con las instrucciones de uso de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida).



Recuerda leer el prospecto y seguir las instrucciones de uso de este medicamento.

*Lilly*

\*La información sobre el cumplimiento y la compatibilidad de la norma ISO se puede encontrar en la caja de la aguja, en el sitio web del fabricante o poniéndose en contacto directamente con el fabricante.

Referencias: **1.** Ficha técnica de Mounjaro® KwikPen® (tirzepatida). Disponible en: [https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx\\_162204\\_es.pdf](https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2024/20240419162204/anx_162204_es.pdf). Último acceso en mayo 2024 **2.** Data on file, Eli Lilly and Company and/or one of its subsidiaries. **3.** Usach I, Martínez R, Festini T, et al. Subcutaneous injection of drugs: literature review of factors influencing pain sensation at the injection site. *Adv Ther.* 2019;36(11):2986-2996. **4.** Frid AH, Kreugel G, Grassi G, et al. New insulin delivery recommendations. *Mayo Clin Proc.* 2016;91(9):1231-1255. **5.** Frid A, Hirsch L, Gaspar R, et al. New injection recommendations for patients with diabetes. *Diabetes Metab.* 2010;36(suppl 2):S3-S18.

*Lilly*

*Lilly*